

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000
アクセスアダプタ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

****【構造図（代表図）】**

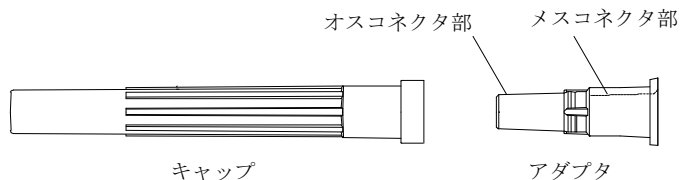

****【原材料】**

構成部品	原材料
アダプタ	ポリプロピレン

****【原理】**

メスコネクタ部を筒先がロック形状の注射筒に接続し、輸液・輸血ライン等のラインの途中又は薬液ボトルのニードルレスアクセスポートへオスコネクタ部を挿し込むことにより、医薬品を混注する。

【使用目的又は効果】

筒先がロック形状の注射筒に接続して、ニードルレスアクセスポートに差し込む器具である。

***【使用方法等】**

1. 包装から本品を取り出す。
- *2. 本品のメスコネクタ部を注射筒に、確実に接続する。
3. 本品のオスコネクタ部先端まで薬液を満たす。
4. 接続するニードルレスアクセスポート及びキャップ部を消毒用アルコール綿等で消毒する。
5. 本品のキャップを外し、オスコネクタ部をニードルレスアクセスポートにまっすぐ押し込み、薬液を注入する。
6. 注入終了後、ニードルレスアクセスポートからまっすぐ本品を引き抜く。

***【組み合わせて使用する医療機器】**

本品は、以下の医療機器のニードルレスアクセスポートにアクセスすることが可能である。

- * プラネクタ (承認番号 21100BZZ00335000)
- * プラネクタを組み込んだ医療機器
- * JMS 人工腎臓用血液回路 (承認番号 15900BZZ00364000)
- * JMS 人工腎臓用血液回路 S T (認証番号 21800BZZ10097000)
- * セーフミック TPN バッグ (届出番号 34B1X00001000057)

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- *1. 注射筒と接続する際は次の事項に注意すること。
 - (1) メスコネクタ部に対し、過度な締めつけや横方向への負荷を加えたりしないこと。[メスコネクタ部の破損により液漏れ、空気混入が生じるおそれがある。]
 - (2) メスコネクタ部に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]

- ** (3) キャップ付きの製品は、キャップをつけたまま接続すること。
- ** (4) 緩みや外れが生じないように確実に接続し、漏れ等の異常がないことを確認すること。
- **2. キャップを外す際は、ねじる又は傾けるような力を加えないこと。 [本品が注射筒から外れるおそれがある。]
3. 本品を注射筒へ接続した状態で、過度な負荷をかけないこと。 [本品が外れる、及び接続が緩み薬液が漏れるおそれがある。]
4. ニードルレスアクセスポートへの接続時及びその後の引き抜き時には、ねじらず、まっすぐ操作を行うこと。 [ねじった場合は、注射筒との接続部が緩み、液漏れ等が生じるおそれがある。]

****【使用上の注意】**

****【重要な基本的注意】**

1. オスコネクタ部はロック構造となっていないため、注液中及び注液後はニードルレスアクセスポートに接続した状態で放置しないこと。
- *2. 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について確認すること。

****【不具合・有害事象】**

その他の不具合

空気混入、漏れ、外れ、緩み、破損

****【保管方法及び有効期間等】**

****【有効期間】**

3 年 [自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107