

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 容器アダプタ 44035000
ネオシールドバイアルカバー

再使用禁止


【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


〈構造図〉

*1. バイアル口径 20 mm 用

〔外観〕

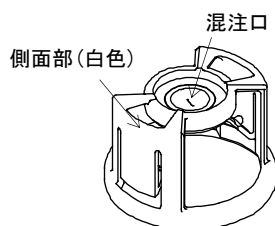


〔側面〕

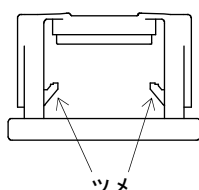


*2. バイアル口径 15 mm 用

〔外観〕

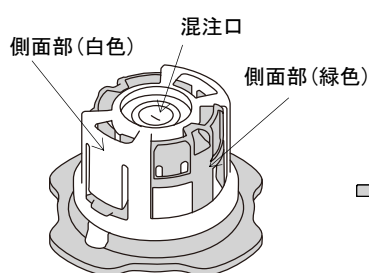

〔側面〕

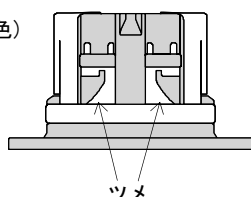

**〈原材料〉

構成部品	原材料
混注口	イソブレンゴム、シリコーンオイル

〈仕様〉


項目	性能
耐圧性	50kPa

【使用目的又は効果】


患者に輸液を注入することを目的とした体外器具に容器を接続するために用いる接続器具。

【使用方法等】


1. 包装から本品を取り出します。
- *2. バイアル口径 20 mm 用は側面部 (白色) を、バイアル口径 15 mm 用は側面部 (緑色) を把持し、バイアルに押し込み装着します。

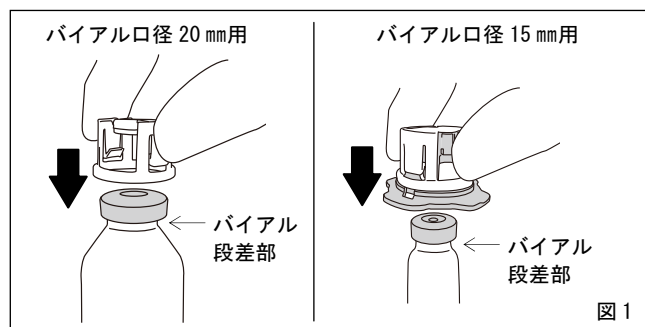

- *3. 装着後、ツメがバイアル段差部に掛かったことを確認します。
- *4. 側面部 (白色) をバイアル側へ押しつけることでツメの掛かりをより確実にします。

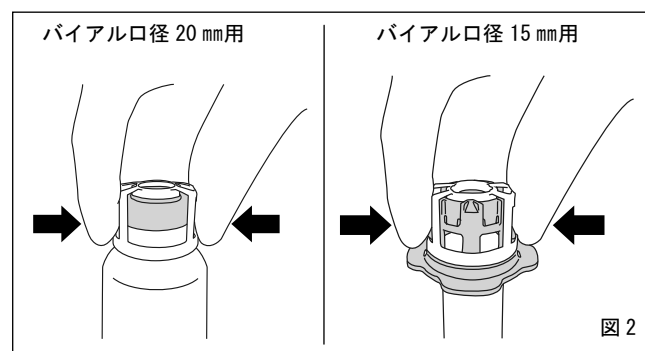

- **5. 本品の A' とネオシールドトランスファー (以下、トランスファーという。) の A の位置を合わせ、バイアルを真っ直ぐ奥まで押し込み接続します。

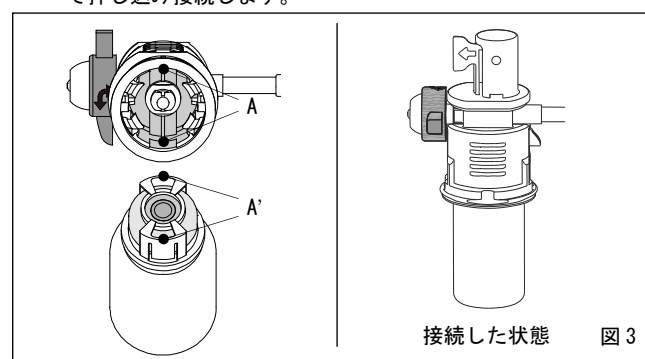

6. 薬液を調製した後、トランスファーから接続を切り離します。
- **7. 使用後、本品をバイアルに装着したまま廃棄します。

〈組み合わせて使用する医療機器〉

バイアルに装着した本品を、ネオシールドトランスファー (届出番号 34B1X00001000085) のバイアル接続部に接続して使用します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- *1. バイアル口径 15 mm用をバイアルに装着する場合は、側面部(緑色)を把持すること。[側面部(白色)を把持すると、本品にバイアルを押し込めない。]
- **2. 本品にトランスファーを接続する際は、【使用方法等】5. で指定した位置に合わせる。[位置がずれた状態で無理に押し込むと、トランスファーが破損するおそれがある。]
- 3. バイアルの形状により、ツメがバイアル段差部に掛からない場合は使用しないこと。
- 4. バイアルに装着した本品は、バイアルから外さないこと。[液漏れや汚染が生じるおそれがある。]
- *5. 使用前に、本品とバイアルの適合性を確認すること。なお、本品とバイアルの適合性が不明な場合は、弊社に問い合わせること。
- 6. 注射針を用いて混注等しないこと。[混注口が破損し、液漏れや汚染のおそれがある。]

【使用上の注意】

- *〈不具合・有害事象〉
その他の不具合
漏れ、破損

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年 [自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 082-243-5806