

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

ラコールNF 配合経腸用半固形剤専用アダプタ

再使用禁止


(ISO 80369-3 タイプ)

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈構造図〉

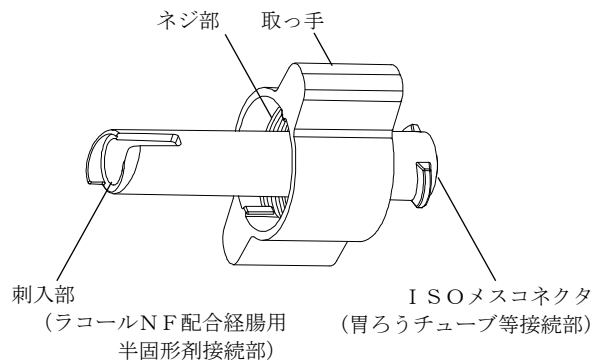

- ・ ISOメスコネクタは ISO 80369-3 に対応している。
- ・ 本品はポリプロピレンを使用している。

〈原理〉


本品の刺入部をラコールNF 配合経腸用半固形剤の口栓に刺入し、本品内腔部と連通させ、ISOメスコネクタに接続した胃ろうチューブ等を介して、ラコールNF 配合経腸用半固形剤を供給する。

【使用目的又は効果】



経腸栄養剤を供給するために用いる専用の経腸栄養注入用器具。

【使用方法等】


1. 包装を開封し本品の刺入部のみを露出させる（図 1）。

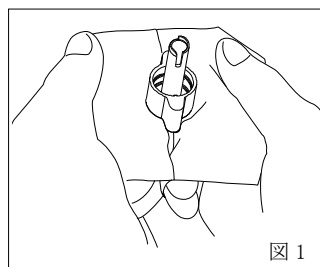

2. 包装の外側から本品を持ち（図 2）、本品の取っ手をラコールNF 配合経腸用半固形剤の容器側面に向け、本品を口栓に刺入する（図 3）。

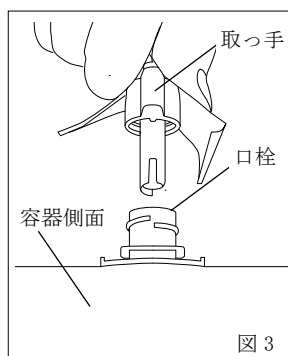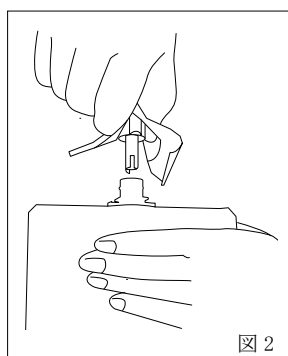

3. 取っ手を右に回し、緩みや外れが生じないようにしっかりと接続する（図 4）。

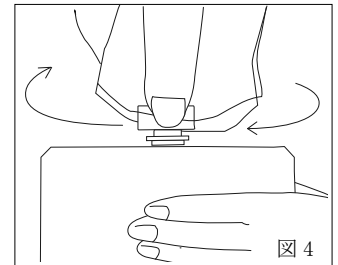

4. 包装から本品を取り外し、ISOメスコネクタを胃ろうチューブ等の ISO 80369-3 に適合したオスコネクタに、緩みや外れが生じないようにしっかりと接続する。

【組み合わせて使用する医薬品】

本品はラコールNF 配合経腸用半固形剤（承認番号 22600AMX0052 3）と胃ろうチューブ等を接続するために使用します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 本品をラコールNF 配合経腸用半固形剤へ接続する際は、過度な締めつけや横方向への負荷を加えたりしないこと。[本品が破損するおそれがある。]
2. 胃ろうチューブ等を接続する際は、過度なかん合をしないこと。[コネクタが外れない、又はコネクタが破損するおそれがある。]
- *3. ネジ部及びコネクタのかん合部に栄養剤等が可能な限り付着しないように注意すること。[接続部に緩みが生じる、又は栄養剤の固着によりコネクタが外せなくなるおそれがある。]
4. 接続後は、漏れ等の異常がないことを確認すること。
5. ラコールNF 配合経腸用半固形剤との接続時及び使用中は、本品に強い衝撃を与えないこと。[接続部分が破損するおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 使用中は接続部の緩み、漏れ、破損等注意到し、定期的に確認すること。
- *2. 本品を 60℃以上の温度にさらさないこと。[変形や接続部からの漏れ、外れ等が生じるおそれがある。]

*〈不具合・有害事象〉

その他の不具合

漏れ、緩み、破損、固着、変形

【保管方法及び有効期間等】

*〈有効期間〉

使用期限：3 年 [自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

販売提携

大塚製薬株式会社

東京都千代田区神田司町 2-9

販売提携

株式会社大塚製薬工場

徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原 115

お問い合わせ

株式会社大塚製薬工場 輸液 DI センター

東京都千代田区神田司町 2-2

TEL 0120-719-814

FAX 03-5296-8400