

ジェイフィード E N 採液チップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈構造図〉


*1. 中径タイプ

中径タイプは薬はい等の広口容器に使用する。

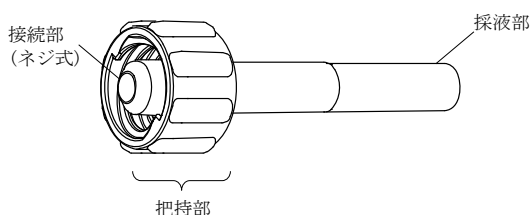

*2. 細径タイプ

細径タイプは容量が 5mL 未満の経腸栄養用シリンジに接続してアンプル等の細口容器に使用する。

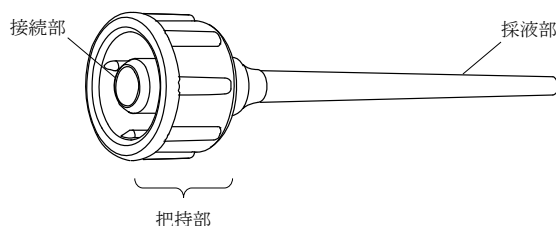

・接続部は ISO 80369-3 に適合した経腸栄養用シリンジの外筒先端と接続可能である。

*〈原材料〉

構成部品	原材料
中径タイプ	ポリプロピレン
細径タイプ	ポリエチレン

【使用目的又は効果】

シリンジに取り付けて経腸栄養剤等を採取するために用いる採液針である。

【使用方法等】

*1. 中径タイプ

- (1) 包装から本品を取り出します。
- (2) 本品の接続部を ISO 80369-3 に適合した経腸栄養用シリンジの外筒先端に、本品を右に回しながら確実に接続します。
- (3) 本品の採液部より栄養剤等を吸引します。
- (4) 本品の把持部を持ち、本品を左に回しながら経腸栄養用シリンジを取り外します。

*2. 細径タイプ

- (1) 包装から本品を取り出します。
- (2) 本品の接続部を ISO 80369-3 に適合した経腸栄養用シリンジ（容量が 5mL 未満のもの）の外筒先端に確実に押し込み接続します。

(3) 本品の採液部より栄養剤等を吸引します。

(4) 本品の把持部を持ち、本品を回しながら経腸栄養用シリンジを取り外します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- *1. 経腸栄養用シリンジに接続する際は、緩みや外れが生じないようにしっかりと接続すること。[接続が浅い場合、漏れ、空気混入、外れが生じるおそれがある。]
- *2. 中径タイプを経腸栄養用シリンジに接続する際は、過度なかん合をしないこと。[経腸栄養用シリンジが外れなくなるおそれがある。]
3. 本品の接続部と経腸栄養用シリンジの外筒先端とのはめ合わせ部に栄養剤等が可能な限り付着しないように注意すること。[接続部に緩みが生じるおそれがある。]
- *4. 細径タイプから経腸栄養用シリンジを取り外す際は、本品の把持部を持ち、回しながら取り外すこと。[採取した栄養剤等が飛散するおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 使用中は接続部の緩み、液漏れ、閉塞等の異常がないことを定期的に確認すること。
2. 粘度が高い又は不溶解物を含む栄養剤等を吸引する場合、詰まりが生じ、吸引できなくなるおそれがある。

*〈不具合・有害事象〉

その他の不具合

空気混入、漏れ、外れ、緩み、詰まり、固着

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年 [自己認証（当社データ）による]

包装の使用期限欄を参照すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107