


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器
口腔・嚥下機能訓練器具 63278001

JMS 医療用ペコぱんだ

【形状・構造及び原理等】

〈構造図〉

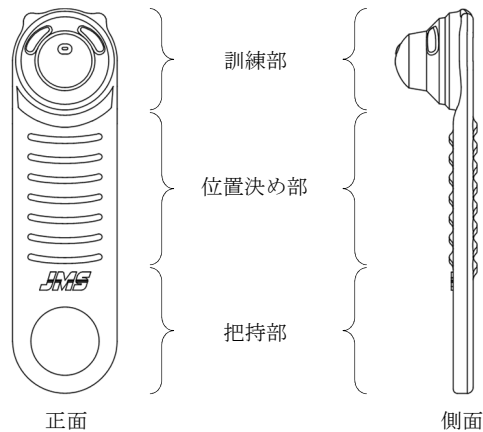

〈原材料〉

本品は、スチレン系熱可塑性エラストマーを使用している。

*〈仕様〉

規格	色調	押し潰し強度※
SS	ブルー	舌圧 5kPa 相当
S	ピンク	舌圧 10kPa 相当
MS	パイオレット	舌圧 15kPa 相当
M	グリーン	舌圧 20kPa 相当
MH	オレンジ	舌圧 25kPa 相当
H	イエロー	舌圧 30kPa 相当

※ JMS 舌圧測定器（承認番号 22200BZX00758000）の舌圧値に基づく。

〈原理〉

本品の訓練部を口腔内に挿入し、位置決め部を上下前歯で軽く挟み、訓練部の舌上での位置を決め、その状態で舌を上下させることによって、訓練部を繰り返し押し潰し、舌筋等に一定の負荷を掛ける。

【使用目的又は効果】

口腔や嚥下の機能の低下に対して行うリハビリテーションに使用する。

【使用方法等】

1. 使用する前に、訓練部を指で 2～3 回押し潰す(図 1)。



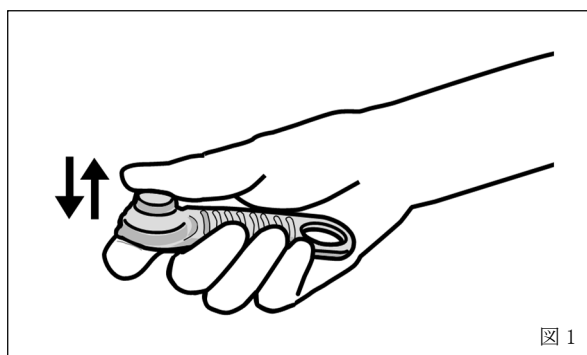


図 1

2. 把持部を手を持ち、訓練部の凸部を舌の方に向け、口腔内に挿入する。
3. 位置決め部を上下の前歯で軽く挟み、訓練部の口腔内舌上での位置を決める(図 2)。

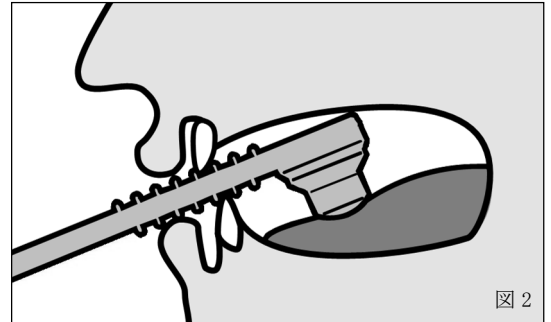

4. 舌を上下させ、訓練部を繰り返し押し潰す(図 3)。押し潰しを確認する場合は、位置決め部か把持部を持ち、振動が生じることで確認する。

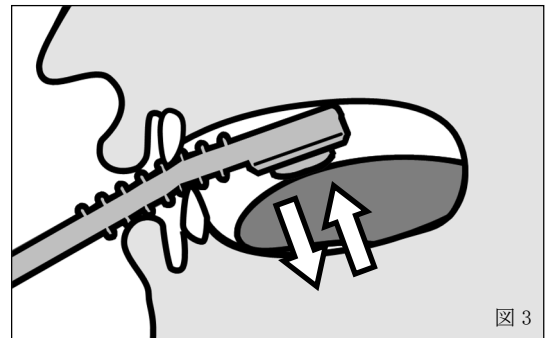

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 本品を強く噛まないよう患者に指導すること。[本品が破断し、破片が喉に詰まるおそれがある。][歯や補綴物を損傷するおそれがある。]
2. 口腔内が乾燥気味の患者に使用する場合は、使用前に口の中を水等で湿らせること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

患者間の使い回しはしないこと。[感染のおそれがある。]

〈不具合・有害事象〉

その他の不具合
破断、詰まり、損傷

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

使用開始後 2 か月 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

点検頻度	点検項目
使用前点検	本品に裂けや傷がないことを確認すること。

1. 使用前、使用後は毎回水洗いし、使用後は風通しの良い場所で自然乾燥させること。
2. 消毒は次のいずれかにより行うこと。
 - (1) 煮沸（3分程度）
 - (2) 次亜塩素酸系消毒液（NaClO 濃度約 0.01%、1 時間）
3. 乾熱滅菌や高圧蒸気滅菌はしないこと。[本品が変形するおそれがある。]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107