

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 歯科用咬合力計 70699000

「JMS 咬合力計」の付属品

再使用禁止

測定用カバー


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

測定用カバー（以下「本品」という。）は JMS 咬合力計の付属品であり、測定時に患者及びプローブを保護するために使用する。なお、本品は未滅菌である。

〈構造図〉

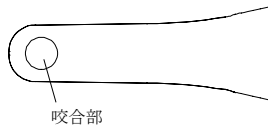

〈原材料〉

構成部品	原材料
測定用カバー	ポリブタジエン系熱可塑性エラストマー、 ポリエチレン

・本品は 1 回の測定に使用し、再使用禁止である。

【使用目的又は効果】

JMS 咬合力計の付属品であり、測定時に患者及びプローブを保護するために使用する。

【使用方法等】

- 咬合力計本体のプローブに本品を確実に押し込み装着する。
- 最大咬合力の測定後、本品を咬合力計本体のプローブから取り外し、適切に廃棄する(図 1)。

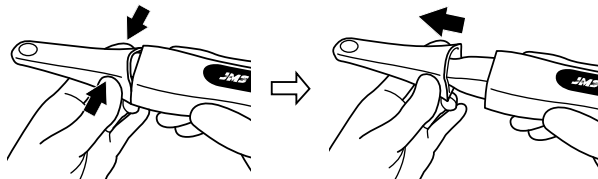


図 1. 本品の取り外し方法

- 引き続き測定を行う場合は新しい本品を装着する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 咬合部を噛んだ状態で咬合力計本体を引っ張らないこと。[咬合部が破損し、破片を誤飲又は誤嚥するおそれがある。]
- 測定する際は、必ず本品を咬合力計本体のプローブに装着すること。[歯や歯科補綴物を損傷するおそれがある。また、咬合力計本体の破損により、測定誤差や測定不能の原因になる。]
- 本品は確実に押し込み装着すること。[測定誤差又は測定不能の原因になる。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品は滅菌を行わないこと。[変形や変質等により、測定誤差又は測定不能の原因となる。]

〈不具合・有害事象〉

- その他の不具合
破損、測定誤差、測定不能
- その他の有害事象
歯又は歯科補綴物の損傷、誤飲、誤嚥

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

使用期限：3 年 [自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107