

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 輸液ポンプ用輸液セット 35833000

CADD ポンプ用輸液セット

(エクステンションセット)

再使用禁止

【警告】

〈使用方法〉

- 患者に接続する前に、流路内に気泡がないことを確認すること[空気塞栓症を引き起こす可能性があるため]。
- 専用の輸液ポンプは、患者に対して上下 30cm 以内の範囲で使用する[専用の輸液ポンプの送液精度を維持するため]。

【禁忌・禁止】

再使用禁止


〈使用方法〉

- 本品には専用の Medikation カセット以外を直接接続しないこと[送液精度に影響を及ぼすため]。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

- 21-9060-24 エクステンションセット 79cm(フィルタ無タイプ)
21-9061-24 エクステンションセット 117cm(フィルタ無タイプ)
21-9062-24 エクステンションセット 155cm(フィルタ無タイプ)
21-9106-24 エクステンションセット 155cm(フィルタ付タイプ)

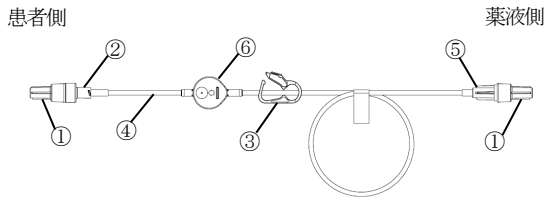

No.	名称
①	オスコネクタキャップ
②	ASVコネクタ
③	クランプ
④	輸液チューブ
⑤	オスコネクタ
⑥	フィルタ

- 本品は成人及び体重 6kg 以上の小児への使用を対象としている。
- ②ASV コネクタ⑤オスコネクタは ISO80369-7:2021 に適合している。
- ②ASV コネクタは逆流を防止し、落差約 120cm 未満でフリーフローを防止するアンチサイフォンバルブを有する。
- ⑥フィルタは薬液中の気泡を除去し、孔径は 0.2 μ m である。
- ③クランプは流路を開放又は閉塞状態にする開閉器具である。

〈原材料〉

No.	名称	原材料名
②	ASVコネクタ	ポリカーボネート、シリコン樹脂
④	輸液チューブ	ポリ塩化ビニル(可塑剤:TOTM)
⑤	オスコネクタ	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体
⑥	フィルタ	ポリエーテルスルホン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリメチルメタクリレート

〈滅菌方法〉

エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】


〈使用目的〉

多量の注射用医薬品を注入する目的で使用する。


【使用方法等】

無菌操作で行います。

- 薬液側のオスコネクタのオスコネクタキャップを取り外し、オスコネクタを Medikation カセットのメスコネクタに接続します。

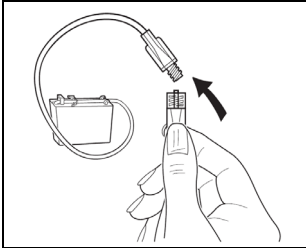

- 専用の輸液ポンプの取扱説明書に従って、患者側の ASV コネクタのオスコネクタキャップを取り外し、流路をプライミングします。
- 必要に応じて輸液チューブをタップして、気泡を取り除きます。
- フィルタ付タイプについては、プライミング中、フィルタのリブ側を見て、均等に充填されていることを確認します。必要に応じてフィルタをタップして、気泡を取り除きます。フィルタのベント側の気泡を除去する必要はありません。

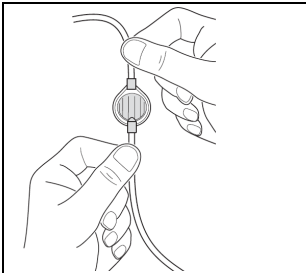

- 流路が完全にプライミングされたら、クランプを閉じます。

〈組み合わせて使用する医療機器〉

本品は、併用医療機器である下記品目を専用の輸液ポンプとして使用する。

販売名	承認番号
デルテックポンプ CADD シリーズ	16300BZY00148000
CADD-Solis ポンプ	22400BZX00216000

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 専用の輸液ポンプ及び本品目の他の構成部品である Medikation カセットの電子添文及び取扱説明書もあわせて精読すること。
- 本品の接続方向に注意してください。患者側と薬液側を逆に接続して専用の輸液ポンプを動作させた場合、閉塞アラームが鳴ります。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- オスコネクタキャップが外れていた場合には、本品を使用しないこと。
- 全ての接続部を確実に接続し、固く締めすぎないこと。
- フィルタ付タイプを使用する場合は、シリンジを使用してプライミングしないこと[フィルタが損傷する可能性があるため]。

- 5) フィルタ付タイプを使用する場合は、フィルタは心臓と同じか、それより低い位置になるようにすること。
- 6) フィルタ付タイプを使用する場合は、油脂乳化剤を送液しないこと[フィルタが機能しないことがあるため]。
- 7) フィルタ付タイプを使用する場合は、界面活性剤を多く含む薬液を送液すると、フィルタの通気側から薬液が漏れる場合がある。このような事象が発生したら、本品の使用を中止すること。シリンジやバイアルのシリコンベースの潤滑剤は界面活性剤として作用し、フィルタから薬液が漏れる場合がある。
- 8) フィルタ付タイプを在宅等で使用する場合は、石鹸等がフィルタのエアベント部分に付着しないよう注意すること[疎水性が失われ、薬液が漏れる場合があるため]。
- 9) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクタやフィルタのひび割れについて注意すること[薬液によりコネクタやフィルタにひび割れが生じ、血液及び液漏れ、又は空気混入、又は機能不良等が生じるおそれがある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じるおそれがある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締めつけ及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
- 10) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 11) 本品の材質に適合しない薬液を使用する場合も、破損に注意すること。使用する薬液が適合するか不明な場合は、製薬メーカーに確認してから使用すること。
- 12) 本品内で分離した溶液や溶けない薬液を投与しないこと[ASV コネクタが機能しない可能性があるため]。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下の不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

- ・ 輸液チューブ、コネクタの狭窄及び閉塞、破損、液漏れ
- ・ フィルタの閉塞、破損、液漏れ
- ・ キャップの取り外し困難

2) その他の有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性がある。で、患者の状態を十分に観察し、異常のおそれが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

- ・ コネクタ等の接続不良による液漏れによる過小投与

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈使用期間〉

- ・ 米国 CDC ガイドライン又は施設で定められたプロトコルに従って交換すること。

〈推奨使用期間〉

- ・ フィルタ付タイプ以外の推奨される最大使用時間:96 時間又は 8L 送液のどちらか早い方
- ・ フィルタ付タイプの推奨される最大使用時間:24 時間又は 2L 送液のどちらか早い方

〈有効期間〉

- ・ 2 年間
- ・ 本品の包装に記載されている「有効期限」までに使用すること[自己認証(当社データ)による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*〈製造販売業者〉

ICUメディカルジャパン株式会社
〈問合せ先〉
フリーダイヤル 0120-582-855

*〈製造業者〉

アイシーユー メディカル, Inc.
ICU Medical, Inc.
〈国名〉
アメリカ合衆国