

「カプノチェックⅡ」の付属品

カプノグラフ患者アタッチメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


〈使用方法〉

- 1) 引火性物質のある環境で使用しないこと〔引火又は爆発の誘因となる恐れがあるため〕。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

WW8214 カプノグラフ患者アタッチメント

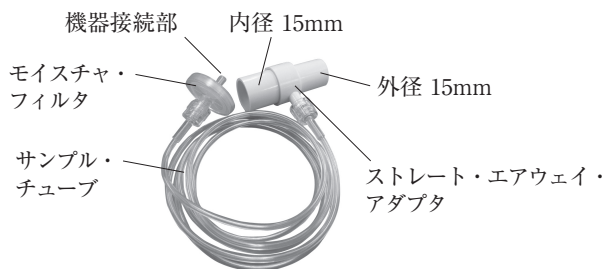

本品は、カプノチェックⅡに接続して、患者回路から呼吸ガスをサンプリングするためのアタッチメントである。

- ・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

患者の動脈血の経皮的酸素飽和度、呼吸終末二酸化炭素ガス濃度及び吸気二酸化炭素ガス濃度を測定し、呼吸管理に関する情報を提供すること。

【使用方法等】

1. 本品の機器接続部を機器本体の接続口に装着してください。確実に装着するには、ねじりながら押し入れてください。
2. 機器本体の取扱説明書に従って、リークチェックを実施してください。
3. 使用前に適切に接続され、異常のないことを確認します。又、既知のガスでサンプルし、モニタを確認します。
4. 外径15mm（15mm O.D.）の接続を患者回路にねじ込んで確実に接続してください。
5. 内径15mm（15mm I.D.）の接続を気管内チューブ、気管切開チューブ又はその他の15mmコネクタ付エアウェイにねじ込んで確実に接続してください。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 各々のルーアー接続部分をしっかりと締め、確実に接続されていることを確認してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 水分が溜まったり、汚れた場合は廃棄し、新品に交換すること。
- 2) 閉塞やリーク等、正常に機能していない疑いがある場合は、直ちに廃棄し、新品と交換すること。
- 3) 各接続部分は、リークが起らないよう確実に接続すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

- ・チューブの狭窄、閉塞、破損、リーク
- ・フィルタの閉塞、破損、リーク
- ・エアウェイアダプタの破損、リーク

2) その他の有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常の恐れが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

- ・閉塞やリークによる測定値異常

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※※〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

※※〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国