

機械器具 51 医療用嚢管及び体液誘導管
管理医療機器 食道閉鎖式エアウェイ 70256000

VBM ラリングルチューブ

再使用禁止

【警告】

〈使用方法〉

- 1) 高い気道内圧は、ガスやエアが胃に送気され、胃の内容物が逆流するおそれがある。

【禁忌・禁止】

再使用禁止(シリンジのみ)

〈適用対象(患者)〉

- 1) 上気道が完全に閉塞している患者には使用しないこと[本品の挿入が困難であるため]。

〈併用医療機器〉

- 1) 本品をノーマンエルボー・タイプ(コネクタ内部のガス供給用内筒が患者方向に突出した形状)のコネクタに接続しないこと。
なお、詳細は【使用上の注意】の〈相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)〉を参照のこと。

【形状・構造及び原理等】


〈形状・構造〉

- ・ 院内及び緊急現場において、挿管困難時、心肺蘇生時、短時間気道を確保するために使用する。
- ・ 本品は、エアウェイチューブに 2 つのカフ(チューブ先端の食道カフとチューブ中央部の咽頭カフ)、換気用チューブ末端に 15mm コネクタが設置され、2 つのカフ間に換気口を有する。サイズは 6 種類あり、それぞれの品番、適応及び 15mm コネクタのカラーコードは下表のとおり。
- ・ シリンジは単回使用製品である。

品番	サイズ	体重又は身長 ^a	カラーコード
32-01-000J	0	新生児 5kg まで	透明
32-01-001J	1	幼児 5~12kg	白
32-01-002J	2	小児 12~25kg	緑
32-01-003J	3	小児、成人(小)155cm 未満	黄
32-01-004J	4	成人(中)155~180cm	赤
32-01-005J	5	成人(大)180cm 以上	紫

^aサイズ選択の目安です。患者の解剖学的体型等も考慮に入れて選択してください。

番号	名称
①	エアウェイチューブ
②	咽頭カフ
③	食道カフ
④	15mm コネクタ
⑤	インフレーションライン
⑥	パイロットバルーン
⑦	一方弁(ボディ)
⑧	バルブオープナー(赤色) ^b

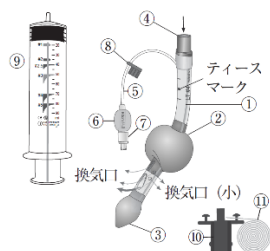

^b滅菌時使用

〈原理〉

本品は、口腔よりチューブ先端を患者の食道へ挿入し、チューブ先端の食道カフで食道を閉鎖することにより、チューブの換気口を通して気管への換気を行うことができる。咽頭カフはチューブを安定させ、中咽頭と鼻咽頭をシールする。

〈付属品〉

番号	名称
⑨	シリンジ
⑩	バイトブロック
⑪	ネックテープ

〈原材料〉

名称	原材料
エアウェイチューブ	シリコーンゴム
咽頭カフ	
食道カフ	
バイトブロック	熱可塑性ポリウレタン樹脂

・ 滅菌

【使用目的又は効果】


〈使用目的〉

気道確保に使用する。チューブを口腔から食道へ挿入し、チューブ先端のカフにより食道を閉鎖し、気管(肺)への換気を行うものである。

【使用方法等】

インフレーションシステムとは、カフ内圧の維持に関わる系全体(カフからパイロットバルーンまで)を指します。



〈使用前準備〉

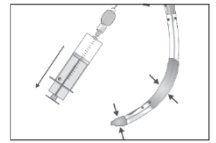1. 【保守・点検に係る事項】に準じて洗浄、消毒及び滅菌を行ってください。
2. 患者に合ったサイズを選択します。
3. 使用前に、カフ、チューブ及びインフレーションシステムに損傷がないことを確認します。
4. 両方のカフが完全に脱気していて、水溶性潤滑剤がチューブ先端及び背面に塗られていることを確認してください。
5. すべてのケースにおいて、事前に酸素化を行うことを推奨します。
6. 麻酔が必要な場合には、本品の挿入前に、患者を適切な麻酔深度に調節します。
7. 患者をスニッフィング・ポジションにして挿入します。本品はチューブ長が短く、かつ S 字形状をしているので、ニュートラル・ポジションでも挿入は可能です。小児に対しては、下顎挙上法で若干首を伸展して挿入することを推奨します。

*〈挿入方法〉


本品は、患者の解剖学的形状を考慮に入れて、挿入等の手技を行うことが必要です。

下顎挙上にて、本品を進めることができることを確認してください。

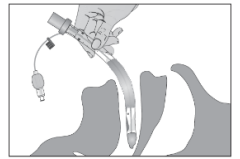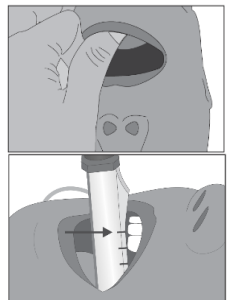1. シリンジで両方のカフを完全に脱気してください。偏った重なりがある場合には均等になるように補正してください。水溶性潤滑剤を両方のカフに塗布します。ペンを握るように黒ライン(ティースマーク)付近で本品を保持します。
2. 空いている方の手で開口し、本品挿入中に舌根沈下が起こらないようにしてください。


本品のチューブ先端の背面側を患者の硬口蓋に押し当てます。患者の正中からエアウェイチューブを挿入し、ティースマークの上の位置まで挿入します。正中からの挿入が難しい場合は、口角からエアウェイチューブを横に向けて挿入します。詳細については、〈使用方法に関連する使用上の注意〉の 4)を参照すること。

3. カフにカフプレッシャゲージを使って空気を注入します。**6kPa(60cmH₂O)**を超えないように調節します。選択的手術あるいは処置の場合、自発呼吸がある場合においても、カフに空気を入れた後に、本品を呼吸回路に接続することを推奨します。蘇生バッグで送気しながら、呼吸が楽に行えるように(最小の呼吸抵抗で最大の一回換気量が確保できるように)本品の位置を調節してください。カフ圧は、定期的にモニタして、適切なカフ圧に調節してください。

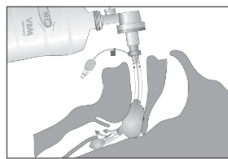


緊急の際等、カフプレッシャゲージがない場合には、付属のシリンジで以下の量を目安に空気を注入します。付属のシリンジには以下の量の位置に各サイズが表示されています。


- サイズ 0 最大 10mL
- サイズ 1 最大 20mL
- サイズ 2 最大 35mL
- サイズ 3 50~60mL
- サイズ 4 70~80mL
- サイズ 5 80~90mL

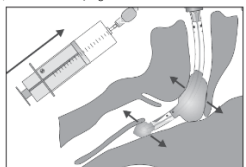

4. 換気をチェックし、胃に送気されていないことを確認してください。十分に換気されていない場合は、カフを膨らませたままの状態、ティースマークの範囲で、チューブ挿入深度を調整してください。カフ圧を再度チェックし、リーク圧を考慮し調整します。

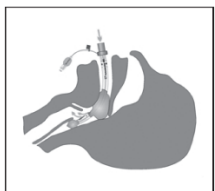


5. 換気が行えることを確認した後、バイトブロック(サイズ 2 以上)でチューブを固定します。バイトブロックはイラストのようにセットします。ネックテープをチューブに巻いてフックにかけることによってチューブを固定します。

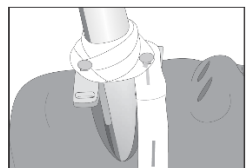

〈抜去方法〉

1. 付属のシリンジを使って、必ず両方のカフから空気を完全に抜きます。本品が正しい位置に留置されていれば、反射が戻るまで本品を留置しても問題ありません。吸引器や緊急挿管の準備が整った場所で本品を抜去します。

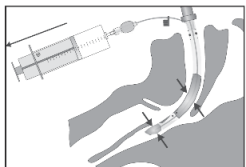

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 1) 本品を力任せに挿入しないこと。また挿入中、カフを損傷させないこと。
- 2) 患者の換気状態は、患者の体勢を変える度に確認すること。
- 3) 本品を抜管する際は、シリンジで両方のカフを完全に脱気すること。咽頭カフは容量が大きいため抵抗を感じるまでシリンジで完全に脱気してください。
- * 4) 正中からの挿入が難しい場合は、口角からエアウェイチューブを横に向けて挿入し、咽頭カフが歯に達する位置まできたら、エアウェイチューブを鼻方向に回転させ正中に戻して、挿入を進めること。

【使用上の注意】

*〈重要な基本的注意〉

- 1) 緊急時以外の、事前の治療計画に基づく選択的手術あるいは処置の場合、絶食をしていない患者(絶食をしていないことを確認できない患者を含む)、胃内容物が残っている患者には本品を使用しないこと[胃内容物の逆流、嘔吐、誤嚥のおそれがあるため]。
- 2) 患者を適切に加湿すること[本品内腔の分泌物の凝固を最小限にし、気管粘膜損傷を防ぐため]。
- 3) 定期的に分泌物の吸引を行い、患者の気道を確保すること。チューブが閉塞していないか絶えず監視し、必要に応じて新品に交換すること。

- * 4) 本品は緊急気道確保が必要な患者又は短時間の手術のための麻酔中、成人、小児、幼児の換気を使用すること。
- 5) カフ圧を高くしすぎないこと[舌の腫脹を引き起こすおそれがあるため]。
- 6) インフレーションライン又はパイロットバルーンに対して引っ張る等の過剰な力を加えないこと[インフレーションシステムの故障又はリークの原因となるため]。
- 7) 留置後に、胸郭が動かない、換気効果が得られない等の場合はチューブ位置を調整して、再度確認すること。ティースマークの範囲で、本品の挿入位置の調整をすること。最初は本品をやや深めに挿入した後、カフを膨らませた状態にて、蘇生バッグで送気しながら、換気ができるようになるまでゆっくりと本品を引いてみることを推奨する。
- 8) 挿入後に体内突起物(歯等)によってインフレーションシステムが損傷していないことを確認すること。
- 9) シリコンゴムチューブ部分をシリコン油脂に接触させないこと[変色するおそれがあるため]。
- 10) 呼吸回路との接続時、及び使用中も回路との接続が適切であることを常に確認すること。各接続部でリークや閉塞等がないことを確認すること。接続部の取り外しには、必要に応じて取り外し器具等を使用すること。
- 11) 本品を使用する前に、本品に損傷等がないことを確認すること。カフ圧計を用いて確認する場合は、挿入前にカフに空気を注入して、**6kPa(60cmH₂O)**未満にカフ圧が維持されることを確認すること。カフ、インフレーションライン、パイロットバルーン、一方弁等インフレーションシステムに損傷がないことを確認すること。異常のあるものは使用しないこと[機能不良を放置したまま使用すると換気不全の原因になるため]。
- 12) 緊急時以外の、事前の治療計画に基づく選択的手術あるいは処置の場合、カフ圧は、使用中もカフ圧計等で定期的にモニタし、適正な圧(60cmH₂O 未満)で管理すること。適切な圧は、患者の容態に合わせて設定すること。
- 13) 本品を留置後、患者の呼吸音の確認やカフノグラフィ等の設置によって、患者の呼吸状態を管理すること。
- * 14) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

〈相互作用(他の医薬品・医療機器との併用に関すること)〉

併用注意(併用に注意すること)

1. 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ノーマンエルボー・タイプ(コネクタ内部のガス供給用内筒が患者方向に突出した形状)のコネクタを有する医療機器	本品と接続しないこと。	本品を閉塞させ、肺の過膨張や換気不能を発生させるおそれがある。

* 2. 併用注意(併用に注意すること)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
レーザー治療器 電気手術器	本品を介して高濃度酸素を投与している場合は、本品の使用部位の近傍でレーザー治療器(レーザーメス)や電気手術器(電気メス)を原則として使用しないこと。	酸素中でレーザー治療器(レーザーメス)・電気手術器(電気メス)を使用すると、突然発火したり、発火による気道熱傷等のおそれや有毒ガス発生の可能性が有る。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

- ・チューブの閉塞、狭窄、潰れ、キンク、破損
- ・15mm コネクタの変形、破損、脱落
- ・カフの変形、張り付き、破損、リーク
- ・インフレーションラインの閉塞、狭窄、潰れ、キンク、破損、リーク
- ・一方弁/パイロットバルーンの閉塞、キンク、破損、リーク
- ・シリンジの破損、変形、動作不良

2) その他の有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるの

で、患者の状態を十分に観察し、異常のおそれが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

- ・肉芽形成、出血、肺塞栓症、感染、無気肺
- ・口唇・歯牙損傷、咽腔・喉腔の損傷、声帯損傷
- ・皮下気腫、縦隔気腫、気胸、気管膜様部瘻孔、気管壁穿孔、肺穿孔、食道穿孔
- ・気管狭窄、気道閉塞、低酸素血症、換気不全、心肺停止
- ・先端誤挿入（皮下、気管、甲状舌骨間等）

＜その他の注意＞

- 1) 本品は酸素、エア、麻酔ガスの供給に適しているが、使用する麻酔ガスは「原材料」項に示す材質に影響を与えないものとする。
- 2) ブリオン病（クロイツフェルト・ヤコブ病等）感染が疑われる患者に本品を使用した後は、万一の交差感染の可能性を防止するため、必要ならば廃棄もしくは国の基準等に従った処理を行うこと[本品を介した感染の実例は報告されていないが、その可能性に関する海外製造元の注意喚起に倣って記載]。
- 3) 本品は、食道閉鎖式エアウェイによる気道確保操作に熟練した医師又は、その指導下にある救急救命士のみが使用すること。
- 4) 緊急交換用の予備チューブを必ず患者の近くに用意しておくこと。
- * 5) 救急救命士は胃内及び食道内吸引を行わないこと（ドレインルーメン内吸引を除く）。
- * 6) 酸素、エア、麻酔ガスにより、カフの体積や圧力が変化する可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- * 水濡れ、高温多湿及び直射日光、光源を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時（運搬時を含む）は、元のパッケージに入れること。

＜有効期間＞

- ・ 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること[自己認証（当社データ）による]。

＜使用期間＞

- * 再使用回数は 50 回以内または有効期間 5 年のどちらか早い方を目安に交換すること。50 回以内でも製品に劣化や異常が認められる場合や洗浄、消毒あるいは滅菌時に不適切な取り扱いが認められる場合は、使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 再使用する前には洗浄、消毒及び滅菌を行ってください。
- ・ 洗浄・消毒・滅菌をより効果的に行うため、本品に付着した汚れは使用後なるべく早く、乾燥する前に除去してください。
- ・ 洗浄及び消毒前に、バルブオープナーをインフレーションラインの一方弁に取り付けねい（滅菌時にのみ使用）。
- * 洗浄と消毒の効率向上のため、自動洗浄装置による洗浄・消毒を推奨します。

＜洗浄及び消毒方法＞

- ・ シリコンゴム又は耐熱性プラスチック材への使用が認められた医療機器用洗浄剤・消毒剤等を使用してください。材質を硬化させる可能性があるため、フェノールやアルキルアミンのような合成物を含む消毒剤（グルコプロタミン等）は使用しないでください。

＜自動洗浄装置による洗浄・消毒＞

自動洗浄装置による洗浄・消毒については、自動洗浄装置の添付文書・取扱説明書、及び使用する洗浄剤・中和剤等の添付文書・説明書もご参照ください。

海外製造元が推奨する洗浄・消毒方法は以下の通りです。

- ・ 脱イオン水を使用してください。乾燥剤は使用しないでください。
 - ・ アルカリ性洗浄剤を使用した後は、必ず中和剤で中和してください。
1. エアウェイチューブを、洗浄用キャリッジの適切なアダプタに装着してください。本品内部の空間を隈なくすすげるよう、注意して置いてください。
 2. バイトブロックはメッシュトレイに置き、カバーネットで固定してください。
 3. 自動洗浄装置を以下の設定で作動してください：
 - 1) 20℃の脱イオン水で 1 分間すすぎ。
 - 2) 洗浄は 55℃の脱イオン水で 5 分間。洗浄剤はケイ酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、リン酸塩を成分とするものを濃度 0.5%

（液剤の場合、水 1 リットル当たり 5ml）で使用。

- 3) 中和は 20℃で 2 分間。中和剤はクエン酸を成分とするものを濃度 0.1%（液剤の場合、水 1 リットル当たり 1ml）で使用。
 - 4) 20℃の脱イオン水で 2 分間すすぎ。
 - 5) 93℃の脱イオン水で 5 分間熱消毒。
 - 6) 100℃以下で乾燥。
4. 本品に汚れが残っていないか確認してください。残っている場合は上記の洗浄・消毒操作を再度行ってください。
 5. 滅菌の前に、本品に損傷や亀裂及び遊離した粒子が生じていないか、チューブ内腔の開存性が保たれているか、カフにリークがないか確認してください。
本品に異常が認められた場合は廃棄してください。

＜手動による洗浄・消毒＞

手動による洗浄・消毒については、使用する洗浄消毒剤等の添付文書・説明書もご参照ください。

海外製造元が推奨する洗浄・消毒方法は以下の通りです。


- ・ 洗浄剤溶液・消毒剤溶液を用意します。脱イオン水を使用してください。

1. 洗浄・消毒操作の都度、洗浄消毒液（洗浄消毒剤を溶かした水溶液）を事前に準備します。20℃の脱イオン水に、過炭酸ナトリウム、クエン酸、炭酸ナトリウム（ソーダ）を成分とする洗浄消毒剤を、濃度 2%（粉末の場合、水 1 リットル当たり 30ml）になるよう溶かし、15 分間置きます。
2. 本品を洗浄消毒液の中で柔らかいスポンジで洗浄します。スポンジでは洗いにくい箇所は柔らかいブラシを使用してください。本品の表面を傷つけるような硬いブラシ等は使用しないでください。
3. 本品を洗浄消毒液の中に 15 分間置きます。本品内部の空間が隈なく浸るよう、注意して置いてください。
4. 脱イオン水で本品をすすぎます。洗浄消毒剤の成分が残留すると、後の滅菌等で本品に損傷が生じる可能性がありますので、丁寧に洗い流してください。
5. 本品を乾燥させてください。乾燥途中で再度水濡れしないようご注意ください。
6. 本品に汚れが残っていないか確認してください。残っている場合は上記の洗浄・消毒操作を再度行ってください。
7. 滅菌の前に、本品に損傷や亀裂及び遊離した粒子が生じていないか、チューブ内腔の開存性が保たれているか、カフにリークがないか確認してください。本品に異常が認められた場合は廃棄してください。

＜滅菌方法＞

本品に推奨される滅菌方法は、温度 134℃・5 分間のオートクレーブ滅菌です。滅菌時には必ず、本品を適切な滅菌バッグに入れてください。滅菌前に、本品が洗浄及び消毒され、洗浄液や消毒液が十分に水で除去された上で、十分に乾燥していることを確認してください。洗浄液や消毒液が残っていると、本品の材質にダメージを与える可能性があります。適切な滅菌を実施し、且つ滅菌工程でのダメージを防止するために、以下の方法に従ってください。

1. バルブオープナーは、パイロットバルーンの一方弁を開放状態にするもので、滅菌中に、滅菌器内の雰囲気ガスはカフ内に自由に通気することができるようになります。

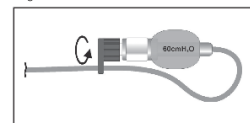

パイロットバルーンのバルブを、赤いバルブオープナーに回しながら接続して、一方弁を開放状態にしてください。この時、インフレーションがねじれないように注意してください。

注意

バルブオープナーは、滅菌時にのみ使用してください。

バルブオープナーを用いない場合は、シリンジで両方のカフを完全に脱気してください。カフの中に残留した空気や湿気はオートクレーブの高温と低圧の中で膨張します。カフとパイロットバルーンに修復不可能な損傷を与える原因となります。

注意

脱気したカフの中にすぐに空気が少しでも戻るようであれば、その製品は使用しないでください。この現象は一方弁の不良作動、又はカフのリークの兆候です。しかし、シリコンゴム素材自体が気体を透過させる性質を持っているため、脱気した後数時間経過してカフ内に空気が若干戻るのは正常です。

2. オートクレーブ装置の製造元が推奨する温度と時間によって本品を滅菌します。

3. 設定温度は最高でも 134℃を超えることのないようにしてください。
4. オートクレーブ滅菌後と本品の使用前には、毎回、以下の点検を行ってください。

点検 1:エアウェイチューブの破片とキンク

エアウェイチューブの内腔に閉塞や破片等がないことを確認してください。

点検 2:

リークがないか、インフレーションシステムのチェックを行ってください。

【主要文献】

*〈主要文献〉

プリオン病感染予防ガイドライン(2020 年版)

プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班

(研究代表者:水澤英洋)及び日本神経学会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(文献請求先も同じ)

**〈製造販売業者〉

ICU メディカルジャパン株式会社

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

VBM メディツインテヒニーク GmbH

VBM Medizintechnik GmbH

〈国名〉

ドイツ