


メドトロニック チューブ

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状(一例)

＜イリゲーションチューブ＞

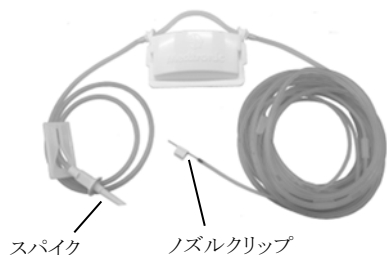

* 2. 材質

シリコーン樹脂、ポリ塩化ビニル、ナイロン、ABS 樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、シアノアクリレート

【使用目的又は効果】

本品は生理食塩液を術野に送水し、骨切削時に切削部の過熱防止、洗浄に用いる。

【使用方法等】

1. 準備

本品は滅菌済みのディスプレイ製品であるため、使用時に包装に破損、亀裂等がないか確認する。

* 2. 使用方法(一例)

- 1) ノズルの長さ又は角度を適切に調整する。
- 2) ノズルクリップをアタッチメントへ装着する。
- 3) イリゲーションクリップをモータ(ハンドピース)へ装着する。
- 4) イリゲーションチューブを送水ポンプにセットする。
- 5) スパイクを生理食塩液のバッグへ接続する。

3. 使用方法に関連する使用上の注意

- チューブを送水ポンプにセットし、手技を開始する前に、ポンプを作動させ、適切な流量を保てることを確認する。チューブが過度に緊張したり、ねじれたりあるいは緩んだ状態でセットした場合、適切な流量を確保できない可能性があるので注意すること。
- 破損に備えて予備のチューブを準備すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- * 適切なハンドピース又はアタッチメントへ装着すること。

2. 相互作用

併用注意

医療機器	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
インテグレイテッドパワーコンソール以外のコンソール	適切な流量が得られない可能性がある	送水・吸引できない可能性がある

3. 不具合・有害事象

1) 不具合

- 不十分な流量によるインテグレイテッドパワーコンソール及びアクセサリーの過熱、損傷
- 不適切な機器との併用による適切な流量が得られない可能性
- 不適切な取り扱いによる本品の破損や機能不良

2) 有害事象

- 不十分な流量による組織の熱損傷
- 過剰な流量による組織の損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

医療機関における滅菌済み医療機器の保管方法に従い、保管すること。

2. 滅菌期限

包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メドトロニック株式会社

カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メドトロニックゾーメド社(米国)

[Medtronic Xomed, Inc.]

取扱説明書等を必ず参照すること。