

一般医療機器

機械器具 (51) 医療用嘴管及び体液誘導管
送水吸引チューブ

JMDN コード: 70355000

IPCチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・ 弊社のドリルシステム以外の製品と併用しないこと[本品が正常に作動しない可能性がある]。
- ・ 再使用及び再滅菌禁止

**【形状・構造及び原理等】


1. 形状(一例)

1) イリゲーションチューブ

(1) IPC イリゲーションチューブ

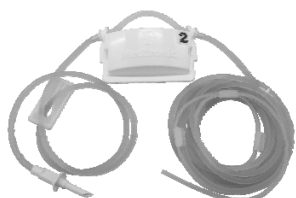

付属品バーガード

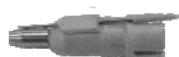

(2) Indigo イリゲーションチューブ



(3) サクションイリゲーションチューブ



2) クーラントチューブ



3) サクションイリゲーションコネクタ



4) 付属品灌流量調節用リモートコントローラー



2. 原材料

ABS、ナイロン、シリコーン樹脂、ポリ塩化ビニル、液晶ポリマー、ステンレス鋼、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアミド、フッ素ゴム、合成樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、送水ポンプに接続して、耳鼻咽喉科手術等で送水、吸引を行うためのチューブである。

**【使用方法等】

使用方法例

1) イリゲーションチューブ

(1) IPC イリゲーションチューブ

- a. 付属品バーガードにチューブを接続する。
- b. 付属品バーガードをハンドピースへ装着する。
- c. IPC イリゲーションチューブを送水ポンプにセットする。
- d. スパイクを生理食塩液のバッグへ接続する。

(2) Indigo イリゲーションチューブ

- a. イリゲーションクリップをアタッチメントへ装着する。
- b. ノズルを適切な角度に曲げる。
- c. チュービングクリップをハンドピース又はアタッチメントへ装着する。
- d. Indigo イリゲーションチューブを送水ポンプにセットする。
- e. スパイクを生理食塩液のバッグへ接続する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

(3) サクシオンイリゲーションチューブ

- a. イリゲーション用チューブの先端をサクシオンイリゲーションコネクタへ接続する。
- b. サクシオン用チューブの先端をサクシオンチップへ接続する。
- c. サクシオンイリゲーションチューブを送水ポンプにセットする。
- d. スパイクを生理食塩液のバッグへ接続する。

2) クーラントチューブ

- a. 水冷式ハンドピースにチューブを接続する。
- b. クーラントチューブを送水ポンプにセットする。
- c. スパイクを生理食塩液のバッグへ接続する。

** 3) サクシオンイリゲーションコネクタ

- a. サクシオンイリゲーションコネクタのチューブにサクシオンチップを接続する。
- b. IPC イリゲーションチューブを送水ポンプにセットする。
- c. スパイクを生理食塩液のバッグへ接続する。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- ・チューブを送水ポンプにセットし、手技を開始する前に、ポンプを作動させ、適切な流量を保てることを確認する。チューブが過度に緊張したり、ねじれたりあるいは緩んだ状態でセットした場合、適切な流量を確保できない可能性があるので注意すること。
- ・破損に備えて予備のチューブを準備すること。

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用注意

医療機器	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
IPC 以外の機器	適切な流量が得られない可能性がある	送水・吸引できない可能性がある

2. 不具合・有害事象

1) 重大な不具合

- ・不十分な流量による IPC 及びアクセサリーの過熱、損傷
- ・不適切な機器との併用による適切な流量が得られない可能性
- ・本品の破損や機能不良

2) 重大な有害事象

- ・不十分な流量による組織の熱損傷
- ・過剰な流量による組織の損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

医療機関における滅菌済み医療機器の保管方法に従い、保管すること。

2. 有効期間

包装に表示(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本メトロニック株式会社

カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者：メトロニックゾーメド社(米国)

[Medtronic Xomed, Inc.]