

高度管理医療機器
機械器具 (07) 内臓機能代用器
心外膜植込み型ペースメーカーリード

JMDN コード: 35039000

* IS-1 スーチャレス心筋リード (5866-45 型リードアダプター)

再使用禁止

*

【警告】

1. 交流電流によって細動が誘発されることを防ぐために、リード植込み中及び試験中は、電池駆動器具を使用するよう推奨する。
2. 交流電源を使用している装置を患者の至近距離で使用することは、適切な接地を行うこと。
3. 交流電源を使用している装置を患者の至近距離で使用することは、リードのコネクタピンを絶縁すること。

【禁忌・禁止】

1. 使用方法における禁忌・禁止事項
再使用禁止。[ディスプレイ製品のため。]

*

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

- 1) 5866-45 型リードアダプター



全長: 25mm

2. 血液又は体液に接触する部分の主な原材料

ポリウレタン

*

【使用目的、効能又は効果】

5 又は 6mm 単極コネクタの植込み型心臓ペースメーカー(以下「ペースメーカー」という。)に IS-1 規格のコネクタをもつリードを接続するために使用するアダプターである。

*

【操作方法又は使用方法】

1. 使用例


- 1) 5866-45 型リードアダプターの末端までリードを差し込む。差し込んだ後、リードのコネクタピンが 5866-45 型リードアダプターの末端から出ていることを確認する。

*



リードへの装着

- 2) 5866-45 型リードアダプターが装着されたリードをパルス発生器に差し込む。

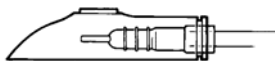

パルス発生器への挿入

*

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

Medtronic

【製造販売業者】

日本メドトロニック株式会社
〒108-0075
東京都港区港南一丁目 2 番 70 号

【連絡先】

CRHF 事業部
TEL: 0120-901949

【製造業者】

製造業者: メドトロニック社
Medtronic, Inc.
製造所所在国: 米国、プエルトリコ