

リードアダプターキット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止。
 - 2) 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、各種ペースメーカ用リードに適用されるリードアダプターキットであり、以下のような種類のものがある。

2. 構成

		モデル
本体	5866-9M 型リードスプライスキット	5866-9M
	5866-24M 型リードアダプターキット	5866-24M
	5866-37M 型リードアダプターキット	5866-37M
	5866-38M 型リードアダプターキット	5866-38M
	5866-40M 型リードアダプターキット	5866-40M
	5867-3M 型リードエンドキャップキット	5867-3M
	6981M 型リードエクステンダーキット	6981M
	6985M 型テンポラリーリードエクステンダーキット	6985M
	6984M 型リードエクステンダーキット	6984M
	6986M 型リードエクステンダーキット	6986M
付属品	5866-46 型サイジングスリーブキット	5866-46
	レンチ	
	セットスクリュー	
	医療用接着剤	

3. 寸法等

モデル	5866-9M	5866-24M	5866-37M	5866-38M
コネクタ	単極リード→IS-1 単極	5 mm 二股双極→IS-1 双極	5 mm 単極→IS-1 単極	IS-1 単極→IS-1 双極
長さ (mm)	140~165	127~152	140~165	127~152
材質	シリコーンゴム、ニッケル合金、ステンレス鋼			


モデル	5866-40M	6981M	6984M	6986M
コネクタ	3.2 mm ロープ ロファイル→IS-1 双極	IS-1 単極→IS-1 単極	IS-1 双極→IS-1 単極/双極	3.2 mm 双極→IS-1 単極/双極
長さ (mm)	127~152	419~445	381~406	381~406
材質	シリコーンゴム、ニッケル合金、ステンレス鋼			

モデル	6985M	5866-46
コネクタ	IS-1 単極	5 mm 単極又は 5 mm 二股双極/IS-1 単極/双極
長さ (mm)	462~500	4.6/7.5
材質	ステンレス鋼、テフロン、TFH、シリコーンゴム	ポリウレタン

モデル	5867-3M		
コネクタ	5 mm 単極/5 mm 二股双極	IS-1 単極/双極	3.2 mm 双極コネクタ
長さ (mm)	30	27	30
材質	シリコーンゴム		

4. 外観図

1) 本体

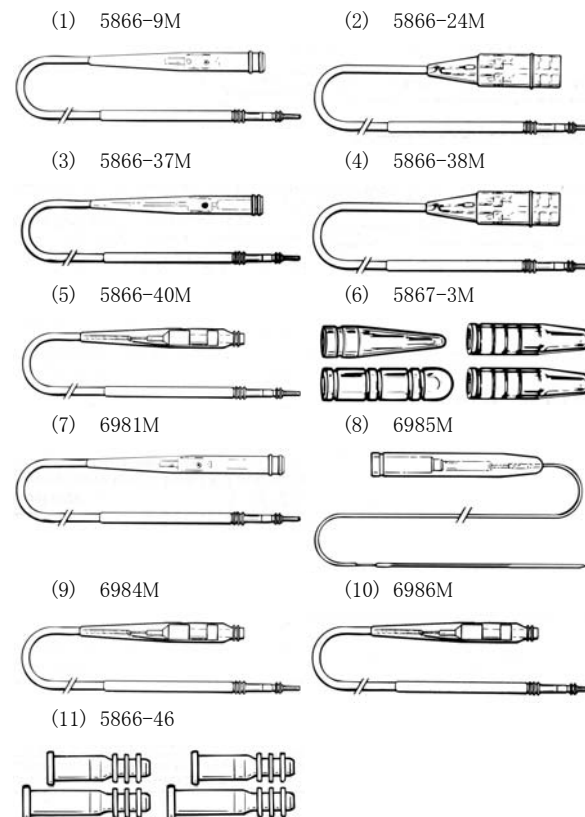

【使用目的、効能又は効果】

本品は、ペースメーカ用リードアダプターで、滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】**[使用方法等に関連する使用上の注意]****1. 植込み前の注意**

- 1) セットスクリューを過度の力で閉めないこと。コネクター又はアダプターが破損する可能性がある。
- 2) サイジングスリーブは接着剤を使用しないこと。脱着が不可能になる。
- 3) IS-1 双極コネクターにサイジングスリーブを使用する場合は、単極でのみ使用すること。
- 4) 植込み術中はすぐに使用できるように除細動器を使用できる状態で待機させること。

【使用上の注意】*1. 重要な基本的注意**

本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 有効期間は自己認証(当社データ)による。
2. 有効期限については外装表示参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メトロニック株式会社

カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メトロニック社(米国)

[Medtronic, Inc.]