

＊＊

類別：機械器具 1 2 理学診療用器具
管理医療機器 特定保守管理医療機器 一般的名称：乾式ホットパック装置（37329000）

フィットアンボ

【警告】

下記のような医用電子機器との併用は絶対しないでください。

- (1) ペースメーカー等の体内うめ込型医用電子機器を使用の人
- (2) 人工心肺等の生命維持用医用電子機器を使用の人
- (3) 心電計等の装置型医用電子機器を使用の人


【禁忌・禁止】

本品を使用するに際しては、次の人は医師と相談してください。

- (1) 急性疾患の人
- (2) 悪性腫瘍のある人
- (3) 38℃以上の有熱性疾患の人
- (4) 心臓に障害のある人
- (5) 妊娠している人
- (6) 血圧に異常がある人
- (7) 伝染性疾患の人

【形状・構造及び原理等】

1) 構成

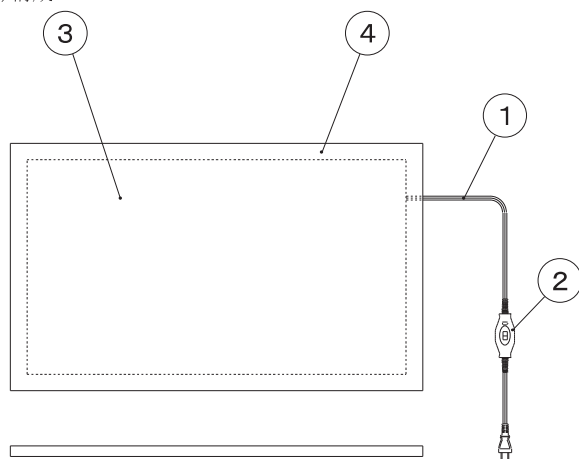

各部の材質

① 電源コード	クロロブレンゴム
② 中間スイッチ	ABS樹脂
③ 発熱体マット	PVCシート
④ 綿ネル	綿

2) 電気的定格

電源電圧 AC 100V (50/60Hz)
定格消費電力 150W以下

3) 寸法及び重量

外形寸法 約 縦390 × 横690 × 厚さ15 [mm]
本体の重量 約 1.9 [kg]

4) 原理

- (1) 中間スイッチを投入することにより、商用電源AC100V(50/60Hz)が、コードヒーターに負荷される。
- (2) (1)の状態が発熱したマットを人体にかける等して、治療を行う。
- (3) 発熱体マットには、サーモスタットが内蔵され、治療温度を一定に保つことができる。

【使用目的又は効果】

1) 性能

本体の表面温度 70 ± 10 [℃]

2) 使用目的

フィットアンボにて治療を行う。

3) 効能又は効果

温熱効果

【使用方法等】

ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

- (1) 綿ネルのカバーを本体にかぶせてください。
その際に中で本体が折れ曲がらない様に手を中に入れて充分チェックしてください。
中で本体が折れ曲がっていると過熱の原因になりますので充分注意してください。
- (2) 電源コードのプラグをコンセントに差し込み、フィットアンボを肌に、じかに、又はタオルの上から身体にピッタリとフィットするように当ててください。
その上に熱と湿気が逃げないように厚手のタオルか毛布で全面を覆うと一層効果的です。
- (3) その次にスイッチを“入”にしてください。そしてフィットアンボが非常に熱くなった時点で、スイッチを“切”にしてしばらく冷やしてください。
- (4) 上記“(3)”の動作を4～6回繰り返してください。
回数の制限はありませんが、1回の使用時間は通常20分程度です。個人差がありますので、自分の身体に合わせておこなってください。
- (5) 終わったら、スイッチを“切”にして更に安全を期するために電源プラグをコンセントから抜いてください。

【使用上の注意】

- 1) 本品を使用する前には、次のことに注意してください。
 - (1) 本品が正しく動作することを確認してください。
 - (2) すべてのコードの接続が正確かつ安全であることを確認してください。
 - (3) 他の機器との併用は、危険を起こすおそれがあるのでさけてください。
 - (4) しばらく使用しなかった本品を使用するときには、必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- 2) 本品の使用中には、次のことに注意してください。
 - (1) 治療に必要な時間、量をこえないように注意してください。
 - (2) 本品に異常が生じたときは、直ちに使用を中止してください。
 - (3) 身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。
 - (4) 停電のときは直ちに電源をお切りください。
 - (5) 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ箇所に触れていると「低温やけど」をおこす場合があります。低めの温度に調節するなど取扱に十分注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
 - (1) 保管するときは、湿気の少ない所に収納してください。
 - (2) 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2) 有効期間（耐用期間）
 - (1) 保守部品のメーカー保有期間：製造終了後 10 年

【取扱上の注意】

- (1) 定められた手順によりスイッチを使用前の状態に戻したのち電源を切ってください。
- (2) コード類の取外しに際しては、コードを持って引き抜くなど無理な力をかけないでください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品の使用後及び保管には、次のことに注意してください。
 - (1) 本体及び付属品は、次回使用に支障がないよう清浄にし、湿気の少ない所に整理してまとめておいてください。
- 2) 本体の故障及び取扱に際しては、次のことに注意してください。
 - (1) 故障した場合は、勝手にいじらずに、販売店または製造元に連絡してください。
 - (2) 本品（付属品を含む）は、絶対改造しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

製造販売業者：株式会社日本理工医学研究所
住 所：〒859-3152 長崎県佐世保市新行江町800番地
電 話：0956-30-8121

製造業者：同上

*

本製品は、EMC規格 JIS T0601-1-2：2002 に適合しています。