

2003 年 10 月 1 日作成

2006 年 3 月 21 日改訂

器具機械 (80) はり又はきゅう用器具

一般医療機器 家庭用貼付型接触粒

JMDNコード 71026000

アフィックスゲルマゴールド

【警告】

このテープの一部に天然ゴムを使用しています。

天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

【禁忌・禁止】

- ①お肌に異常がある箇所には使用しないでください。
- ②切り傷、打ち身、捻挫その他による出血時は使用しないでください。
- ③骨折、やけど、筋肉の組織破壊などに対しては使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】 (各社仕様による)

本品は粘着テープ部、金属部よりなる。

1. 形状及び寸法

接触粒：無機ゲルマニウム

粘着テープ：天然ゴム系粘着剤

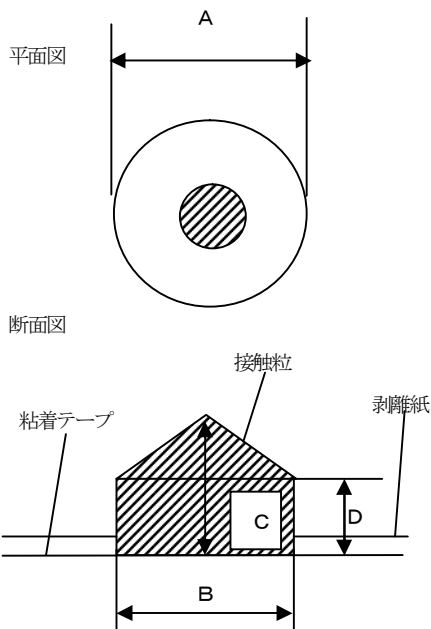

寸法

A: $\Phi 22.0 \pm 0.2 \text{ mm}$

B: $\Phi 7.0 \pm 0.2 \text{ mm}$

C: $2.5 \pm 0.2 \text{ mm}$

D: $2.0 \pm 0.2 \text{ mm}$

【使用目的、効果又は効能】

装着部位におけるコリの緩解

【操作方法又は使用方法等】

- 首、肩、腰、その他のコリのある部位に必要な応じてご使用ください。
- 貼ったままの入浴はできますが、かぶれ予防のために2～3日毎に貼付け場所を変えてください。
- 本品の粒は何度でも使用可能です。粒はご使用後もお捨てにならず、紛失なさらぬよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

- 貼付け場所の汗や汚れなどは、かぶれの原因になりますので、必ずタオルなどで清潔にしてからご使用ください。
- 特に皮膚の敏感な方は、貼付け場所を予めアルコールで拭いて汗、汚れを除くことで「かぶれ」の予防となります。
- 万一、かゆみが生じた場合は貼付け場所をずらしてご使用ください。
- 切り傷、打ち身、捻挫その他による出血時は使用しないでください。
- 高血圧、心臓、肝臓に障害のある方、脚障害のある方は専門医にご相談ください。
- 骨折、やけど、筋肉の組織破壊などに対しては使用しないでください。
- 妊婦及び障害をおもちの方は、専門医にご相談の上ご使用ください。
- 痛みを感じる場所、又は不快感を持っている場所、コリの特に強い場所にもお貼りください。
- お客様の手の届かないところに保管してください。ゲルマニウム粒を飲み込まないよう気をつけてください。
- 粒に強い衝撃を与えると破損する場合がありますのでご注意ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光を避け、小児の手の届かないところに保管すること。

1) 貯蔵・保管方法：室温保存

【包装】 ゲルマニウム10粒入 ($\phi 7 \text{ mm}$)

替テープ10枚×10シート入 ($\phi 22 \text{ mm}$)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社日本ゲルマニウム研究所

住 所：〒420-0823 静岡県静岡市葵区春日2丁目11番9号

電 話：054-253-3535