

ポール肺機能検査用フィルタ PF-30S

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は、上部に入口を、下部に出口を有した容器に、スクリーンタイプの疎水性膜がブリーツ状におさまっている。(充填量：約 40mL)
入口側コネクターより流入した空気は、フィルタ膜にてろ過され、出口側コネクターより流出する。

「代表図」

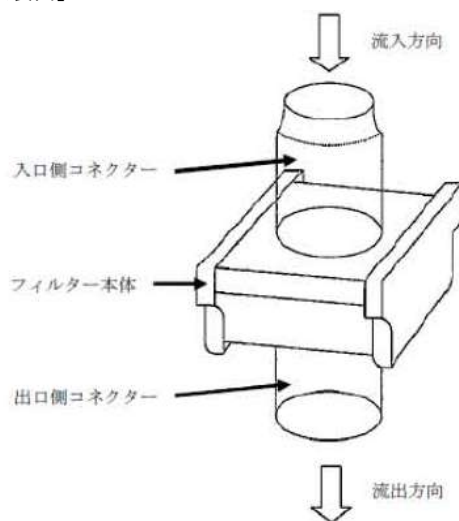

「断面図」

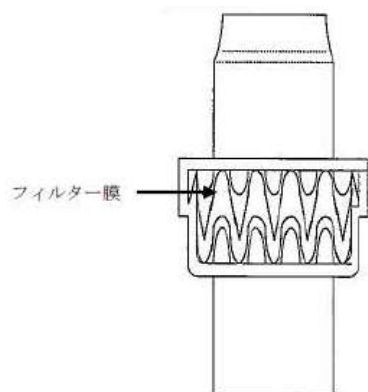

【使用目的又は効果】

本品は肺機能検査時に使用され、肺機能測定器とマウスピースの間に接続し、被験者から排出される唾液、喀痰等の汚染微小滴を取り除き、汚染微小滴由来の細菌による測定器具の汚染を防ぐ(1),(2)。

【使用方法等】

肺機能測定器具とマウスピースの間に接続する。
本品はディスポーザブルの製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用できない。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. ポール肺機能検査用フィルタ PF-30S は、唾液、微小水滴、異物等による汚染から肺／呼吸機能検査装置を守るフィルタである。フィルタの中に多量の分泌物が入った場合は、フィルタを取り外し、新しいフィルタに交換すること。
2. 洗浄したり滅菌したりして再使用しないこと。「消毒液や洗浄液でフィルタが濡れると、フィルタの圧抵抗や細菌除去能が変化する可能性がある。」
3. 一人一回限りの使用。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて保存すること。

【主要文献及び文献請求先】

主要文献

- (1) R.Spielberg: Cross Contamination Reduction Efficiency of the Pall PRO-TEC Barrier Filter (Reorder No.PF30) for Pulmonary Function Testing. Pall Technical Report
- (2) YL Kirk. et al.:Laboratory evaluation of a filter for the control of cross-infection during pulmonary function testing. Journal of Hospital Infection 1992;20:193-198.
- (3) VJ.Guimond and NN.Gibson:Effect of In-Line Filters on Spirometry. Canadian Journal of Respiratory Therapy 1990(Jul);26(3):9-11.

**文献請求先

日本ポール株式会社
〒163-1325 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号
電話番号 03-6386-0991
FAX 番号 03-6386-0992

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本ポール株式会社

**外国製造所：ポール インターナショナル サアル (スイス)
Pall International Sarl (Switzerland)