

一般医療機器 鼻用洗浄器（41599000）
鼻洗浄器 はなまる

【禁忌・禁止】

1. 鼻の粘膜が弱い方、嚥下（えんげ）障害のある方、自分で操作ができない方などは使用しない。

【事故やけがのおそれがあります。】

2. 耳鼻科及び眼科の疾患がある方や過去にあった方は、専門の医師に相談の上使用する。

【事故や体調不良をおこすおそれがあります。】

3. 高齢者・小児・乳幼児などは使用しない。

【事故やけがのおそれがあります。】

【形状・構造及び原理等】

1. 形状




寸法：195 x 70 x 55mm

ノズル取付時の高さ 280mm

重量：約 200 g（乾電池を除く）

2. 構造

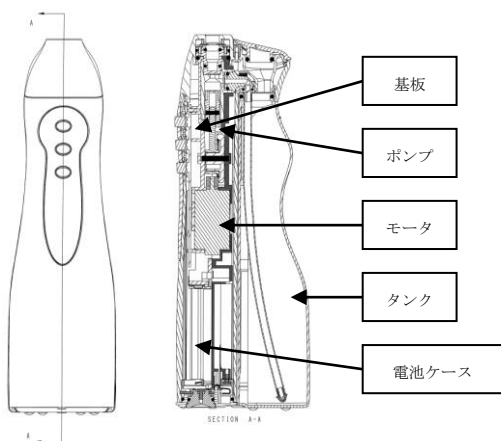

3. 付属品

- (1) 取扱説明書
- (2) ノズルセット（2本）
- (3) スプーン
- (4) 単3アルカリ乾電池（3本 お試し用）

4. 原理

モーターの回転でポンプを動かし、タンク内の洗浄液を吸い上げる。吸い上げた洗浄液はノズルを通して噴出させる。各モードの電流値を変えることで、吐出量を変えている。

その他は、「取扱説明書」の「各部の名前」及び「定格・仕様」を参照のこと。

【使用目的、効能又は効果】

食塩温水を直接鼻腔に適用するために用いる器具である。ホーン型のノズルヘッドを鼻腔にセットし、粘膜及び鼻の通路を洗浄及び治療する温かい塩水等の治療液を充填する。

【品目仕様】

1. 吐出量	Normal	270 ml/分以下
	Soft	250 ml/分以下
	Pulse	250 ml/分以下（間欠動作）
2. 消費電流	Normal	0.8 ± 0.3 A
	Soft	0.65 ± 0.25 A
3. 電源	単3アルカリ乾電池 3本（DC4.5V）	
4. 感電保護クラス	クラス0	
5. 水に対する保護クラス	日常生活防水（保護等級4相当）	

【操作方法又は使用方法】

1. 初めてご使用になるとき、又は長時間使用しないで保管されたときは、一度水を通してからご使用ください。
2. ノズルセットとタンクを本体に取り付ける。
 - (1) 確実に取り付けてください。
3. 計量スプーンですりきり1杯の食塩をタンクに入れます。
 - (1) 調味料が添加されたものや岩塩は使用しないでください。
 - (2) 薬品は使用しないでください。
4. 人肌程度のぬるま湯をタンクに入れ食塩と混ぜます。
 - (1) 熱湯は使用しないでください。
5. 初めてご使用になるときは、スイッチを押して、各モードの水流を確認してからご使用ください。

取扱説明書を必ず参照ください

一般医療機器 鼻用洗浄器（41599000）
鼻洗浄器 はなまる

6. ノズルヘッドを鼻孔に入れ、使いたいモードのスイッチを押して「ON」にし、洗浄してください。初めてお使いのときは「S o f t」でお試しください。

- (1) ノズルヘッドと鼻孔は密閉せずに少しスキマを空けてご使用ください。耳に圧力がかかり過ぎることを防ぎます。
- (2) 洗浄中は口を開け、「エー」と発生しながら洗浄してください。食塩温水が気管に入ってむせるのを防ぎます。

7. スwitchを押して「OFF」にしてから、鼻孔からノズルヘッドをはずしてください。

【使用上の注意】

1. 使用目的、効能又は効果

- (1) ご使用中に万一口（耳・鼻・目など）に何らかの異常や不調が感じられたときは、直ちにご使用を止めて医師に相談する。
- (2) 鼻腔内の洗浄以外の目的に使用しない。【目や耳などに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。】
- (3) 長時間継続して使用しない。

2. 操作方法又は使用方法等

- (1) 鼻腔を洗浄するときは、機器を常に清潔にし、新しい温水を使用する。
- (2) タンクに 40℃以上の温水を入れない。【やけどの原因になります。】
- (3) 周囲温度は0℃～40℃以内で使用してください。
- (4) 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。
- (5) 機器を爆発物、可燃液やガスの近くで使用しない。
- (6) タンクに水を入れたまま、本体を倒して放置しない。
- (7) 分解、修理、改造は絶対に行わない。【事故やトラブル、故障の原因になります。】
- (8) 乳幼児の手の届くところに置かない。【付属品などの誤飲による事故やトラブルの原因になります。】

その他、「取扱説明書」の「安全上のご注意」や「使用上のご注意」や「使いかた」を熟読し遵守すること。

【貯蔵方法及び有効期限】

1. 保管方法

- (1) 温度、湿度の高いところや直射日光の当たる所に置かないでください。

2. 使用後の保管方法

- (1) 機器内の洗浄をするために、タンクに新しい水を半分ほど入れ、機器を動かしタンク内の水を全て噴射してください。

【塩分をきれいに洗い流さないと、塩カスがつまり、噴射しなくなります。】

- (2) 水分を拭き取り、充分乾燥させてから保管してください。

【不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。】

その他、「取扱説明書」の「使いおわたたら」や「保管」を熟読し遵守すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本体のお手入れ

- (1) やわらかい布で汚れを拭き取ります。

【洗剤を使用する場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふき取ります。】

【シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので絶対に使用しないでください。】

【本体の水洗いはしないでください。】

2. ノズルセットのお手入れ

- (1) やわらかい布で汚れをふき取ります。汚れがひどい場合は水洗いしてください。

【水洗い後は、水分をふき取り水をよく切ってください。】

【ノズルとノズルヘッドは取りはずすことができますが、組付けた状態で洗ってください。】

3. タンクのお手入れ

- (1) やわらかい布で汚れをふき取ります。汚れがひどい場合は水洗いしてください。

【水洗い後は、水分をよく切ってください。】

その他、「取扱説明書」の「お手入れの仕方」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

日光精器株式会社 滋賀工場

〒 523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町 2660

TEL：0748-37-7581