

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

BD 滅菌綿棒 PS (UNB)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリスチレン製の軸の先端にレーヨン製の綿球部がついた検体採取用の綿棒であり、滅菌パウチで包装されている。

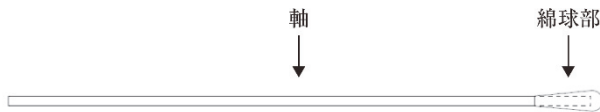

材質 綿球部: レーヨン
軸: ポリスチレン

寸法 綿棒全長: 152.4mm
綿球部長: 17.5mm

本品は個包装とともに滅菌済みである。

【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

【使用方法等】

1. 個包装された袋の開口部より本品の軸部分を摘んで綿球部に触れないように取り出す。
2. 本品を検体採取部位に当てて数回擦過する。

【使用上の注意】**〈重要な基本的注意〉**

- 1) 開封後は速やかに検体採取を行い、使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。
- 2) 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。
- 3) 検体採取時に軸部分に力がかかり過ぎたり、強く押す等の負荷をかけて軸部を折らないように注意すること。
- 4) 使用中に破損した場合は、速やかに使用を中止し、新しいものを使用すること。
- 5) 患者が綿棒の軸部分を噛んでいる場合は無理な操作を行わないこと〔破損のおそれがある〕。
- 6) 検体を採取する時、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう無理な力をかけないこと。
- 7) 凍結や加熱をしないこと〔破損、劣化のおそれがある〕。
- 8) 全操作においてスタンダードプリコーション(標準予防策)に従い適切な防護具(保護服、マスク、ゴーグル、手袋等)を着用すること。併せて、各検査室のガイドラインにも従うこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

- * 1. 保管方法
直射日光、多湿を避け、濡れに注意して保管する
2. 有効期間
使用期限は個包装に記載されている。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

TEL: 0120-8555-90 (カスタマーサービス)

外国製造業者:

ピューリタン メディカル プロダクツ カンパニー
エルエルシー

(PURITAN MEDICAL PRODUCTS COMPANY)

国名: アメリカ合衆国