

機械器具 47 注射針及び穿刺針

管理医療機器 医薬品・ワクチン注入用針 44127010

BD マイクロファインプラス
31G×5mm, 8mm

再使用禁止

患者向け電子添文

【禁止事項】

- 1) 一度使用した本品を再度使用しないこと。
- 2) 他の人が使用した本品を使用しないこと。[感染症の原因となることがある。]
- 3) 開封後の操作において曲ってしまった針を使用しないこと。
[曲がった状態で、または曲がった針を元に戻してから注射すると、針が折れ、折れた針が体内に残ることがある。]

【形状・構造及び原理等】

〈概要〉


本品は、ペン型注入器用注射針であり、JIS T 3226-2:医療用ペン型注入器—第2部:注射針基準に適合するA型の注射針である。

〈針の寸法〉

31G (0.25mm) ×5mm 及び 8mm

〈針材質〉

ステンレス鋼

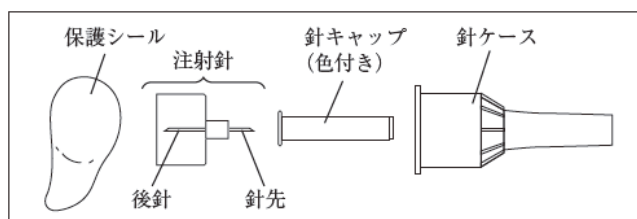

【使用目的又は効果】

本品は、専用医薬品カートリッジとともに取り付け、皮下または筋肉内へ医薬品またはワクチンを注入するものである。

【使用方法等】

本品は、JIS T 3226-2 A 型注射針に対応するペン型注入器に取り付けて使用する。

使用するペン型注入器の添付文書及び取扱説明書、使用する薬剤の添付文書を読み使用する。

- 1) 保護シールをはがす。

注意: 保護シールは使用直前に後針に接触しないように完全にはがすこと。保護シールがはがれていたり破れていたりする場合、また本体が壊れていたり、後針が曲がっている等の異常がある場合は使用しないこと。

- 2) ペン型注入器に針ケースごとまっすぐ奥まで差し込み、止まるまで時計回りに回して確実に取り付ける。[斜めに取り付けると、後針の曲がり・折れによって薬液が出なくなることがある。]

- 3) 針ケースを外し、針先が針キャップ(色付き)に触れないように、針キャップ(色付き)をまっすぐ引っ張って外す。

注意: 注射針が装着しにくい場合や、針ケースが外れにくい場合は、無理に使用しないこと。

- 4) 空打ちを行い、針先から薬液が出ることを確認する。

- 5) 注射を行う。

注意: 5mm 針を使用する場合、皮膚面に対し垂直に刺す。通常注射部位をつまみ上げることは必要ではないが、つまみ上げることが望ましい場合もある。[やせた人や子供の腕や太ももなど、比較的皮下組織の少ない部位に注射をする場合は、皮膚をつまみ上げて、注射することが望ましい場合がある。]

注意: 8mm 針を使用する場合、皮膚をつまみ上げて針を刺すか皮膚に対して斜めに針を刺すことが望ましい。[皮膚をつまみ上げずに垂直に刺すと筋肉内に注射する可能性がある。]

注意: 注射針がぶれないように刺し、刺した時の角度を保ちながら薬液を注入すること。[針を刺すときや、薬液を注入するときにぶれが生じると針が曲がり、折れることがある。]

- 6) 注射後は注射針に針ケースをまっすぐ取り付け、針ケースごと外す方向(反時計回り)に回し、ペン型注入器から外す。[斜めに付けると針が曲がったり折れたり、針ケースを突き抜けることがある。]

注意: 使用後の注射針は、針ケースをかぶせた後、すぐに取り外すこと。その際、針キャップ(色付き)はかぶせないこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品の使用に際しては、必ず医師等が患者に指導を行うこと。
- 2) 包装が破れていたり、汚れがみられたりするなど、製品に異常が認められる場合には使用しないこと。
- 3) 一度取り外した針キャップ(色付き)は、注射針に取り付けないこと。[針によってケガをする可能性がある。]
- 4) 注射前の取り扱いにおいて、針には触れないこと。
- 5) 使用前に針を刺す部位の消毒を行うこと。[感染のおそれがある。]
- 6) 同一箇所への注射を避けること。また、前回の投与部位より最低 2~3 cm 離して注射すること。[しこりなど皮膚症状が発生するおそれがある。]
- 7) 皮膚が硬くなったり、炎症がみられたり、むくみがみられたり、感染の兆候がみられたりする部位へは注射をしないこと。[インスリン吸収への影響、針曲がり・針折れ、および症状が悪化する等のおそれがある。]
- 8) キャップ(色付き)の取り外し後は、衣服等への接触により針を曲げたり傷つけたりすることがないように十分に注意すること。
- 9) 毎回の注射の前に必ず空打ちを行い、針先から薬液が出ることを確認すること。薬液が出ない場合は、新しい注射針に交換すること。
- 10) 誤って自分や他の人を針で傷つけないように十分注意すること。
- 11) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

- 12) 小児の手の届かない場所に保管すること。
- 13) 使用済みの本品の廃棄については、感染防止に留意し、以下の方法に従うこと。
 - (1) 使用后、本品に必ず針ケースをつけて、しっかりフタのできる固い容器に入れること。それをさらに袋に入れ、廃棄すること。
 - (2) かかりつけの医療機関や薬局などから廃棄方法についての指示があった場合はそれに従うこと。
 - (3) 薬局などが自主的に回収を行っている地域においては、薬局などに廃棄方法を確認すること。
 - (4) 上記のような廃棄方法の指定がない場合は、市区町村の規則に従い廃棄すること。
 - (5) 手袋をするなど十分な注意をして、取り扱うこと。
 - (6) 公共の場所（ホテル、公衆トイレ、飲食店等）には絶対に破棄しないこと。
 - (7) ビン・缶などリサイクルに回る危険がある容器に入れて廃棄しないこと。

〈発生するおそれのある有害事象〉

その他の有害事象

針を刺した部位からの出血、針を刺した部位の痛み、赤み、はれあ
るいは内出血、金属アレルギー

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避け室温で保管すること。

〈有効期間〉

使用期限は保護シール、化粧箱に記載。〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

TEL：0120-8555-90（カスタマーサービス）

外国製造業者：

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー

（Becton, Dickinson and Company）

国名：アメリカ合衆国