

コクレアインプラント6

再使用禁止

【警告】

- (1) 人工内耳手術を希望する患者に対しては植込み手術前の診察の際に、髄膜炎を引き起こす病原体に対するワクチン接種について説明を行うこと。また、内耳手術の実施に伴う髄膜炎の一般的な問題について適切な説明を行うこと。

(2) 電極を植え込むことによって、術耳の残存聴力が完全に失われることがある。

【禁忌・禁止】

1. 適用対象(患者)

次に該当するような症例は植え込みには適していない。

- (1) 術前の CT や MRI 等の画像診断により、蝸牛に電極が挿入できるスペースが確認できない場合。

(2) 聴神経あるいは聴覚中枢の障害による失聴。

(3) 外耳あるいは中耳に活動性の感染症がある場合。

(4) 重度の精神障害がある場合。

2. 併用医療機器「相互作用の項参照」

- (1) 電磁放射線(磁気誘導コイルまたはマイクロ波)を使った治療用あるいは医療用ジアルミ(熱透過法)

(2) 電気ショック療法

本品は製造販売業者が指定する医療機器とのみ併用すること。〔意図しない刺激電流による患者への障害の可能性がある。〕

3. 使用方法

再使用禁止

2) 付属品

- (1) 滅菌済シリコンインプラントテンプレート

(2) 滅菌済交換用磁石カセット

(3) 滅菌済非磁性カセット

(4) サイジングツール

(5) 再装填用シース

(6) デブスゲージ

原理

内耳に挿入されたインプラントの電極に電流を流して聴神経を電氣的に刺激する。

【使用目的又は効果】

** 補聴器装用効果が十分に得られない、両側性、一側性または非対称性の高度感音難聴患者に対して、聴覚神経を電気刺激することにより音知覚を取り戻すことを目的として使用される。

【使用方法等】

組み合わせで使用する医療機器


	販売名	承認番号	** 対象の難聴者
	Nucleus 8 サウンドプロセッサ	30500BZX00187000	両側性 一側性／非対称性
*	Kanso 3 サウンドプロセッサ	30700BZX00039000	両側性のみ
	Kanso 2 サウンドプロセッサ	30300BZX00273000	
	Nucleus 7 サウンドプロセッサ	23000BZX00310000	
	KANSO サウンドプロセッサ	22900BZX00220000	

※磁石は必ず①マグネットタイプを使用すること。

【形状・構造及び原理等】

外観

1) 本体

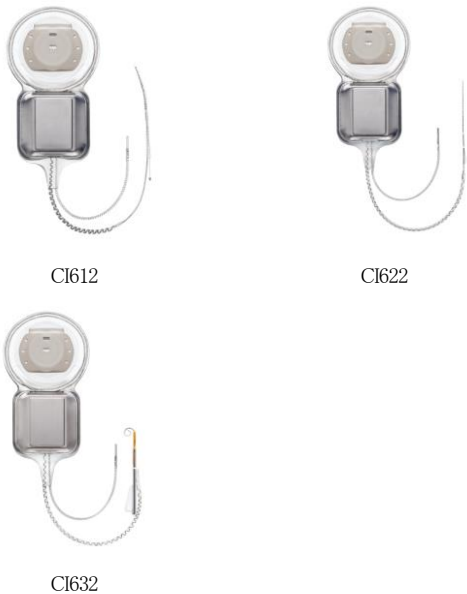

血液、体液等に直接接触する材料:シリコンゴム、チタン、白金

一般的な使用方法

1. インプラントの植込み手術

- (1) テンプレートを使って植込み部位を決定し、切開部及びインプラントを固定する部位をマークする。

(2) 骨膜及び側頭筋膜を切開し、受信コイルを収める骨膜のポケットを作成する。その後、側頭筋の下に蝸牛外電極を挿入するポケットを作成する。

(3) 側頭骨に刺激装置を収める窪みを作成する。

(4) 滅菌パッケージからインプラントを取り出し、側頭骨の窪みにインプラントを固定して、蝸牛外電極を側頭筋の下にポケットに設置する。

(5) 蝸牛内に電極アレイを挿入する。電極が蝸牛軸の方を向いていることを確認する。
CI632 を植込む場合は、サイジングツールを用いて、併用するシースが抵抗なく配置できるかを、事前に確認する。

(6) CI612 を植込む場合は、蝸牛内に電極を位置付けた後、スタイレットを抜去する。
CI632 を植込む場合は、ホワイトマーカの位置を参考にしてシースを移動させながら、蝸牛内に電極を位置付けた後、シースを抜去する。

(7) 電極アレイを固定する。

(8) テレメトリ機能を使った電極間インピーダンスの測定や、聴神経の活動電位の測定をする。また必要に応じて X 線撮影を行い、電極の挿入状態を確認する。

(9) 顔面神経窩を塞ぎ、切開部を各層ごとに縫合して、ガーゼで患部を

術者用ガイド及び取扱説明書を必ずご参照ください。

覆う。

2. MRI 検査時の使用方法

本品は、植込みをしたままの状態 で 3.0T までの磁気共鳴画像診断装置 (MR 装置) による検査を実施することができる。

3. 磁石カセットの取り外し

本品はそのままの状態 で MRI 検査を実施することができる。しかし、頭部の MRI 検査を実施する場合等、磁石を取り外す必要がある場合、以下の手順で磁石カセットを取り外し、滅菌済非磁性カセットを使用する。なお、以下の手順は無菌環境で実施すること。

- インプラント周辺の頭髪を剃毛し、コイル先端付近を切開して、インプラントコイルと磁石カセットカバーを露出させる。
- インプラントコイル先端部分にある磁石カセットの端を鑷子等で注意深くつかむ。
- 磁石カセットを磁石ポケットから引き抜く。引き抜いた磁石カセットは廃棄する。
- 滅菌包装から滅菌済交換用磁石カセット又は滅菌済非磁性カセットを取り出す。
- 滅菌済交換用磁石カセット又は滅菌済非磁性カセットを磁石ポケットに差し込む。この時、以下の表示が上面になるように、上下の向きに注意すること。
滅菌済交換用磁石カセット: “SKIN SIDE”
滅菌済非磁性カセット: “MRI”
- 傷口を縫合し、圧迫包帯を使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 使用前に、包装材に損傷、変色、ピンホール等の異常がないことを確認すること。
- 開梱時に滅菌インジケータが青色になっていることを確認すること。
- 植込み手術中は、顔面神経のモニタの使用を推奨する。特に先天性側頭骨異常がある患者や再手術の場合等、顔面神経へのリスクが高い場合に併用を推奨する。
- 小児の場合は、乳突切開の実施を推奨する。
- 小児に対し骨の切削を行う場合、硬膜を保護するためにエレベーターを使用することを推奨する。
- 骨の切削を行う際、及び固定用縫合孔を穿孔する際は、下層の硬膜を損傷しないように細心の注意を払うこと。
- 安定した植込みを実現するために、後部にも固定用縫合孔を作るか、あるいは頭蓋骨膜のポケットの下にインプラントの受信コイルを設置することも可能である。
- 外リンパを吸引しないこと。
- 汚染を防ぐため、電極を挿入する直前まで骨内膜、正円窓膜を開かないこと。
- 蝸牛開窓時、極端に前方又は上方に開窓しないこと。[蝸牛又は前庭系を損傷する恐れがある]
- 蝸牛開窓時、極端に下方に開窓しないこと。[電極が誤った位置に配置され、蝸牛を外れて下鼓室蜂巢に挿入される恐れがある。]
- 骨の切削屑や血液等の液体を蝸牛開窓部から除去すること。
- 電極は曲がりやすく変形しやすいため、細心の注意を払うこと。
- 電極リード線への機械的ストレスを防ぐため、蝸牛外電極は側頭筋内に設置しないこと。
- 電極挿入直後は、ハンドルを保持して電極リード線の余剰部分が動かないようにすること。[電極のねじれや蝸牛組織の損傷を引き起こす可能性がある。]
- 電極リード線が乳突洞内で確実に固定されていることを確認すること。また、細い縫合糸で電極リード線を固定しないこと。[電極の移動や劣化の恐れがある。]
- 皮弁の厚みが最大 6～9 mm になるよう調整すること。[皮弁が厚いと信号の伝達不良を生じることや、磁石が十分に吸着しないことがある。]

- 後日、磁石カセットを取り外す可能性があるため、磁石を跨ぐ部位を切開/縫合しないこと。
- 磁石カセットや非磁性カセットの取り外しや挿入を行う場合は、指定の器具を使いシリコン部分や受信コイルのワイヤを破損しないように注意すること。また、インプラントにかかる力を最小限に抑えること。
- 磁石カセットの取り外しや挿入時は、受信コイルに垂直方向の力が加わらないようにすること。[磁石ポケットを損傷する恐れがある。]

＜CI612 を使用する場合＞

- 電極の再挿入又は位置を変える目的等で、スタイレットを再挿入しないこと [電極や蝸牛を損傷する恐れがある。]

＜CI632 を使用する場合＞

- 推奨される蝸牛開窓孔の幅は 0.8mm～1.0mm である。サイジングツールを用いて、開窓孔の最終サイズを確認すること。
- 蝸牛開窓孔が 1.4mm より大きい場合は、両手で安定させてから挿入すること。[シースストッパーが開窓孔に入ってしまう可能性がある。]
- 電極のシースは、挿入の直後までつけたままにしておくこと。
- 電極を蝸牛に挿入する際は、鑷子でシースハンドルを把持すること。
- 電極が完全に挿入され、シースが外され、リード線が安定するまで、電極を維持すること。
- 挿入中に抵抗を感じた時は直ちに停止し、シースの経路や位置を確認すること。
- シースのハンドルを適切な位置に合わせる。[電極の先端が鼓室階の底部の方に下がったり、基底膜の方に上がったりする可能性がある。]
- 挿入中に電極がシース内に残っていることを確認すること。
- シースストッパーが蝸牛開窓部に留まっていることを確認すること。[ストッパーが蝸牛開窓部に達する前に電極を進めると、先端が折れ重なる可能性がある。]
- 電極アレイの挿入後、シースが完全に抜去されていることを確認すること。
- シースは 2 回まで使用することができる。2 回目の挿入が必要となる場合に備えて、シースは滅菌領域に置いておくこと。
- 2 回目の挿入時にシースが破損している場合は、再装填用シースを使用すること。
- 電極が損傷している場合、又はシースの再装填時に電極がシース内に完全に収まらない場合は、予備のインプラントを使用すること。

【使用上の注意】

＜使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)＞

- 画像診断で蝸牛に人工内耳を挿入できる部位が確認できない場合。
- 反復性の急性中耳炎が存在する場合。
- 制御困難な髄液の噴出が見込まれる場合など、高度な内耳奇形を伴う場合。
- 重複障害及び中枢性聴覚障害では慎重な判断が求められ、人工内耳による聴覚補償が有効であるとする予測がなければならぬ。

＜重要な基本的注意＞

- 以下のような術前の状態によっては、人工内耳装用の有無にかかわらず髄膜炎発症の危険性が上がる場合がある。
 - モンディーン症候群を含む先天性蝸牛奇形
 - 脳脊髄液用シャント又はドレーン
 - 再発性の細菌性髄膜炎
 - 外リンパ瘻
 - 脳脊髄液が流れ出すような頭蓋骨折/欠損
- インプラントの設置が適切でない場合、術後、インプラントの移動等により不具合発生の原因となる場合がある。
- 術耳に残存聴力のある人は、残存聴力のない人に比べて術後に短期的なめまいが起きやすい傾向がある。
- 術後、中耳炎に罹患した場合には速やかな治療が必要である。炎症が長

術者用ガイド及び取扱説明書を必ずご参照ください。

引くと電極の取り出しを行わなければならないことがある。

- 5) 術後、電極アレイの一部あるいは全部が蝸牛外に抜け出てしまうことにより、非常に大きな不快感が聞こえることや、音が全く聞こえなくなることがある。その際、再プログラミングをしても聞き取り能力が低下してしまうことがあり、結果的に使用電極数を減らさなければならないことや、さらには電極の移動やインプラントの植え換えを行わなければならないことがある。
- 6) 人工内耳治療に関して、その効果や長期的な電気刺激による影響、安全性は明らかでないこと、他の医療機器による診断、治療などに制限を受けること、予想される不具合、また専門の施設、スタッフ、装用者、家族との協力による継続的な治療が必要であることについて、患者及び家族又はそれに代わりうる適切な者に十分な説明を行い、事前に同意(インフォームドコンセント)を得ること。
- 7) 本品に対応するサウンドプロセッサには、必ず①マグネットタイプの磁石を使用すること。
- 8) 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MRI 検査を実施することが可能である。詳細についてはコクレア社の MRI 検査ガイドラインを参照すること。
- MRI 検査静磁場強度:1.5T, 3.0T
静磁場強度の勾配:2000 gauss/cm
MR 装置が示す最大 SAR(Specific Absorption Rate)
全身 SAR 1 W/kg (1.5T)
0.5 W/kg (3.0T) - CI612
0.4 W/kg (3.0T) - CI622 / CI632
頭部 SAR 2 W/kg (1.5T)
1 W/kg (3.0T)
最大 MR 検査時間:60 分(連続スキャン)
- 本品が MR 装置による撮像で生じるアーチファクトは本品の実像から以下の距離となる。
- <磁石カセットあり / 勾配エコー>
10.4 cm (1.5T)
10.7 cm (3.0T)
- <磁石カセットなし / スピンエコー>
4.8 cm (1.5T)
5.6 cm (3.0T)
- * 9) 神経刺激装置(脳脊髄部刺激装置等)や磁気脳室シヤントは近づけないこと。インプラントに装着した磁石がこれらの機能に影響を及ぼす恐れがある。インプラントの端から 2.5cm の距離での最大磁場強度は 300Gauss 未満である。

<相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)>

1. 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1) 電磁放射線(磁気誘導コイルまたはマイクロ波)を使った治療用あるいは医療用ジアルミ(熱透過法)	使用禁止	内耳組織、又は本品を損傷する恐れがある。
(2) 電気ショック療法		

2. 併用注意(併用に注意すること)

1) 電気メス

- ・モノポーラ電気メスは、本品を骨床に配置した後は使用を中止すること。
- ・バイポーラ電気メスを使用する場合は、電気メス先端が本品に接触しないよう、1cm 以上離すこと。[蝸牛組織、神経組織、本品を損傷させる恐れがある。]
- ・モノポーラ電気メスは、人工内耳装用者の頭頸部には使用しないこと。頭頸部以外に使用する場合は慎重に使用すること。

2) 神経刺激

インプラント植込み部位に直接行わないこと。[超音波場がインプラント上に誤って集中し、組織やインプラントを損傷する恐れがある。]

- ・治療レベルの超音波エネルギーをインプラント植込み部位に直接照射しないこと。
- ・超音波を使用する医療用ジアルミを人工内耳装用者の頭頸部に使用しないこと。

3) 電離放射線療法

インプラント植込み部位に直接行わないこと。[インプラントを破損する恐れがある。]

4) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)

インプラントは、MR 環境下における静磁場、傾斜磁場及び高周波(RF)による相互作用を受ける可能性がある。これらには、磁力による牽引、誘導電流による神経刺激、組織の加温等が考えられる。安全に MRI 検査を行うために次の点を遵守すること。

- ・MR 画像の画質は、インプラントによる影響を受けることになる。そのため、インプラント近辺の診断情報は失われる。また、磁石を取り外すことは患者に感染のリスクを伴う。これらを踏まえて、MRI 検査を実施することの医学的必要性を考慮すること。
- ・コクレア人工内耳システムの体外装置(サウンドプロセッサ、リモートアシスタント、関連アクセサリ等)は MR 禁忌である。人工内耳装用者が MRI 検査室に入る前に全ての体外装置を外すよう指示すること。

<不具合・有害事象>

人工内耳手術には、通常の手術や一般的な麻酔で想定されるものと同程度の危険性がある。以下のような事象が発生した場合、内科的処置、手術、インプラントの抜去又は入れ換えが必要になる場合がある。

1) 重大な不具合

- ・インプラントの破損、変形、腐食、変色、屈曲
- ・電極リード線の断線やショート
- ・電極の位置が適切でないことによる刺激不良
- ・機器の移動、露出
- ・機能不全:人工内耳等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的な回路構成部品等の故障により、適切な治療ができなくなることがある。

2) 重大な有害事象

- ・髄膜炎
- ・感染
- ・壊死
- ・中耳炎
- ・血管、神経、骨等の損傷
- ・外リンパ瘻
- ・内耳液の漏出
- ・前庭機能障害
- ・硬膜下損傷
- ・皮下血腫
- ・電極アレイの一部又は全部が蝸牛から抜けたことによる聴力低下
- ・電極リード線による外耳道壁や鼓膜などの外耳構造の穿孔
- ・肉芽形成
- ・破損片等の体内遺残
- ・手術時間の延長

3) その他の有害事象

- ・出血
- ・局所の感覚鈍麻
- ・皮弁上痂皮
- ・味覚障害
- ・植込み部の痒み及び疼痛
- ・聴こえの低下
- ・皮弁の肥厚
- ・患者及び手術従事者の負傷

術者用ガイド及び取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・耳鳴、顔面神経刺激、顔面筋肉の収縮、めまい、痛み
- ・皮弁トラブル、皮膚トラブル
- * 炎症・腫脹
- * 顔面神経麻痺

<その他の注意>

本品を使用する患者に以下の指導を行うこと。

- 1) 不具合等異常が発生した場合における連絡施設、担当医師等を明記した人工内耳装用者カードを常に携帯すること。
- 2) サウンドプロセッサの中のマップは、その人以外には適合しないため、他人のサウンドプロセッサを使用しないこと。
- 3) 静電気の放電により、まれに本品の電気部品が破損する可能性があるため、静電気が生じる活動や状況の際はサウンドプロセッサを取り外したり、電気を通す物質に触れて静電気を逃すこと。
- 4) 携帯電話によって、音が歪んで聴こえる等の影響を受けることがある。そのような場合には、携帯電話から十分な距離を取ること。
- 5) 空港での金属探知機や店舗の盗難防止システム等の装置は、強力な電磁場を発生させており、人工内耳の材質自体が、金属探知器に反応する場合がある。その際には、係員に人工内耳装用者カードを提示すること。
- 6) スポーツあるいは遊技等での殴打、転倒又は衝突等による植込み部位への直接的な衝撃によって、インプラントが破損あるいは故障する危険性があることに十分注意すること。
- 7) サウンドプロセッサの送信コイルを装用する際は、送信コイルをインプラントの上から下ろすように装用すること。横にスライドさせるように装用するとサウンドプロセッサの磁石とインプラントがずれて吸着する可能性がある。
- 8) その他人工内耳システムの装用注意事項は、サウンドプロセッサのユーザーガイドを参照すること。

Candidacy, evaluation, and outcomes in children and adults.

6. Peter, N., 2019, Cochlear implants in single-sided deafness - clinical results of a Swiss multicentre study. Swiss Medical Weekly.
7. Peters 2015, CINGLE-trial: cochlear implantation for single-sided deafness, a randomised controlled trial and economic evaluation
8. Marx 2021, Cochlear Implantation and Other Treatments in Single-Sided Deafness and Asymmetric Hearing Loss: Results of a National Multicenter Study Including a Randomized Controlled Trial

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社日本コクレア

電話:03-3817-0241

製造業者: Cochlear Limited

製造所所在国:オーストラリア

** 【臨床成績】

一側性または非対称性の高度感音難聴患者に対する本品の有効性および安全性は、海外での臨床使用経験に関する文献調査(159 報)等から評価された。

有効性については、一側性または非対称性の高度感音難聴患者に本品を適用することにより、雑音下での音声知覚、音源定位、空間聴覚、会話理解、聴取時の疲労、耳鳴りの改善が見られた。

安全性については、良聴耳への影響を含め一側性または非対称性の高度感音難聴患者特有の新たなリスクは報告されておらず、外科手術に伴う出血や感染、デバイスの摘出が必要となる可能性など、既知のリスクはあるものの両側性高度感音難聴患者に対する通常の人工内耳治療と比較しても、許容範囲内であると評価された。

【保管方法及び有効期間等】

室温、乾燥した場所で保管する。

滅菌有効期間:外箱に記載(自己認証)

** 【主要文献】

1. Arndt 2011, Comparison of pseudo binaural hearing to real binaural hearing rehabilitation after cochlear implantation in patients with unilateral deafness and tinnitus.
2. Arndt S 2011, The University of Freiburg Asymmetric Hearing Loss Study.
3. Hassepass F, 2012, Unilateral Deafness in Children: Audiologic and Subjective Assessment of Hearing Ability After Cochlear Implantation.
4. Härkönen K., 2015, Single-Sided Deafness: The Effect of Cochlear Implantation on Quality of Life, Quality of Hearing, and Working Performance.
5. Friedmann, D. R., 2016, Single-sided deafness cochlear implantation:

術者用ガイド及び取扱説明書を必ずご参照ください。