

送水タンク MDC-200

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉


- ・ 本品は、あらかじめ滅菌されてない。初めて使用する場合は、必ず洗浄を行ってから消毒または滅菌を行うこと。
[感染の恐れがある]
- ・ フィルターNF-1を送水チューブ に取付けて使用すること。
[体内に異物が混入し生体が損傷する恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

1, 構成部品ユニット

本品	1台
フィルター NF-1	1個

2, 各部の名称

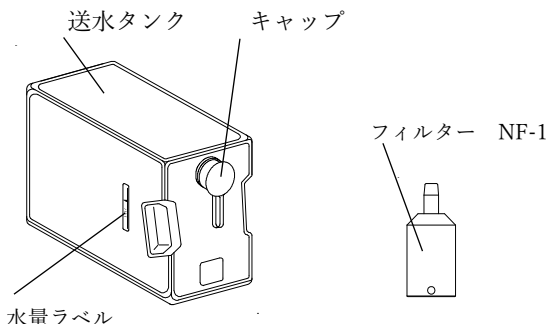

3, 仕様

項目	仕様
外観寸法	83(W)×166(H)×299(D)mm
容量	約2L

〈作動・動作原理〉

本品は、当社指定の内視鏡用送水装置に接続して、体腔内に送水するための貯水タンクである。

【使用目的又は効果】

本品は、当社指定の内視鏡用送水装置に接続して、体腔内に送水するために貯水することを目的とする。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- 1, 使用前の点検を行う。
- 2, キャップを外し、滅菌水を水量ラベルまで入れる。
- 3, 内視鏡送水装置のタンクホルダへ本品をセットする。
- 4, 送水チューブにフィルターを装着する。
- 5, フィルターが装着された送水チューブを送水タンクの中へ入れる。
- 6, 使用后、送水チューブからフィルターを取り外す。
- 7, 内視鏡送水装置から送水タンクを取り外す。
- 8, 送水タンクとフィルターを洗浄し、消毒または滅菌を行い保管する。

〈組合せて使用する医療機器〉

本品は、以下の医療機器と組み合わせて使用する。

販売名	認証番号、届出番号
内視鏡送水装置 MDC-125	301AFBZX00028A01
送水チューブ MDC-265	19B2X10001000067

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ・ 取扱説明書を参照し使用前点検を行い、点検の結果、異常があったものは使用しないこと。
- ・ 滅菌水を使用すること。滅菌水以外を使用すると、細菌が繁殖したり、管路が詰まるおそれがある。
- ・ 水量ラベル以上に滅菌水を入れないこと。設置時にこぼれるおそれがある。
- ・ 本品は、内視鏡送水装置のタンクホルダへ設置すること。滅菌水がこぼれるおそれがある。
- ・ 廃棄する場合は、地域の法規制に従って廃棄すること。感染症廃棄物に該当するかについては、使用状態によって判断すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を薬液消毒または滅菌してから保管すること。以下の保管条件を満たす清潔な場所に保管すること。

保管条件

温度：-10℃～60℃

湿度：30%RH～85%RH（但し結露状態を除く）

気圧：70～106kPa（大気圧範囲）

〈有効期間〉

本品は、消耗品（修理不可能）である。滅菌回数20回または使用前の点検の結果、異常が発見された場合は新品と交換すること。

〈使用者による保守点検事項〉

1, 本品の外観に著しい変形が無いことを確認す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： ニスコ株式会社

販売業者： 株式会社モリムラ

電話： 03-5808-9350

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄・消毒・滅菌に関する注意〉

- ・ 本品は、使用毎に取扱説明書に従い洗浄、消毒または滅菌すること。
- ・ オートクレーブ滅菌を行うときは、121℃で滅菌すること。121℃以上で滅菌を行うと送水タンクが溶ける可能性がある。
- ・ オートクレーブ滅菌を行うときは、必ず覆布等で覆うこと。缶内温度の高い部分に触れ送水タンクが溶ける可能性がある。
- ・ 十分に乾燥させてから滅菌を行うこと。水の切れていない部分の滅菌が不完全となる。
- ・ 超音波洗浄及び煮沸消毒は行わないこと。本品が損傷する。
- ・ 洗浄後は、残留している洗浄液を水で洗い流すこと。洗浄液が患者の体内に流れ込むおそれがある。
- ・ エチレンオキサイドガス滅菌後に残留するガスは、人体に有害です。必ずエアレーションを行うこと。

〈洗浄方法〉

- 1) 使用後、本品の外側に付着した汚れをガーゼまたはペーパータオルで拭き取る。
- 2) 本品が入る容器を用意し、本品を洗浄液に浸漬し、柔らかいスポンジ等で洗浄する。
- 3) 清浄水で洗浄液を十分に洗い流す。
- 4) 付着した水分を柔らかい布等で十分に拭き取り乾燥させる。

〈薬液消毒方法及び消毒条件〉

フタラール系薬液へ浸漬する。

- ・ 使用濃度：原液
- ・ 作用時間：5分以上

〈滅菌方法及び滅菌条件〉

1, エチレンオキサイドガス滅菌（EOG）

滅菌条件

ガス濃度	EOG：20% , CO ₂ ：80%
温度	50℃以上
湿度	50%以上
圧力	89kPa
時間	5時間
エアレーション	大気圧12時間以上

2, オートクレーブ滅菌

滅菌条件

機種	真空脱気プリバキューム式(推奨)
缶内温度	121℃
作動時間	20分
乾燥時間	20分

注) 滅菌方法の詳細については取扱説明書を参照すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。