


機械器具(06) 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000
ドレーゲル フルフェイスマスク (ノブスター AAV)


**【形状・構造及び原理等】

1. 外観

AAV タイプ : 窒息防止弁(AAV)、呼吸ポート(EP)ともにあり

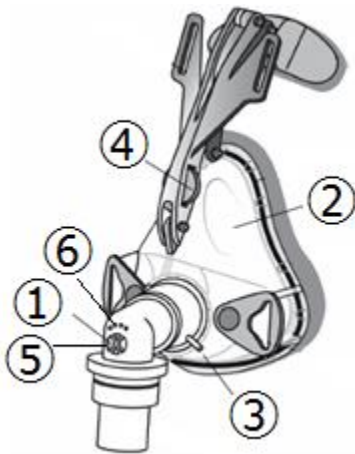

AAV タイプ : 窒息防止弁(AAV)あり、呼吸ポート(EP)なし

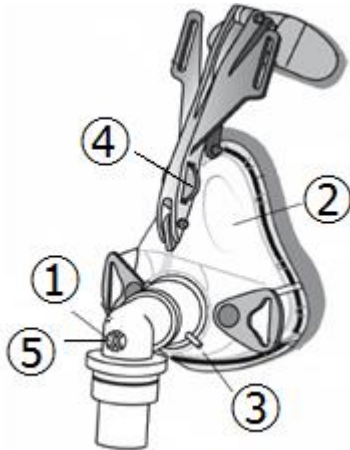

ヘッドバンド外観図



サイズ : S, M, L, XL

番号	各部の名称	番号	各部の名称
①	エルボ	⑤	窒息防止弁
②	マスクシェル	⑥	呼吸ポート
③	圧/O2 ポート	⑦	ヘッドバンド
④	サムホイール		

2. 原理

マスクを患者の鼻、口を覆うように装着し、人工呼吸器からの換気ガスを患者に供給する。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスクをいう。

【使用方法等】

使用中の操作

1. 本品を呼吸回路と接続し、人工呼吸器からガスを供給する。
2. ヘッドバンドの左側または右側のストラップをマスクから外す。
3. マスクを患者頭部に装着した後、ヘッドバンドで固定する。
4. 鼻梁からの空気の漏れがないよう調整する。
サムホイールを回転させ、マスク位置を調整する。
5. 緊急時の取り外しは、以下の手順に従う。下部のストラップのマジックテープを外し、マスクを持ち上げてヘッドバンドとともに取り外す。

使用後の処置

1. クリーニング手順書(取扱説明書)を参照のこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 供給圧や供給フローが不十分であると呼吸回路から呼気ガスが十分に排出されず、呼気ガスを再呼吸する恐れがある。
2. 呼気ガスを排出するための呼吸ポートがあるため、リーク分を補うことが必要な場合がある。
3. ストラップを強く引きすぎると、皮膚が炎症を起こす可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベルの使用期限を参照

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

詳細は、取扱説明書を参照ください。

- 一 汚れや不純物を毎日点検してください。
マスクの内部や外部に汚れ又は不純物が見られる場合は、使用時間に関係なく洗浄又は消毒する必要があります。
- 一 洗浄又は消毒回数が 5 回を超える場合、マスクが損傷する恐れがあります。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： ドレーゲルジャパン株式会社

住所： 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号： 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者： ドレーゲルベルク社

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

製造国： ドイツ連邦共和国