

機械器具 (6) 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000
ドレーゲル クラシックスターNIV 鼻マスク
(クラシックスター プラス NIV鼻マスク)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観


本品は以下の 2 種類がある。

(1) 呼気ポート無し

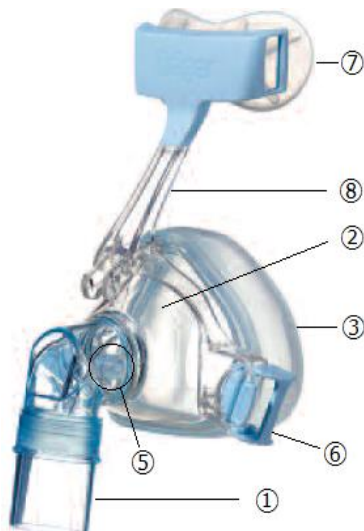

サイズ : S. M. L. XL

(2) 呼気ポート有り

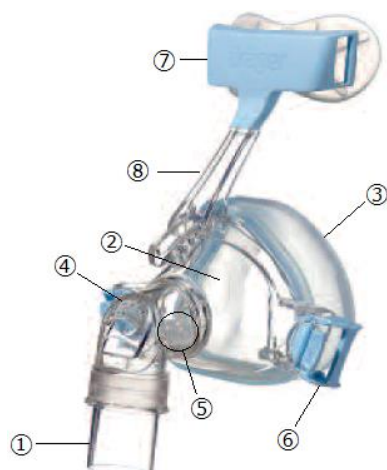

サイズ : S. M. L. XL

(3) ヘッドバンド



番号	各部の名称	番号	各部の名称
①	エルボ	⑥	固定フック
②	マスクシェル	⑦	額パッド
③	クッション	⑧	額サポート
④	呼気ポート	⑨	ヘッドバンド
⑤	圧/O ₂ ポート		

2. 原理

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスクをいう。

3. 原材料

合成樹脂

4. 流量抵抗

50 L / 分 0.07 hPa

100 L / 分 0.28 hPa

【使用目的又は効果】

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスクをいう。マウスピース型のものを含む。

【使用方法等】

使用中の操作

1. 本品を人工呼吸器の呼吸回路と接続し、人工呼吸器からガスを供給する。
2. ヘッドバンドの左側または右側のストラップをマスクから外す。
3. マスクを患者頭部に装着した後、ヘッドバンドで固定する。
4. 鼻梁からの空気の漏れがないよう調整する。
→マスク位置を調整する。
5. 緊急時の取り外しは、以下の手順に従う。
→マスク横のストラップの固定フックを外し、マスクを持ち上げてヘッドバンドとともに取り外す。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 共通
 - ① ストラップを強く引きすぎると、皮膚が炎症を起こす可能性があります。
 - ② 供給圧や供給フローが不十分であると呼吸回路から呼気ガスが十分に排出されず、呼気ガスを再呼吸する恐れがある。
2. タイプ別
呼気ポート有り
呼気ガスを排出するための呼気ポートがあるため、リーク分を補うことが必要な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベルの使用期限を参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： ドレーゲルジャパン株式会社

住所： 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号： 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者： ドレーゲルベルク社

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

製造国： ドイツ連邦共和国