

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止
2. 酸素吸入時は火気厳禁。[火災の危険。]

適用対象(患者)

1. 自発呼吸のない患者に使用禁止。
[低酸素症の恐れがある。]

【使用目的又は効果】


患者の気道に空気・酸素ガスを供給するために用いる。

【使用方法等】

1. 酸素接続チューブを酸素供給源へ接続する。
2. 酸素を供給し、非再呼吸バッグが十分膨らみ、マスクから酸素が出ていることを確認する。各部からの漏れが無いことを確認する。
3. 患者の顔にマスクを装着し、ストラップの長さを調整して固定する。
4. 酸素流量を 10 L/min 以上、15 L/min 以下に調整する。

* 【形状・構造及び原理等】

1. 外観

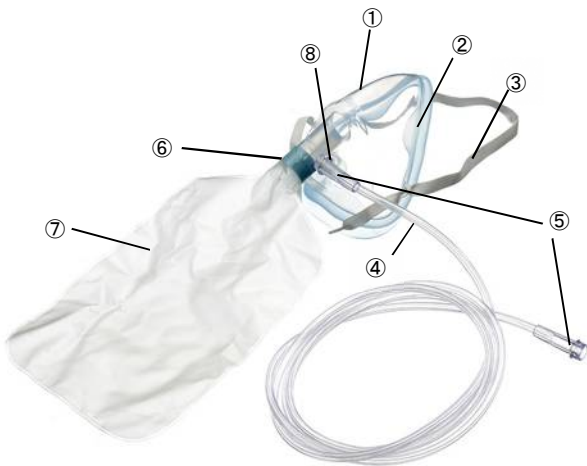

サイズ : S, M/L

番号	各部の名称	番号	各部の名称
①	マスクシェル	⑤	酸素チューブコネクタ
②	マスククッション	⑥	非再呼吸弁
③	ストラップ	⑦	非再呼吸バッグ
④	酸素チューブ	⑧	呼吸弁

2. 原材料

番号	各部の名称	原材料
①	マスクシェル	ポリプロピレン
②	マスククッション	スチレン系エラストマー
③	ストラップ	ポリアミド及びポリウレタン
④	酸素チューブ	ポリ塩化ビニル
⑤	酸素チューブコネクタ	ポリ塩化ビニル
⑥	非再呼吸弁	シリコーンゴム
⑦	非再呼吸バッグ	ポリ塩化ビニル
⑧	呼吸弁	シリコーンゴム

* 【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前に周辺機器と確実に接続する。
2. 酸素接続チューブをルアーロックコネクタに接続しないこと。
酸素接続チューブは、本品を酸素供給源に接続する場合にのみ使用すること。[ガス漏れ、低酸素症の恐れ。]
3. 吸気終末時に、非再呼吸バッグの容量が 3 分の 1 を下回っている場合、使用しないこと。[患者が呼気中の CO₂ を再呼吸する恐れがある。]
4. ストラップを強く引きすぎると、皮膚が炎症を起こす可能性がある。

* 【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベルの使用期限を参照

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ドレーゲルジャパン株式会社

住所: 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号: 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者: ドレーゲルベルク社

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislingner)

製造国: ドイツ連邦共和国