

* 2024 年 04 月改訂 (第 2 版)
2019 年 11 月作成 (第 1 版)

認証番号： 301ABBZX00011000

機械器具 (6) 呼吸補助器
管理医療機器 経鼻用酸素供給カニューレ 35203000

再使用禁止

HI-Flow Star 高流量酸素療法供給カニューレ

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止
2. 酸素吸入時は火気厳禁。[火災の危険。]



適用対象（患者）

1. 自発呼吸のない患者に使用禁止。
[低酸素症の恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

HI-Flow Star 成人用 カニューレ

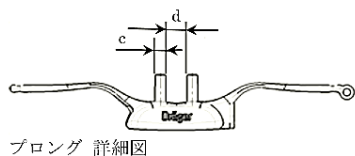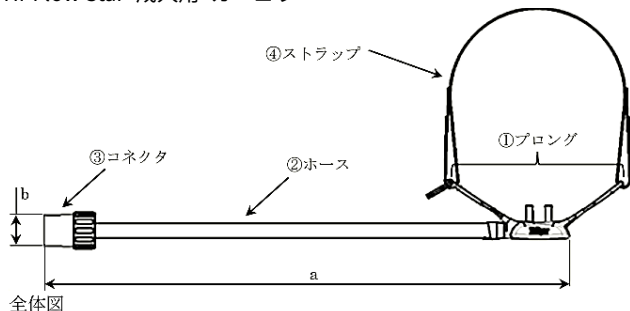

番号	各部の名称
①	プロング
②	ホース
③	コネクタ
④	ストラップ

寸法表

サイズ	長さ a (mm)	長さ b (mm)	長さ c (mm)	長さ d (mm)
S	370	Φ22.6	Φ4.5	9
M	370	Φ22.6	Φ5.0	9
L	370	Φ22.6	Φ7.0	9

2. 原材料

プロング	シリコン
ホース	熱可塑性エラストマー
コネクタ	ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
ストラップ	ポリエーテルサルフォン、ポリアミド(ナイロン)

【使用目的又は効果】

経鼻的に酸素ガスを投与するために用いる。

* 【使用方法等】

1. 測定ゲージを使用して、必要なプロングのサイズを判断する。
プロングが鼻腔の約 50 % のみを覆うようにする。
2. ホースは患者の左右どちらに通してもかまわない。
必要であれば、プロングを外して方向を 180°変える。
3. 準備の整った吸気加熱呼吸回路に、本品を接続する。
4. 人工呼吸器またはブレンダーを起動し、必要なパラメーターを設定する。
5. プロングが加熱および加湿した呼吸ガスを供給しているか確認する。
6. 注意してプロングを鼻に挿入する。ストラップを患者の頭部に掛ける。マジックテープでストラップを調節してフィットさせる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前に周辺機器と確実に接続する。
2. 酸素接続チューブをルアーロックコネクタに接続しないこと。
酸素接続チューブは、本品を酸素供給源に接続する場合にのみ使用すること。[ガス漏れ、低酸素症の恐れ。]

* 【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベルの使用期限を参照

使用期間

14 日を限度に新品へ交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： ドレーゲルジャパン株式会社
住所： 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル
電話番号： 03-6447-7200

設計を行う ドレーゲルベルク社
外国製造業者： Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)
製造国： ドイツ連邦共和国