

再使用禁止


注入ポンプ用チュービングセット (LB 用)

**【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**1. 形状

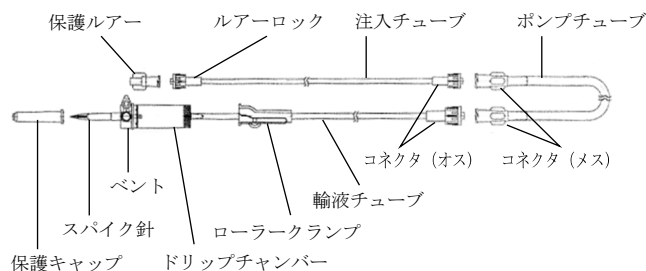

ルアー接合部の強度・気密性：ISO594-1/ISO594-2 に準拠。

**2. 原材料

スパイク針	ポリ塩化ビニル
ベント	ポリプロピレン
ドリップチャンバー	ポリ塩化ビニル
輸液チューブ	ポリ塩化ビニル
ポンプチューブ	
注入チューブ	
コネクタ	ABS 樹脂、ポリ塩化ビニル
保護ルアー	ポリエチレン

ポリ塩化ビニルの可塑剤としてフタル酸ジ・2-エチルヘキシルを使用している。

【使用目的又は効果】

ウロダイナミクス検査において、注入用媒体（生理食塩水等）のラインを延長するために用いるチューブセットである。

**【使用方法等】

本品はラボリー・ウロダイナミクスシステム専用である。他のウロダイナミクス装置に使用しないこと。

1. 使用前の準備

- (1) 包装の破れ及び内部に異物がないことを確認し、開封する。
- (2) 保護キャップをはずし、スパイク針を注入媒体容器に差し込み、チューブ内の空気が完全に排出されるまで注入媒体を流す。
- (3) ローラーランプを閉じ、ポンプチューブの圧縮性のある部分をウロダイナミクス装置のポンプヘッドに装着する。その際、ポンプチューブの輸液チューブ端をポンプヘッドの左側に配置する。
- (4) エアー針を必要とする注入容器の場合は必ずベントをオープンにする。

2. 使用中

- (1) 保護ルアーをはずし、ルアーロックをカテーテルに接続する。
- (2) ローラーランプを開き、ポンプを作動させ、検査を開始する。

3 使用後の処置

- (1) 本品を取り外し、施設の手順に従って廃棄する。
- (2) 周辺機器へ付着した注入媒体を拭き取る。

【使用上の注意】

**1. 重要な基本的注意

適切な注入量に設定すること。特に小児に使用する場合は、充分に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気により悪影響の生じるおそれのない場所に保管すること。
- ・5℃～30℃の温度下で保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 使用期限

本品の包装に記載。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*1. 製造販売業者・製造業者

- ・製造販売業者
エダップテクノメド株式会社
- ・製造業者
Bioteque Corporation Factory II (台湾)

2. お問い合わせ先

エダップテクノメド株式会社 営業部
(Tel) 03-5540-6767
marketing@edaptechnomed.co.jp