

一般医療機器 再使用可能なパルスオキシメータプローブ JMDN 37808000

SpO₂ ケーブル (マシモセンサー用)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
[誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負う恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観(2017002-001)

構造・構成ユニット

1. 本製品は構成の違いによる 5 種類の血酸素飽和度(SpO₂)測定用ケーブルである。

カタログ番号	品名
2017002-001	SpO ₂ ケーブル masimo センサー用ケーブル 3.6m
2017002-002	SpO ₂ ケーブル masimo センサー用 1.2m
2017002-003	SpO ₂ ケーブル masimo センサー用ケーブル 2.4m
2027263-002	マシモ LNCS センサー用ケーブル 3m
2009743-001	マシモ SPO ₂ 延長ケーブル 8ft*

※ マシモ LNOP センサ用

2. 使用環境条件(標準環境)

周囲温度: 5~40℃

相対湿度: 5~95%(結露なきこと)

【使用目的又は効果】


使用目的

小児、又は成人患者の手指、耳、鼻梁、足等の部分に使用し、皮膚を通して光を照射し、動脈組織血中のオキシヘモグロビン、及びデオキシヘモグロビンによって吸収される光量を検知するために用いる用具をいう。
親機で信号が受信され、結果が表示される。


【使用方法等】

使用方法

1. SpO₂ ケーブルの先に付いているセンサ接続部に、指定されたセンサを接続する。

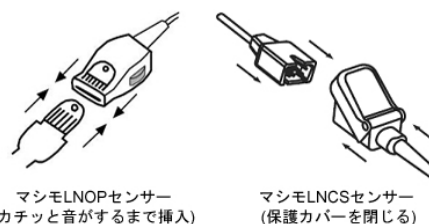


マシモLNOPセンサー
(カチッと音がするまで挿入)

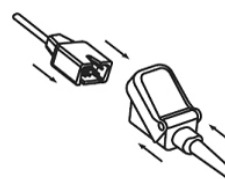

マシモLNCSセンサー
(保護カバーを閉じる)

2. SpO₂ ケーブルのモニタ接続部をモニタに接続する。
3. SpO₂ ケーブルからセンサを取り外す際はカバーを外すか両方のボタンを押して、センサのコネクタをゆっくり抜く。

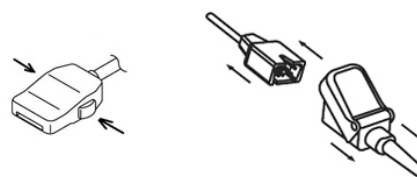

マシモLNOPセンサー

マシモLNCSセンサー

組み合わせて使用する医療機器

本製品は以下の SPO₂ センサと組み合わせて使用することが可能である。

販売名称	承認番号等
マシモ LNCS リューザブルセンサ	13B1X00150CS0059

販売名称	承認番号等
マシモ SET センサ LNOP シリーズ	13B1X10223000006
マシモ SET センサ LNOP DCI/DC-195	13B1X10223000007
マシモ SET センサ LNOP DCSC	13B1X10223000008
マシモ SET センサ LNOP TC-I/TF-I	13B1X10223000009

製造販売業者: マシモジャパン株式会社

【使用上の注意】

重要な基本的注意

本製品は、当社が互換性を保証しているセンサ、及びベッドサイドモニターと組み合わせて使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度: -40~70℃

相対湿度: 5~95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[自己認証(当社データ)による]

(但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用された場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある)

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
 - 製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・ 損傷や摩耗がないこと。
 - (2) 清浄性の確認
 - 清浄な状態であることを確認すること。
 - 1) 70%の消毒用アルコールか、3.4%のグルタルアルデヒド(Cidex(R))でスプレーするか、それで湿らせた脱脂綿で拭くこと。
 - 2) 変色が起こる恐れがあるが、1.6%のフェノール(Sporicidin(R))、殺菌剤(Virex(R))、又は 0.5%の次亜塩素酸ナトリウムの使用も可能である。
 - 3) 使用する前に、完全に乾かすこと。
 - 4) 本製品を滅菌したり、液体に浸さないこと。
 - (3) 機能の確認
 - ・ 製品の正常状態の確認
 - 正常状態・正常動作を確認すること。
 - ・ 異音、異臭がないことを確認すること。
 - (4) 安全機能の確認
 - 全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855
FAX： 042-582-6923

製造業者： ジーイー ヘルスケア インフォメーション
テクノロジーズ インク
(GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.)

国名： アメリカ合衆国

社内部品番号： 5791119