

11L/12L-RS 用マルチ穿刺ホルダ


【警告】

使用方法

本製品のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、ニードルカニューレの絶縁皮膜を損傷しないよう、ニードルカニューレの操作を慎重に行うこと。[電気手術器のニードルカニューレを本製品に挿入する際及び本製品に沿って出し入れを行う際、ニードルカニューレ上の絶縁皮膜を破損させ、破損部周囲の組織に熱傷を引き起こす可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

形状

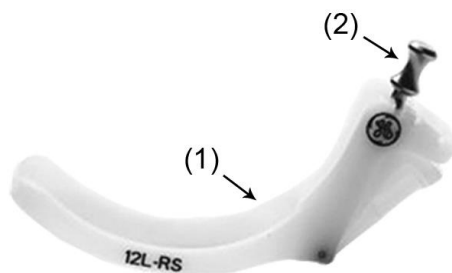

製品の的外観

構造・構成ユニット

- 構成
本製品は、以下より構成される。
(1) 穿刺ホルダ本体
(2) 角度調節用ピン
- 各部の寸法(幅×奥行×高さ)
寸法(mm): 91.4×25.4×48.3

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は超音波プローブ等に穿刺針の刺入方向をガイドするための器具を装着するために用いる機器(ブラケット)である。

【使用方法等】

使用方法

- 超音波画像診断装置のモニタに穿刺ガイドラインを表示する。当該ブラケットのガイドラインであることを確認する。
- 穿刺ターゲット、及び刺入経路を決定する。
- プローブに穿刺ホルダを装着し、角度を設定する。
- プローブ、及び穿刺ホルダを、プローブシースで覆う。
- 穿刺ホルダにガイドを装着する。
- ガイドにスリーブを装着する。
- スキャン、及び穿刺を行う。
- 検査終了後、穿刺ホルダを取り外し、ディスプレイは医療廃棄物として適切に廃棄する。
- プローブ、及びブラケットを十分に洗浄/消毒を行う。

** 組み合わせて使用する医療機器

- 本製品は以下の体表用の超音波診断用プローブ(類型を含む)に装着して使用可能である。

販売名	承認番号等
12L-RS プローブ	218ABBZX00043000
11L-D プローブ	219ABBZX00084000
L4-12t-RS プローブ	225ABBZX00154000
L6-12-RS プローブ	226ABBZX00080000
L12n-SC プローブ	228ABBZX00036000

- 本製品は、以下を装着して使用可能である。
併用可能機器については、超音波画像診断装置の類型やソフトウェアバージョンにより異なるため、使用する超音波診断装置の取扱説明書を参照すること。

販売名	承認番号等
シブコ UP シリーズニードルガイド	231AFBZX00012000
シブコ プローブカバー	230AFBZX00028000

製造販売業者：センチュリーメディカル株式会社

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本機器のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、使用前に必ずニードルカニューレ装着面に破損等がなく、スムーズに可動することを確認の上、慎重に操作すること。
- 心臓付近への穿刺を行う場合、マイクロショックのおそれがあるため、心電図等で患者の状態を観察しながら行うこと。
- 画面上の穿刺ガイドラインは穿刺針の刺入方向の目安として使用し、穿刺針を刺入すると、人体組織の影響や、穿刺針の種類等により、穿刺針が曲がって進むことがある。目標部位と穿刺針先を観察しながら行うこと。
- 穿刺アダプタ本体の取り付けが不適切な場合、穿刺針が意図した経路から外れる可能性がある。穿刺アダプタ本体を超音波診断用プローブに正しく取り付けること。
- プローブカバーやプローブシースを可能な限り使用すること。操作者は感染症を防ぐために適切な処置を続ける必要がある。新しいプローブカバー装着時には、医療スタッフは手袋を交換した後にプローブカバーを装着すること。

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、妊娠の疑いのある者、及び小児へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 消毒後、プローブ、及び穿刺ホルダを専用収納ケースに保管すること。
- 保管、運搬は通常使用される環境の常温・常湿の範囲内で適切に行うこと。

詳細については本製品の取扱説明書を参照すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

****【保守・点検に係る事項】**

使用者による保守点検

1. 本製品をする前には点検を行うこと。
2. 本製品の使用後は洗浄・消毒、必要に応じて滅菌を行うこと（ただし、ガス滅菌・オートクレーブ滅菌は禁止）

洗浄・消毒方法については、本製品の取扱説明書、及び超音波画像診断装置の取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター
電話： 0120-055-919

** 製造業者： シブコ メディカル インストルメンツ
カンパニーインク ディービーイー シブコ
アンド シブコ メディカル ソリューションズ
(CIVCO Medical Instruments Co., Inc. DBA
CIVCO and CIVCO Medical Solutions)

国名： アメリカ合衆国