

成人用 ECG ケーブル (IV)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

MRI 検査を行う際は本製品を検査室に持ち込まないこと。詳細については【使用上の注意】相互作用の項を参照すること。


【形状・構造及び原理等】

形状

(1) ケーブル



(2) リードワイヤー

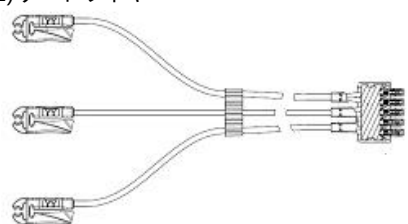

製品の外観

構造・構成ユニット

・ 構成

本装置の構成を以下に示す。

(1) ケーブル (360cm)

(2) リードワイヤー (74cm または 130cm)

作動・動作原理

本製品は超音波画像診断装置の ECG ケーブル接続部に接続し、ECG 電極を通して被検者の心電図信号を取得する。取得した信号は被検者の心電図信号と同期させて超音波画像診断装置のスクリーンを行うために使用する。

【使用目的又は効果】

使用目的

被検者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

1. 装着部位の汚れや水分等を十分に拭き取る。
2. ケーブルを超音波画像診断装置の ECG 接続部に接続する。
3. リードワイヤーをケーブルに接続する。
4. 正しい位置に電極を貼り、リードワイヤーを電極に接続する。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は次の超音波画像診断装置と組み合わせて使用可能である。

販売名	承認番号等
汎用超音波画像診断装置 LOGIQ E9	220ABBZX00177000
汎用超音波画像診断装置 Vivid S70	226ABBZX00155000
汎用超音波画像診断装置 Vivid E9	220ABBZX00253000
汎用超音波画像診断装置 Vivid S6	220ABBZX00015000
汎用超音波画像診断装置 LOGIQ S6	217ABBZX00014000
汎用超音波画像診断装置 Vivid 7	21300BZY00416000
汎用超音波画像診断装置 LOGIQ 7	21300BZZ00082000

汎用超音波画像診断装置 Vivid E95	227ABBZX00035000
汎用超音波画像診断装置 Vivid T8	226ABBZX00081000
汎用超音波画像診断装置 LOGIQ E10	230ABBZX00025000
*汎用超音波画像診断装置 LOGIQ E10s	302ACBZX00003000
**汎用超音波画像診断装置 LOGIQ P9	226ABBZX00119000
**汎用超音波画像診断装置 Vivid iq	228ABBZX00125000

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. リード線は定められた場所に装着すること。
2. 抜き差しを行う場合は、リード線を引っ張らずに集中コネクタ部や、電極装着部を持って行うこと[リード線の断線や接触不良の原因となるため]
3. 当社指定以外の装置に使用しないこと。

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

核磁気共鳴画像診断装置(MRI 装置)環境下では使用しないこと。[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負う恐れがあるため。また、磁気により本製品が吸着されるおそれがあるため]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度: -10~60℃

相対湿度: 10~95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[自己認証(当社データ)による]

(但し、標準的な頻度で使用され、指定の保守点検を行った場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある)

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
 - ・ 外観に異常がないことを確認すること。
 - ・ ケーブル等に、損傷や摩耗がないこと。
 - (2) 清浄性の確認
 - ・ 清浄な状態であることを確認すること。
 - ・ 使用後は酒精綿で清拭して保管すること。
2. 機能の確認
 - ・ 正常状態の確認
 - ・ 正常状態・正常動作を確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター

電話： 0120-055-919

製造業者：

ジーイーメディカルシステムズインフォメーションテクノロジー
ノロジーズ

GE Medical Systems Information Technologies, Inc

国名 アメリカ合衆国

ジーイーヘルスケアフィンランドオーワイ

GE Healthcare Finland Oy

国名 フィンランド共和国

ケアフュージョン フィンランド 320 オーワイ

CareFUision Finland 320 Oy

国名 フィンランド共和国

バイエア メディカル オーワイ

Vyair Medical Oy

国名： フィンランド共和国