

特定保守管理医療機器

S/5 患者モニター (局所ブロックアダプタ)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

1. 本製品はの筋弛緩(NMT)測定時に使用し、NMT 電極、と組み合わせて使用するアダプタである。

| カタログ番号 | 品名 |
|--------|---------------|
| 888417 | NMT レジヨナルアダプタ |

2. 使用環境条件(標準環境)
周囲温度： 10～40℃
相対湿度： 30～85%

【使用目的又は効果】


使用目的

本製品は主に手術室における麻酔中の患者、及び集中治療室、病棟の患者の状態を測定並びに監視する一人用の患者監視モニターである。

【使用方法等】

使用方法

1. リージョナルブロックアダプタに NMT 電極、及びディスプレイ穿刺針とシリンジのセットを取り付ける。
2. NMT センサーケーブルにリージョナルブロックアダプタを差し込む。
3. NMT モジュールのコネクタに NMT センサーケーブルを差し込む。
4. 電極を患者の測定部位に配置する。
5. モジュールのスタートキーを押してモニターを開始する。

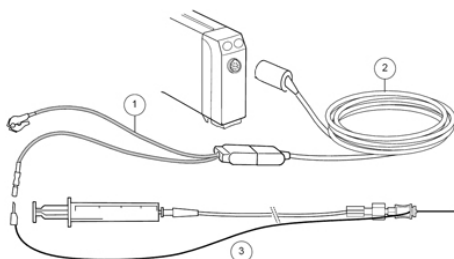

- (1) リージョナルブロックアダプタ
- (2) NMT センサーケーブル
- (3) ディスプレー穿刺針とシリンジ

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 刺激電極を取り扱うときは必ず NMT 測定を停止してから行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 周囲温度： -10～60℃
- 相対湿度： 10～90%(結露なきこと)

使用期間

- 1年[自己認証(当社データによる)]
- 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
 - ・ 製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・ 損傷や摩耗がないこと。
 - (2) 清浄性の確認
 - ・ 清浄な状態であることを確認すること。
 - ・ 次亜塩素酸塩、アセトン、フェノール系、アンモニア系を基とするクリーナーを使用しないこと。
 - 1) 洗浄する場合は以下事項に従い行うこと。
 - ・ 中性洗剤を湿らせた布で、目で見える生体からの分泌物を拭き取ること。
 - ・ 薬剤メーカーの指定する方法で濯ぐこと。
 - 2) 消毒・殺菌する場合は以下事項に従い行うこと。
 - ・ 使用できる消毒薬
エタノール、イソプロピルアルコール、塩素系化合物、グルタルアルデヒドが使用できる。
 - ・ 滅菌する場合は以下事項に従い行うこと。
エチレンオキサイドガス(EOG)による滅菌は、50℃以下の温度で滅菌するか、又は SterradR システムが可能である。EOG ガス滅菌後は、滅菌機器メーカーの指定した手順書に従ってエアレーションを行うこと。
 - 3) 洗浄、消毒、殺菌後は完全に乾燥させること。
- (3) 機能の確認
 - ・ 製品の正常状態の確認
正常状態・正常動作を確認すること。
 - ・ 異音、異臭がないことを確認すること。
- (4) 安全機能の確認
 - 全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： ジーイーヘルスケア フィンランド

オーワイ

(GE Healthcare Finland Oy)

国名： フィンランド

社内部品番号： 5791153

取扱説明書を必ずご参照ください。