


「3LED 光源装置 FL-301」の付属品

フットスイッチ SFJ-1W-2F

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

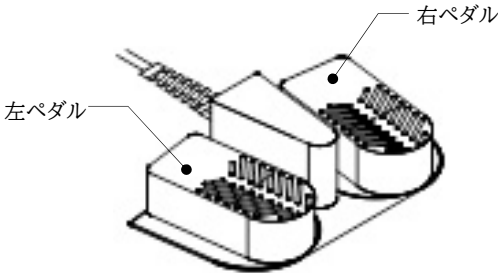

2. 性能及び安全性に関する規格及び寸法

寸法	174(W)×43(H)×95(D) mm (ケーブル引出し部を含まず)
重量	675 g

【使用目的又は効果】

当社指定の内視鏡ライトガイドを接続し、手術野及び体腔内の観察・診断を行うために光を供給することを目的とした、外部電源式内視鏡用光源装置である。

【使用方法等】

- 1) 光源装置本体に、フットスイッチを接続する。
- 2) 右ペダル、左ペダルで光量を調整する。
右ペダル：光量をアップする。
左ペダル：光量をダウンする。
- 3) 光源が消灯時に右ペダルを踏むと光源をオンにする。
光源が最小光量で点灯時に左ペダルを踏むと光源をオフにする。

詳細は光源装置本体の取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本製品を保管する際は、次の事項に注意すること。

1) 保管条件(運搬時を含む)

温度	-10 ～ 50℃
湿度	20 ～ 90%RH(結露なきこと)

- 2) 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け(運搬時を含む)保管すること。
- 3) 傾斜、振動、衝撃を避け(運搬時を含む)、安定した状態で保管すること。また、本製品の上に何も載せないこと。
- 4) 酸素の濃度が極端に高い環境、または、可燃性麻酔ガスを使用する環境に保管しないこと。
- 5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

2. 有効期間

6年 [自己認証(当社データ)による]

但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期点検を実施した場合の年であり、使用状況によっては異なる場合がある。

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃

光源装置本体の取扱説明書を参照すること。

2. 使用者による保守点検(日常点検)事項

〈点検項目〉

項目	内容
外観	外観に異常がないこと。

〈点検頻度〉

使用前毎

3. 業者による保守点検事項

〈点検頻度〉

- ・ 定期点検<1回／年>
- ・ 使用者により以上が発見された時
- ・ 使用中に異常が発生した時

※ 保守部品の保有期間は製造終了後6年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

ファイバーテック株式会社
住所 〒285-0074
千葉県佐倉市西御門 409-1
電話番号 03-5259-7601(連絡先代表番号)

(2) 問い合わせ先

ファイバーテック株式会社 マーケティング本部
電話番号 03-5259-7601(連絡先代表番号)