

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

バリオソフト3

【形状・構造及び原理等】(*)

・形状、型式	オーダーナンバー
スターターセット パラレルバー付	430 0516 0
スターターセット パラレルバー無	430 0738 2
スターターセット ソフト パラレルバー付	430 0561 0
スターターセット SV	430 0738 3
パトリックス パラレルバー付	430 0520 0



パトリックス パラレルバー無 430 0737 0



パトリックス SV 430 0737 4



マトリックス グリーン ソフト 430 0519 0



マトリックス イエロー ノーマル 430 0518 0



マトリックス レッド ハード 430 0517 0



ソフトマトリックス グリーン ソフト 430 0565 0



ソフトマトリックス イエロー ノーマル 430 0564 0

ソフトマトリックス イエロー ノーマル 430 0629 0(**)



ソフトマトリックス レッド ハード 430 0563 0



複印象用マトリックス 430 0737 2



ワックスマトリックスハウジング 430 0521 0



*ユニバーサルパラレルホルダー 360 0115 1



*マトリックストランスファージグ 430 0736 6



*印は医療機器非該当製品だが、セット製品に含まれるため記載してあります。

・材質：樹脂

・外形寸法

パトリックス パラレルバー有 : $\phi 1.8\text{mm}$ $3.1 \times 3.0 \times 6.0/7.0\text{mm}$

パラレルバー部 : $\phi 2.35\text{mm}$ 長さ 20mm

パトリックス パラレルバー無 : $\phi 1.8\text{mm}$ $3.1 \times 3.0 \times 6.0/7.0\text{mm}$

パトリックス SV : $\phi 8.0\text{mm}$ $5.3 \times 3.5 \times 6.0/7.0\text{mm}$

マトリックス各種 : $3.6 \times 3.2 \times 7.0\text{mm}$

複印象用マトリックス : $3.6 \times 3.2 \times 7.0\text{mm}$


ワックスマトリックスハウジング : $4.3 \times 4.0 \times 7.0\text{mm}$

・原理：樹脂製の既製パターンで鋳造し、金属に置き換え、補綴物の維持として使用する。

【使用目的又は効果】(*)

・修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。


【使用方法等】(*)

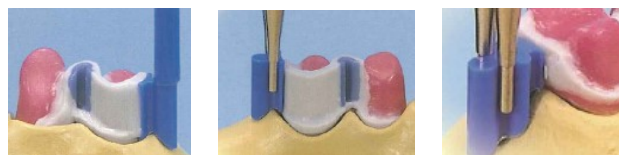


・パトリックスを専用のホルダーもしくはパトリックスパラレルバー付を用いてワックスパターンに付与する。




・パターンの付与が完了したら鋳造、研磨し、複印象用マトリックスを装着してから複印象を採る。(研磨時に維持部の寸法を変えないこと)

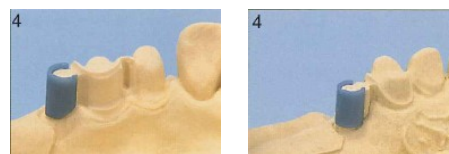

・通法に従い、耐火模型を作製する。

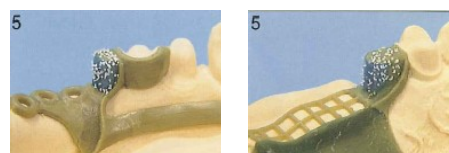

・耐火模型が完成したら、通法に従い金属床のワックスアップ行う。

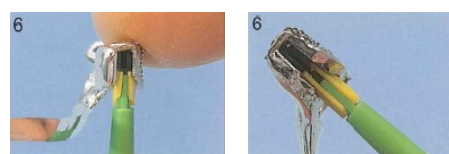

・金属床が完成したら、フレーム内に希望のマトリックスを

挿入し完成。

【使用上の注意】 (*)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・パトリックスパラレルバー付、パラレルバー無を使用する場合は必ずブレーシングアームを付与すること。
- ・本製品はろう型作製以外の用途に使用しないこと。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】 (*)

- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (*)

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

ブレーデント社(ドイツ)

(英名) bredent GmbH & Co. KG