

機械器具(70) 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 JMDN70760000

オーパース インストルメント

【形状・構造及び原理等】(**)


・形状、型式

オーダーナンバー

4 本セット・・・・・・・・・・1165-0000



ワックスブラシ

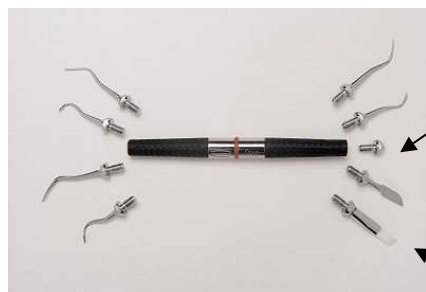

チップ形態

ワックスブラシ

チップ

- ①ビーバーテール 1 個・・・・・・・・・・1165-0001
(右側 上から 1 番目)
- ②ブローブ厚 1 個・・・・・・・・・・1165-0002
(右側 上から 2 番目)
- ③ブローブ薄 1 個・・・・・・・・・・1165-0003
(左側 上から 2 番目)
- ④スプーン大 1 個・・・・・・・・・・1165-0004
(右側 上から 4 番目)
- ⑤スプーン小 1 個・・・・・・・・・・1165-0005
(左側 上から 3 番目)
- ⑥フィッシャー 1 個・・・・・・・・・・1165-0006
(右側 上から 3 番目)
- ⑦ブレード 1 個・・・・・・・・・・1165-0007
(左側 上から 1 番目)
- ⑧ワックスブラシ 1 個・・・・・・・・・・1165-0008
(左側 上から 4 番目)
- ⑨リベット 1 個・・・・・・・・・・1165-0009
(右側 上から 3 番目)
- ハンドル 2 本・・・・・・・・・・1164-0000
(写真下 中央)

・材質

チップ：ステンレス、ワックスブラシ 樹脂製

グリップ本体：ゴム製(*)

・原理：ハンドルに装着されたチップを熱し、ワックスアップ
をするために使用する。ナイフ形状をしたチップはワ
ックス等をカービングするために使用する。

【使用目的又は効果】(**)

・ワックス、石膏、レジン又はセラミック等を築盛あるいは
彫刻形成するために用いる器具をいう。作業を容易にするた
めに、補助的に種々の材料を併用することがある。(*)

【使用方法等】(**)

・チップ部分をバーナー等で加熱しワックスをすくい、盛り
上げて使用する。
・ワックスブラシは削ったワックス等を取り除くために使用
する。
・ナイフ形状をしたチップはカービング等に使用する。

【使用上の注意】(**)

・焼入れされた先端部は精密なので、丁寧に扱い、長時間、
強い炎にあてないこと。(*)
・ワックスブラシ、リベットは加熱しないこと。(*)
・本製品は縁端が鋭いため、使用中に手指などを傷つけない
ように注意すること。(*)
・本製品に熱を加えて使用する場合、火傷などに注意すること。
・本製品を使用した後には汚れをよく拭き取ること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、
管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

レンフェルト社(ドイツ)

(英名) RENFERT GmbH