

2020 年 11 月（第 1 版）

機械器具（38）医療用鉤
管理医療機器 単回使用眼科用鉤（JMDN コード：35314002）

デイスポトリークゲージ クリア

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・本品の使用目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

①タイプ A (11mm/15mm) ②タイプ B(6mm/10mm)

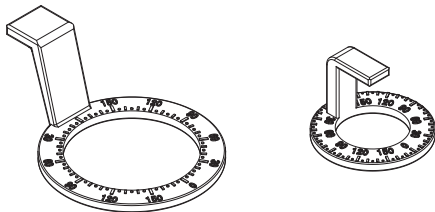

（ ）内はリング部分の内径/外径を示している。

〔材質〕

ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

本品は、眼科手術時の固定等に用いる。

【使用方法等】

- (1) 本品が汚染されないように滅菌包装を開封する。
- (2) ハンドル部分を摘み、眼球中心上に置く。
- (3) ハンドルを使って回旋させ、適切な角度位置に置く。
- (4) 予め決定された乱視角度を本ゲージで見定め、専用の滅菌されたペン等で角膜周辺上にマーキングする。
- (5) マーキング終了後は速やかに眼球上から取り去る。
- (6) 使用後は再使用せず、廃棄する。

【使用上の注意】

- (1) 使用前には、汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検すること。
- (2) 滅菌包装に損傷がある場合は使用しないこと。
- (3) 使用時は、必要以上の負荷をかけないこと。また、本品に損傷を与えないように注意すること。
- (4) 本品の分解、変形、二次加工等、改造を行わないこと。
- (5) 使用後は、医療用廃棄物として適切な方法で廃棄すること。
- (6) 品質の劣化を防ぐ為、滅菌バッグ開封後、すぐに使用すること。
- (7) 期限切れの製品は使用しないこと。
- (8) 先端の鋭利な鉗子等の使用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 水のかからない場所で保管すること。
- (2) 直射日光や湿度の高い環境を避け、室温にて保管すること。
- (3) 清潔で乾燥した場所に、荷重の掛からない状態で保管すること。
- (4) 化学薬品、有機溶剤の保管場所には保管しないこと。
- (5) 空気中に塩分、多量のほこりを含む場所には保管しないこと。
- (6) 振動、衝撃の加わらない場所に保管すること。

〔有効期間〕

滅菌の有効期間は外箱、個別包装に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日佑電子株式会社

新潟県新潟市秋葉区朝日 7 8 番地

電話番号 0250-22-2111（代）