

*2024年6月14日(第7版) 延長チューブ接続コネクタ (NSC-1) 追加
2021年5月1日作成 (改訂第6版) 延長チューブ種類削減

器具器械(51)医療用嘴管及び体液誘導管(滅菌されたものを除く)

一般医療機器 送気送水チューブ コード 70356000

延長チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 使用目的: 送気以外の目的で使用しないでください。
- 本製品使用中の喫煙は絶対に行わないでください。
[酸素は可燃物・発火要因が近くにあると発火の原因となり、
重大な障害を引き起こし、あるいは死亡することがある。]
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1) 材質

本製品は、ポリ塩化ビニル製です。

2) 形状・寸法


本製品の形状及び寸法は、次の通りです。

延長チューブ

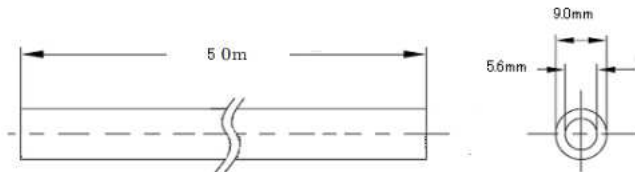

* 3) 延長チューブ接続コネクタ(NSC-1)

・材質: ポリプロピレン

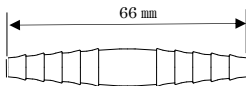

* 延長チューブの接続用コネクタとして使用する。
(同梱又は別販売)

【使用目的又は効果】

本製品は、延長が必要な場合に送気装置に接続してエア等を送る延長用チューブです。送気量に応じて内径の異なる2種類の製品があります。

【使用方法等】

使用方法

- (1) 本品は、一回限りの使用で、再使用禁止です。
- (2) 送気の際に延長が必要な場合は、適切なサイズの本品を選択し、包装から取り出してください。
- (3) 本品を適当な長さにカットする。20m以上で使用しないこと。
- (4) 本品と送気装置に緩みなくしっかりと接続してください。
- * (5) コネクタが必要な場合は NSC-1 又は市販のコネクタで緩みなくしっかりと接続してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 使用目的(送気)以外の目的で使用しないでください。
- (2) 一患者専用。再使用禁止です。
- (3) 本製品を折れ曲げたりねじったりしないでください。破損や閉塞の原因になります。
- (4) 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
- (5) 本製品使用中の喫煙は絶対に行わないでください。
- (6) 包装袋や製品に破損、汚損がある場合は使用しないこと。廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにしてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水のかからないところに保管すること。

- (1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管してください。
- (2) 傾斜、振動、加重、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意してください。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

2. 使用の期限

製造日より起算して3年(当社データによる)

3. 包装

延長チューブ 50m/巻/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社ニッセイエコ
神奈川県藤沢市用田 478-1 ニッセイ新館ビル
TEL 0466-48-7572 FAX 0466-48-8177

2. 製造業者

上海日成塑膠有限公司(中国)

*2024年6月14日(第2版) 延長チューブ接続コネクタ (NSC-1) 追加
2023年2月1日作成

器具器械(51)医療用嘴管及び体液誘導管(滅菌されたものを除く)
一般医療機器 送気送水チューブ コード 70356000

延長チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 使用目的: 送気以外の目的で使用しないでください。
- 本製品使用中の喫煙は絶対に行わないでください。
[酸素は可燃物・発火要因が近くにあると発火の原因となり、重大な障害を引き起こし、あるいは死亡することがある。]
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1) 材質

本製品は、ポリ塩化ビニル製です。

2) 形状・寸法


本製品の形状及び寸法は、次の通りです。

延長チューブ

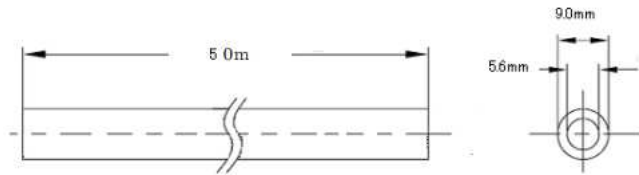

* 3) 延長チューブ接続コネクタ(NSC-1)

・材質: ポリプロピレン

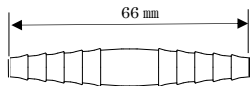

* 延長チューブの接続用コネクタとして使用する。
(同梱又は別販売)

【使用目的又は効果】

本製品は、延長が必要な場合に送気装置に接続してエア等を送る延長用チューブです。送気量に応じて内径の異なる2種類の製品があります。

【使用方法等】

使用方法

- (1) 本品は、一回限りの使用で、再使用禁止です。
- (2) 送気の際に延長が必要な場合は、適切なサイズの本品を選択し、包装から取り出してください。
- (3) 本品を適当な長さにカットする。20m以上で使用しないこと。
- (4) 本品と送気装置に緩みなくしっかりと接続してください。
- * (5) コネクタが必要な場合は NSC-1 又は市販のコネクタで緩みなくしっかりと接続してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 使用目的(送気)以外の目的で使用しないでください。
- (2) 一患者専用。再使用禁止です。
- (3) 本製品を折れ曲げたりねじったりしないでください。破損や閉塞の原因になります。
- (4) 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
- (5) 本製品使用中の喫煙は絶対に行わないでください。
- (6) 包装袋や製品に破損、汚損がある場合は使用しないこと。廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにしてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水のかからないところに保管すること。

- (1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管してください。
- (2) 傾斜、振動、加重、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意してください。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

2. 使用の期限

製造日より起算して3年(当社データによる)

3. 包装

延長チューブ 50m/巻/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社ニッセイエコ
神奈川県藤沢市用田 478-1 ニッセイ新館ビル
TEL 0466-48-7572 FAX 0466-48-8177

2. 製造業者

NISSEI ECO VIETNAM CO., LTD.(ベトナム)