

**2018 年 7 月 10 日作成(第 3 版 3.包装に FT10、AT5 を追加)
 *2017 年 11 月 1 日作成(第 2 版 新規記載要領に基づく改訂)
 2014 年 7 月 5 日作成 (第 1 版)

認証番号：21900BZX00688000

機械器具（6）呼吸補助器
 管理医療機器 経鼻用酸素供給カニューレ （JMDNコード：35203000）
 販売名：ニッセイ酸素鼻孔カニューラ 0X-01

延長チューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 使用目的（酸素療法）以外の目的で使用しないこと。
- 本製品使用中の喫煙は絶対に行わないこと。
 [酸素は可燃物・発火要因が近くにあると発火の原因となり、重大な障害を引き起こし、あるいは死亡することがある。]
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

（１）形状及び各部の名称

各部の名称

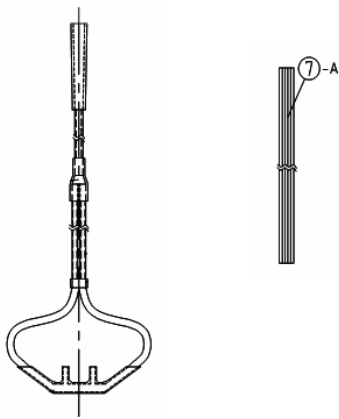

名称	材質	個数	部品番号
延長チューブφ5.6×φ9.0	軟質塩化ビニル	1	⑦-A

（２）組成

ポリ塩化ビニル（バリウム・亜鉛の脂肪酸塩）

（３）作動・動作原理

本品は、酸素供給源と酸素カニューラなどに接続して酸素を供給する。

＊【使用目的又は効果】

本品は、酸素供給源と酸素カニューラなどに接続して酸素を供給する延長チューブである。

＊【使用方法等】

使用方法

- （１）本品を適切な長さにカットする。20m以上で使用しないこと。
- （２）酸素供給源にチューブを接続する。
- （３）酸素カニューラ等を、市販のコネクタなどで緩みなくしっかりと接続する。

＊【使用上の注意】

重要な基本的注意

- （１）使用目的以外の目的で使用しないこと。
- （２）一患者専用。再使用禁止。
- （３）20m以上で使用しないこと。
- （４）本品を折れ曲げたりねじったりしないこと。破損や閉塞の原因になる。
- （５）水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- （６）本製品使用中の喫煙は絶対に行わないこと。
- （７）包装袋や製品に破損、汚損がある場合は使用しないこと。廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。

＊【保管方法及び有効期間等】

＊１．保管方法

- （１）水のかからないところに保管すること。
- （２）気圧、温度、湿度、風通し、日光、紫外線、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- （３）傾斜、振動、加重、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- （４）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

２．使用の期限

外箱の表示を参照（製造日から起算して3年とする）

＊３．包装

品番(部品番号⑦-A)	品名
EST100	延長チューブ 100m／巻／箱
＊＊FT10	延長チューブ 10m／袋×10袋／箱
＊＊AT5	延長チューブ 5m／袋×10袋／箱

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- １．製造販売業者
 株式会社ニッセイエコ
 神奈川県藤沢市用田 478-1 ニッセイ新館ビル
 TEL 0466-48-7572 FAX 0466-48-8177
- ２．外国製造業者
 上海日成塑膠有限公司（中国）