

器 58 整形用機械器具

一般医療機器 脊椎手術用器械 70963001

X ニードル

【警告】

1. 本品を設計された目的以外で使用しないこと。[誤った使用
方法は器具の破損を招く恐れがある。]

2. 日常点検及び使用前点検により、器具が正常に作動するこ
とを確認すること。[全ての金属製手術器具は使用によって
受ける反復的な応力により金属疲労にさらされる。明らか
な疲労が見られる場合には破棄し新しいものと取り替える
こと。]

3. 器具を化学薬品にさらさないこと。[腐食による破損の原因
となる。]


【禁忌・禁止】

1. 本品は使用目的以外への使用、及び日本国内以外での使用
は行わないこと。[不具合・有害事象の原因となる。]

2. 本品の加工、改造、修理等は行わないこと。[不具合・有害
事象の原因となる。]

- 【形状・構造及び原理等】
1. 組成
ステンレス鋼

2. 形状・構造
本品を構成する各製品の形状（代表例）は以下のとおり。
各製品名、製品番号、サイズ等については、本品の表示ラベ
ル又は本体の表示を確認すること。

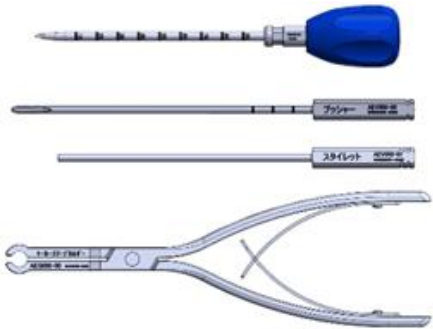

3. 原理
本品を手術手技に沿って用い、脊椎内に下穴を形成する。
本品は、「PSV スパイナルシステム」（承認番号：
22800BZX00356A01）及び「バイオベックスーR」（承認番
号：21300BZZ00274000）を用いた脊椎固定術に使用する再
使用可能な手術器械である。各構成部品は、単品又は組合せて
製造販売される。

【使用目的又は効果】

本品は脊椎固定術に用いる手動式の手術器械であり再使用可能である。

- 【使用方法等】
1. 使用前
1) 本品は未滅菌品のため各施設の洗浄方法に従い、必ず洗
浄を行うこと。洗浄後、付着物がない事を確認し、必ず滅
菌を行い使用すること。本品を滅菌する際、各医療機関に
より検証され確認された滅菌条件により滅菌を行うこと。
当社の推奨する滅菌方法は次のとおり。

<推奨滅菌例>		
滅菌器	温度	時間
高圧蒸気滅菌	121℃	20 分間*

*時間は被滅菌物のすべての部分が規定の温度に達して
から起算する

- 2) 本品に変形、破損がないことを確認すること。

2. 使用方法
1) 本品は、「PSV スパイナルシステム」（承認番号：
22800BZX00356A01）及び「バイオベックスーR」（承認
番号：21300BZZ00274000）を用いた脊椎固定術に使用
する。
2) X ニードルのニードル付グリップとマーカースリーブを
組み合わせた状態で、椎弓に刺入する。X ニードルを回転
させる、又は刺すことにより骨を穿孔する。
3) 先端が後壁を超えるまで刺入した後、マーカースリーブ
を残したまま、ニードル付グリップを抜去する。
4) マーカースリーブにプッシャーを挿入し、先端で椎体内
の海綿骨を押し広げながら下穴を深くする。
5) 下穴形成後はプッシャーを抜去し、PSV スパイナルシス
テム及びバイオベックスーR の手術手技に沿って手術を
行う。

3. 使用後
汚れや血液が付着した状態で放置すると、感染又は腐食の原
因となるため、使用後は速やかに洗浄し、滅菌すること。

【使用上の注意】

<使用注意（次の患者には慎重に適用すること）>
金属アレルギー症

- <重要な基本的注意>
- 1) 手術器具は使用目的に合わせ、繊細かつ精密に作られてい
る。破損・変形あるいは傷をつける等の粗雑な取扱は器具
の寿命を著しく低下させるため、粗雑な取扱は行なわない
こと。

2) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病
感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。

3) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑
われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡するこ
と。

- <不具合・有害事象>
- 本品の使用により次のような不具合及び有害事象がまれに現
れることがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処
置を行うこと。
- 1) 重大な不具合
① 破損、変形、腐食、分解、劣化、変色、屈曲
② 破壊、分解

2) 重大な有害事象
① 血管、神経、軟部組織、筋肉、内臓、骨、若しくは関節
の損傷
② 感染症
③ 金属、異物アレルギー反応
④ 体内遺残

- 【保管方法及び有効期間等】
1. 保管条件
1) 高温多湿を避け、室温で保管すること。
2) 本製品は保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物
への接触や、衝撃を避けるよう注意を払うこと。

- 【保守・点検に係る事項】
- 1) 本品の使用後は、洗浄・すすぎ等の汚染除去を行った後、【使
用方法等】に示す滅菌方法及び条件で滅菌を行うこと。

2) 洗浄中又は洗浄後の本品を放置すると錆び等が発生する恐れ
があるのでむやみに放置しないこと。洗浄後の器具は直ちに
乾燥させ、出来れば乾いた布で再度拭取ること。

3) 洗浄剤は、医療用中性洗剤等の専用の洗剤を用い、適正な濃
度で使用する。

4) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れが
あるので、使用を避けること。やむを得ず使用する際は、本
品の状態を確認し腐食等が発生しないよう洗浄すること。

5) 水道水中に含まれる残留塩素や有機物質がシミや錆発生の原因
となるため、洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水又は脱イ
オン水を使用すること。

6) 洗浄の際、本品の表面等にキズがつかないようにブラシ、スポ
ンジ等を使用し、金属製たわし、磨き粉等の使用は避けるこ
と。

- 7) 隙間部分や中空穴を有する製品はブラシ等で隙間部分や中空穴部分を入念に洗浄し異物を除去し、洗浄後の製品に異物がないことを十分確認すること。
- 8) ブラシ等で血痕等を除去できない場合は隙間部分等を血液溶解剤又は蛋白分解酵素剤等を用いて洗浄後、超音波洗浄機等を用いて洗浄し、滅菌すること。特に隙間部分は異物が残りやすいので、異物が無い事を十分確認すること。
- 9) 可動部を有するものは可動部分を操作しながら洗浄すること。
- 10) 分解可能なもの或いは組み合わせて使用するものは、最小単位まで分解し洗浄すること。
- 11) 合成樹脂が使用されている製品に高圧蒸気滅菌を行う場合、合成樹脂部分が滅菌トレイ又は滅菌用金網容器等の金属部分に直接触れないよう注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

電話：03-5369-1710