

医 04 整形用品
高度管理医療機器 人工骨インプラント 17751000

アパセラム-B5

再使用禁止

【禁忌・禁止】

（使用方法）

- ・再使用禁止

（禁忌症）

- ・次の疾患がある患者には使用しないこと
 - (1) 血液疾患（白血病、血友病、敗血症等）
 - (2) 重症肝機能障害
 - (3) 重症心腎疾患
 - (4) 再発の危険性がある感染性疾患
 - (5) 長期にわたるステロイド剤、抗血液凝固剤等の使用症例
 - (6) 本品の補填に耐えない重度の骨粗鬆症または骨軟化症等の骨疾患

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は気孔率が40～60%の多孔体であり、三点曲げ強度は4MPa以上である。腸骨より自家骨を採取した結果生じた骨欠損に補填する。基本的に母床骨と糸で固定するタイプの製品であり、気孔率は高めで、強度より骨癒合を優先している。本品は補填時に衝撃力（インパクト等で叩き込むタイプではない）は作用しないので、高い強度は必要としない。また、半層用では採骨部の形に合わせて製品を加工する。

2. 原理

本品は高純度の合成ハイドロキシアパタイトからなり、骨組織の主要成分である生体アパタイトと同質の骨補填材である。本品は生体適合性に優れ、骨組織形成の足場を与えることにより、早期から新生骨の形成を促す。また、新生した骨組織と本品は直接結合する。

*【使用目的又は効果】

腸骨より自家骨を採取した結果生じた骨欠損（全層及び半層採取）の補修


*【使用方法等】

（術前）

1. 自家骨採取の方法や規模に応じて、補填に適する製品を準備してください。
2. 使用の前に、滅菌袋及び外箱に表示されている有効期限を確認し、有効期限が過ぎている場合は使用しないでください。
3. 本品が使用できないことによる手術の中断を避けるため、予備を準備してください。

（開梱）

4. 本品は二重に包装された滅菌済み製品です。外袋の内側より滅菌されているので、図のように外袋を開封後、無菌的に内容器を取り出してください。

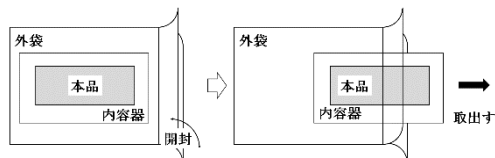

外袋の内側から滅菌されています。

5. 汚染を避けるため、内袋の開封はなるべく補填直前に行ってください。滅菌袋が破れている場合、誤って開封した場合及び使い残した場合は使用しないでください。

（補填）

6. 補填に際し、必要に応じて各種骨バー、ディスクを用いて生理食塩水注水下で局所の骨組織を切削し、本品の初期固定が十分実現できるように工夫してください。
7. 補填すべき骨採取部に本品を補填します（製品毎の主な補填法は下記の通り）。この際、もし必要なら製品のトリミングを行なってください。また、糸孔を有する製品については、必要に応じて縫合糸で骨に固定してください。

全層用 GG、CN、CK

半層用 HH、JJ

※ アルファベットは製品シリーズの呼称です。

8. 創部は完全に縫合閉塞し、術後、必要に応じて抗生物質、消炎剤、鎮痛剤及び止血剤を投与してください。また、免荷、安静等の指導の他、必要な措置を施してください。

（術後）

9. 術後定期的に本品と骨の親和性が十分保たれていることをX線写真等で観察してください。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

特に、JJタイプは薄いので、破損しないよう慎重にお取り扱いください。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 1) 高血圧症、低血圧症
- 2) 喘息
- 3) 糖尿病
- 4) リウマチ熱
- 5) 甲状腺機能亢進症

〔1)～5)副作用発生のリスクが高まるおそれがある〕

- 6) その他担当医師が不適当と認めた症例

2. 不具合・有害事象

2.1 不具合

補填時にインパクト等で必要以上に衝撃を加えると破損することがある。

2.2 有害事象

本品の使用により感染、腫脹、瘻孔形成、露出が生じたとの報告がある。症状が発現した場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

【臨床成績】

アパセラムの臨床使用下で実施された副作用調査（合計860例）は下表のとおりで、不具合の報告はなく、8例（0.93%）に有害事象が認められた。

調査症例数	860
発現症例数	8 (0.93%)
感染	4 (0.47%)
腫脹	2 (0.23%)
瘻孔形成	1 (0.12%)
露出	1 (0.12%)

※ 調査期間：昭和60年5月31日～昭和63年5月30日

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光を避け室温で保管

2. 有効期間

有効期限〔自己認証（当社データ）による〕として滅菌包装及び外箱に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者及び製造業者
HOYA Technosurgical 株式会社
電話：03-5369-1710