


NM ディストラクター

【形状・構造及び原理等】

＜形状、構造＞

- ＊ 本体・アームの取替型と本体・アーム一体型がある。


＜NM ディストラクター本体＞

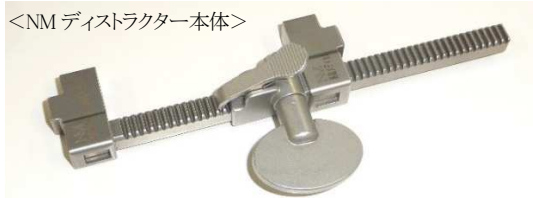

＜NM ディストラクター本体 V2＞



＜NM ディストラクター本体 V3＞

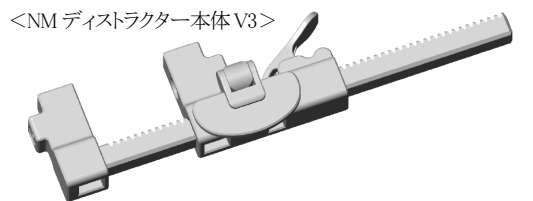


＜ディストラクターアーム＞




＜ディストラクターアーム＞




- ＊ ＜ディストラクターアーム OPEN 用＞

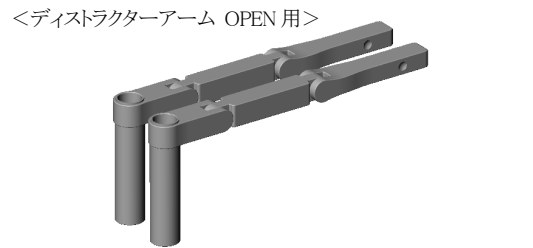


- ＊ ＜ディストラクターアーム PPS 用＞

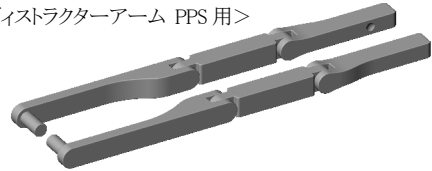

- ＊ ＜mini open 用ディストラクター＞

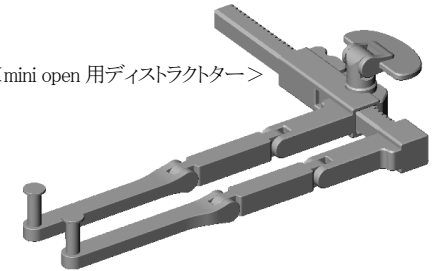

- ＊ ＜ディストラクトシャフト＞

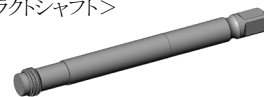

- ＊＊ ＜ディストラクターOPEN 用＞



＜ラミナースプレッダーアーム＞



- ＊＊

製品名
NM ディストラクター本体
NM ディストラクター本体 V2
NM ディストラクター本体 V3
ディストラクターアーム
ディストラクターアーム
ディストラクターアーム
ディストラクターアーム OPEN 用

ディストラクターアーム PPS 用
mini open 用ディストラクター
ディストラクトシャフト
ディストラクターOPEN 用
ラミナースプレッダーアーム

原材料:ステンレス鋼

(ステンレス鋼にはクロム及びニッケルが含まれている。)

＜原理等＞

本体にアームを装着し使用する。(取替型の場合)



＊ ＊ 【使用目的又は効果】

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械。
本品は再使用可能。

【使用方法等】

ペディクルスクリュー挿入後、椎体間操作をするために使用する。
ペディクルスクリューのヘッド部に、アーム先端部を設置し、本体ノブを回すことで、椎体間を広げる。
椎弓根の骨が脆い場合、ラミナースプレッダーを用いる場合もある。
本品は未滅菌のため、使用前に滅菌を行うこと。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) 他のインストゥルメント等硬いものと接触する際は、本品が破損したり、傷ついたりしないよう注意すること。
- (2) 折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の無理な力を加えないこと。
- (3) 滅菌前に本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- (4) 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- (5) 使用後は、付着した血液、体液、組織及び薬品が乾燥して固着しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。
- (6) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因となるので、使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品を、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者又はその疑いのある患者に使用した場合は、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。

＜不具合・有害事象＞

本品の使用により以下の不具合・有害事象が起こり得る。

- (1) 重大な不具合
 - 1) 本品の破損、変形
- (2) 重大な有害事象
 - 1) 血管・神経・組織の損傷
 - 2) 感染
 - 3) 塞栓(脂肪、血液等)
 - 4) 骨折
 - 5) 過敏症
 - 6) 体内遺残

＜高齢者への適用＞

高齢者は骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより、骨折等生じる可能性があるので慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- (1) 高温、多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- (1) 本品使用前に、キズ、折れ、曲がり、錆等の不具合がないか、及び可動部がスムーズに動作するかを点検すること。
- (2) 本品使用後は、直ちに血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のため、洗浄・滅菌処理を行うこと。
- (3) 汚染除去に用いる洗剤は、中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- (4) 強アルカリ・強酸性洗剤は器具を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
- (5) 磨き粉や金属タワシで器具の表面を磨かないこと。器具表面に擦過傷を生じ、錆や腐食が発生する恐れがある。
- (6) 器具に付着した洗剤・消毒剤等は浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
- (7) 洗浄後は腐食防止のために、直ちに乾燥させること。

- (8) 下記の滅菌条件が推奨される。

滅菌方法:高圧蒸気法

滅菌条件:121℃ 15 分間

126℃ 10 分間

134℃ 3 分間

＜業者による保守点検事項＞

本品使用前に、キズ、折れ、曲がり、錆等の不具合がないこと、及び組合せ操作、可動部がスムーズに動作することを点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

西島メディカル株式会社

電話 :0561-37-1222