

医療用品 06 視力表及び色盲検査表
 一般医療機器 視力表：16800000
 日医・12212 試視力表 パネル式 5m

【警告】


- ◆水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないこと。
 - ・機器の故障の原因となります。
- ◆濡れた手で使用しないこと。
 - ・機器の故障の原因となります。
- ◆化学薬品の保管場所やガスの発生する場所で使用しないこと。
- ◆分解・改造は行わないこと。
 - ・思わぬ事故や故障の原因となります。
- ◆機器をしばらく使用しなかった場合は、使用前に必ず【保守・点検に関する事項】を読み、確認してから使用すること。
- ◆検査目的以外では使用しないこと。
 - ・思わぬ事故や故障の原因となります。
- ◆本品を使用する前には安全にご使用いただくため、全般にわたって、破損・欠損やその他異常がないことを点検し確認してから使用すること。

【禁忌・禁止】

- ◆全ての操作において無理な力を加えたり、急激な操作をしないこと。
 - ・事故・故障および破損の原因になります。
- ◆周りの人や機器に十分注意して操作すること。
 - ・事故・故障および破損の原因になります。
- ◆アルコール・シンナー等の溶剤を含んだ布で機器を拭かないでください。
 - ・機器の脆化を早めます。
- ◆落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないこと。
 - ・破損し飛散した場合、ケガの原因となります。

【使用目的・効能又は効果】
 視力検査に用いる。

【形状・構造及び原理】

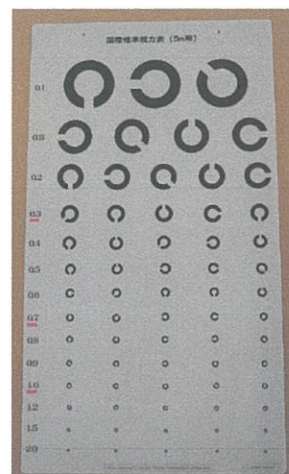

1. 構成
 概要

本視力表は国際標準に基づいた視標（ランドルト環）が印刷されたもので、パネル式であり、5m 用である。

2. 体に一時的に接触する部分の組成
 なし

3. 性能

使用環境	相対湿度：30～80% 室温：10～40℃
------	--------------------------

4. 寸法

本体
 縦 650×幅 360 単位：mm
 厚さ：0.5mm
 重さ：180 g 誤差±5%

【品目仕様等】

主な仕様
 ランドルト氏環

視力値 0.1 (3 個)
 0.15 (4 個)
 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
 1.2 1.5 2.0 (各 5 個)
 視標方向 上下左右 斜め上下左右
 検査距離 5m

【操作方法又は使用方法等】

準備と使用

1. 本品を平らなボード又は、壁に垂直に貼り付けてください。その際、視力表を掲げる高さはその視標 1.0 を被験者の目の高さに貼ること。

2. 被験者を立たせる位置は、視力表から正確に 5 メートルの距離とし、これを床上に明示すること。
3. 視力表の照度の基準は、おおむね 300 ルクスから 700 ルクスとすること。
4. 検査は、右眼から始めること。まず、両眼を開かせたまま遮眼し、右眼で目を細めることなく視力表の視標を見させ、同一視力の視標 3 個のうち 2 個が正しく判定できれば、その視力を 1.0 以上、1.0 未満 0.7 以上、0.7 未満 0.3 以上、0.3 未満の区分を用いて判定してください。検査に適切なランドル環を示唆して、検査を行う。(被験者には、遮眼子を使用して左右の眼の検査を行う。)

【使用上の注意事項】

(一般的な注意事項)

1. 試視力表を貼付するときは、次の事項に注意すること。
 - 1) 水のかからない場所に設置すること。
 - 2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - 3) 本品を平らなボード又は、壁に垂直に貼り付けること。
2. 使用環境
 - 1) 温度 10℃～40℃
 - 2) 湿度 30%～80%

【貯蔵・保管及び使用期間等】

1. 貯蔵方法は、使用上の注意を参照のこと。
2. 有効期間(耐用期間)は、正規の保守点検を行った場合に限り 3 年間です。
3. 環境条件
 - 1) 温度 -15℃～50℃
 - 2) 湿度 15%～80% (結露なきこと)
4. 保管場所については次の事項に注意すること。
 - 1) 水のかからない場所に保管すること。
気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。

(製造販売業者)

株式会社日本医療器研究所 製造部
埼玉県八潮市二丁目 1007 番地
TEL (048) 994-3221
FAX (048) 995-7335

(製造業者)

株式会社日本医療器研究所 製造部
埼玉県八潮市二丁目 1007 番地
TEL (048) 994-3221
FAX (048) 995-7335