

器 01 手術台及び治療台  
一般医療機器 汎用電動式手術台 36867020（JMDNコード）

【 手術台 WX シリーズ 】

特定保守管理医療機器

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

①X4-4



-寸法

テーブルトップ: 610 x 1,980 mm

全体: 610 x 2,116 mm

-トレンデレンブルグ: ~19°（上）~19°（下）

-横チルト: 19°（左）~19°（右）

-縦方向移動: 0mm~200mm（±20mm）

-撮像エリア 1,328 mm

-重量: 250kg（±10kg）

-患者の耐荷重: 227kg

②X5-4



-寸法:

マットレス: 560 x 2200 mm

テーブル全体(ハンドル含む): 760 x 2355 x

810~1160(mm) 760 x 2355 x 810~1160(mm)

-トレンデレンブルグ: 19°（上）~19°（下）±5

-横方向: 19°（左）~19°（右）±5

-縦方向(X モーション): 0mm~200mm（±20mm）

-重量: 240kg（±10kg）

-患者耐荷重: 227kg

2. 電氣的定格

①X4-4

-電源: 100~240v, 50/60hz

-消費電力: 250W

②X5-4

-電源: 100~240v, 50/60hz

-消費電力: 200W

3. 原理

内部電源または商用電源により内蔵する電動油圧ユニット及びバルブユニットをコントロールユニットで駆動し、手術に適した様々な患者のポジションを可能にする。

【使用目的又は効果】

本製品は、手術が必要な部位の大部分に適応するように改良された完全移動型手術台（汎用）である。


【使用方法等】

-電源コードを認可された電圧で接続する。

-キャスターをロックする


-テーブルを最も低い位置にセットし、テーブルの中央に患者を移乗させる。

-緊急ボタン: 緊急時にテーブルをシャットダウン

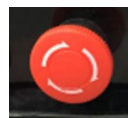

押すと 電源オフ / 上 電源オン


-フットペダルの使い方

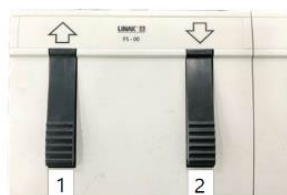

1 アップ

2 ダウン

ハンドコントローラーの使い方

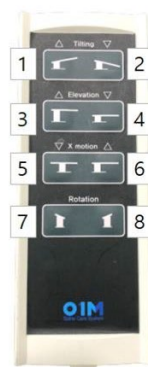

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | トレンデレンブルグ      |
| 2 | リバース・トレンデレンブルグ |
| 3 | ハイトアップ         |
| 4 | ハイトダウン         |
| 5 | 後方への縦方向の動き     |
| 6 | 縦方向の前進         |
| 7 | 横チルト（左上）       |
| 8 | 横チルト（右上）       |

【保管方法及び有効期間等】

-テーブルを水、ガス、化学薬品から遠ざけてください。

-温度、湿度、ほこりなどの影響を受ける場所に置かないでください。

-振動や衝撃に注意してください。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後は元の位置に戻してください。
- テーブルを改造しないでください。
- マットレスは 50～70℃のクリーナーでスポンジと柔らかいブラシで洗浄してください。
- テーブルを使用しない時は、滅菌布で覆い、コンセントを抜いてください。
- 定期的な点検とメンテナンスを行ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社  
住所：埼玉県川口市大字東本郷118-1  
電話番号：048-234-8291

製造業者

名称：ヨン イル ム カンパニー リミテッド  
YOUNG I L M Co. , LTD.  
国名：大韓民国