

2024 年 2 月作成（初版）

医療用品 05 副木
一般医療機器 手・指用副木 JMDN コード（16210000）

AZARS コイルブレイス

【禁忌・禁止】

本製品を装着したままで磁気共鳴診断装置（MRI 装置）を使用しないこと。

[発熱しやけどをするおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 構造

本品はステンレス・ABS 樹脂で構成され、S・M・L の 3 種類のサイズがあります。

2. 種類・寸法

種類	手指の長さ（mm）
S	40～65
M	65～80
L	80～

* 上記表の寸法はあくまでも目安となります。

3. 原理

各ストラップは手指の周径の形状に合わせて調節が可能であり、装着することができます。


【使用目的又は効果】

本品は、損傷した手指を固定するために用いる器具である。

【使用方法等】

* 製品出荷時は②となっております。

ストラップを外した際には①からご参照下さい。

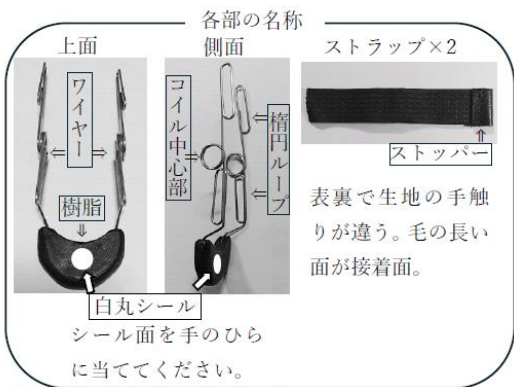

①



A のストラップは接着面(毛の長い面)を下に、B は接着面を上にして、楕円ループに通しストッパーまで引っ張る。

②



指を通しやすいように、A のストラップは凹、B のストラップは凸にする。

③




A のストラップは抜けないように仮留めする。

④



樹脂が手のひらの指の根元に当たるようにし、A、B のストラップの空間に指を通す。(右手の例)

⑤

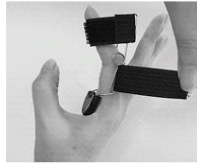

B のストラップを引っ張り、ワイヤーが指側面の中央に来るように調整する。

⑥



B のストラップを留める。コイル中心部は第 2 関節(近位指節間関節)に添うようにする。

⑦



仮留めした A のストラップを引っ張り、適度な矯正力になるように調整して留める。
完成(側面)

⑧



完成(掌側) (背側)
A、B のストラップを整える。

* 装着時の注意点

本製品は、長時間（2 時間以上）装着することで効果が期待されます。

矯正力が強すぎると痛みが生じる場合がございますので A のストラップで調整して下さい。

また、痛み等が生じた場合には、使用を中止して必ず医師等に相談して下さい。

【使用上の注意】

- ① 着用の際、発疹・異常な痛み・むくみ・しびれ等、異常を感じた場合、使用を中止し医師等に相談して下さい。
- ② 着用部位に傷や発疹等、異常がある場合には使用しないで下さい。
- ③ 末梢血行障害、感覚障害がある方は使用しないで下さい。
- ④ 医療機関で治療中の方は、必ず医師等に相談してから装着して下さい。

【保管方法及び有効期限等】

- ① 火気・熱源には近づけないで下さい。
- ② 直射日光・高温多湿になる場所を避け保管して下さい。
- ③ 製品の上に物を置いたり、強い外力がかからないように注意して下さい。型崩れや破損の原因になります。
- ④ 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管をして下さい。

【保守・点検に係る事項】

- ① 水またはぬるま湯を使用し、やわらかいスポンジを用いて、台所用中性洗剤で洗うことができます。
- ② 洗浄後の水分は、自然乾燥又は布で拭き取って下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：アドバンスジャパン株式会社
住 所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電 話：048-234-8291

製 造 業 者：株式会社 SinasSP

<<製品についてのお問い合わせ>>

総 販 売 元：AZARS

電 話：03-6826-2157

平日 10：00～17：00

メールアドレス：meg.o@allazars.com