

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001（JMDN コード）

活き活きラボ一般医療機器ウェア

【禁忌・禁止】


- ・自分自身で脱着することができない方〔何らかの症状が発生した場合にそれを悪化させる危険性が高いため〕
- ・湿疹・かぶれ・傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- ・本製品の原材料に対してアレルギーのある方〔かゆみ、発疹、赤み、かぶれ等のアレルギー症状を引き起こすおそれがあるため〕

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

衣類形状の医療機器であり、上半身用（上腕部被覆）・下半身用（大腿部被覆）の種類がある。

※サイズ寸法（単位: c m / * は寸法差 ±1.0cm）
紳士長袖丸首(ルーム) 婦人長袖丸首(ルーム)

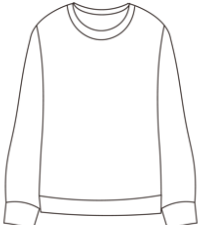


	M	L	LL
チェスト	88～96	96～104	104～112
身丈*	63.5	66.5	69.5
袖丈*	60.0	62.0	64.0

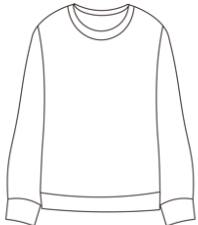


	M	L	LL
バスト	79～87	86～94	93～101
身丈*	57.5	59.5	59.5
袖丈*	45.0	47.5	48.0
身長	154～162		

紳士ロングパンツ(ルーム)

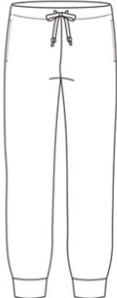

	M	L	LL
ウエスト	76～84	84～64	94～104
股下*	67.0	68.0	69.0

婦人ロングパンツ(ルーム)

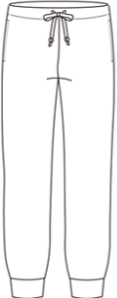

	M	L	LL
ウエスト	64～70	69～77	77～85
股下*	68.0	70.0	72.0

婦人クルーネック長袖



	S	M	L	LL
バスト	72～80	79～87	86～94	93～101
身丈*	58.0	60.0	62.0	64.0
袖丈*	50.0	51.0	52.0	53.0

婦人ラウンドネック長袖



	S	M	L	LL
バスト	72～80	79～87	86～94	93～101
身丈*	58.0	60.0	62.0	64.0
袖丈*	50.0	51.0	52.0	53.0

婦人くるぶし丈ボトム

*マチあり



	S	M	L	LL
ヒップ	82～90	87～95	92～100	97～105
股下*	59.0	60.0	61.0	61.0

婦人レギンス



	M	L	LL
ヒップ	87～95	92～100	97～105
股下*	63.0	64.0	65.0

紳士長袖V首



	M	L	LL
チェスト	88～96	96～104	104～112
身丈*	69.0	72.0	75.0
袖丈*	57.0	58.0	59.0

紳士長袖丸首



	M	L	LL
チェスト	88～96	96～104	104～112
身丈*	69.0	72.0	75.0
袖丈*	57.0	58.0	59.0

ご使用の前に必ずこの文章をお読みください。

紳士ロングタイツ



	M	L	LL
ウエスト	76~84	84~94	94~104
股下*	67.0	69.0	71.0

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させる加工が施されており、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線領域の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【使用方法等】

本品は再使用可能である。

- 衣類として着用する。
- 素肌に着用する。

【使用上の注意】

- ① 持病や治療中の疾患がある方は、使用前に医師へ相談してください。
- ② 家庭洗濯時の衣類乾燥機の使用を避け、形を整えて干してください。
- ③ 色物は色落ちすることがありますので白物との同時洗濯や、水に長時間つけ置きすることは避けてください。
- ④ 表面の毛羽は燃えやすいので、コンロやストーブなどの火元に近づく場合は、十分注意してください。
- ⑤ 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行ってください。
- ⑥ 改造、加工または修理はしないでください。

- ⑦ 本品に破損がないことを確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- ② 耐用期間 2年

【取り扱い上の注意】

本品は繰り返し使用可能ですが、素材の湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【包装】1枚/1袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社
住 所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1

<https://f-adj.co.jp>

製 造 業 者：
ジュウチェンユウシュンガーメンツカンパニーリミテッド
ZHUCHENG YUSHUN GARMENTS CO.,LTD.

国 名：中国

販 売 会 社：しまむら株式会社

住 所：埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1-602-1

【お問い合わせ先】

電 話 番 号：0120-542543

受 付 時 間：10時～17時

土、日、祝日、年末年始、夏季など特別休暇除く

ご使用の前に必ずこの文章をお読みください。