

2026年7月作成（第3版）

ご使用前に必ずこの文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

A

医療用品04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

届出番号 11B1X10025687804

【セリアント ウェア】


【禁忌・禁止】

- 自分自身で脱着することができない方は着用しないでください。[何らかの症状が発生した場合にそれを悪化させる危険性が高いため]
- 本製品に対するアレルギーを持つ方は着用しないでください。[アレルギー症状を引き起こす危険性が高いため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

衣類形状の医療機器であり、上半身用(上腕部被覆)・下半身用(大腿部被覆)の種類があって、以下のような形状を例として示す。

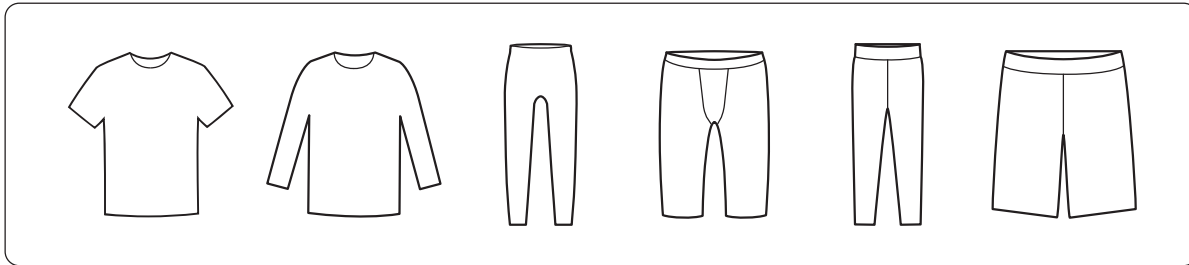

2. 原理

本製品は、生地には鉱物等による特殊な加工が施されており、一定程度の遠赤外線を輻射することによって、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行う。

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の器具をいう。生地には鉱物等による特殊な加工が施されており、一定程度の遠赤外線を輻射する。上半身用及び下半身用があり、それぞれ少なくとも上腕部および大腿部を被覆する。

【使用方法等】

- 本製品は日常活動時および睡眠時のいずれの状態でも着用することができる。
- 本製品は継続して着用することにより症状改善が期待できる。
- 効果にばらつきや個人差があるため、継続して着用することが望ましい。
- 睡眠時の着用については、覚醒まで約6～8時間の着用で発汗作用が高まることもあるため、睡眠前後の水分補給を行うこと。
- 本製品は再使用可能です。
- 衣類として直接肌に着用してください。

【使用上の注意】

- 着用中に身体に何らかの異常(かゆみ、かぶれなど)を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品に、破損(ほつれ、破れ等)がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は使用しないでください。
- 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行ってください。
- 本製品の形状を変えたりするなど、加工、修理を行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、多湿の環境を避けて保管すること。
- 耐用期間2年。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アドバンスジャパン株式会社
埼玉県川口市大字東本郷118-1
電話:048-234-8291

製造業者

ユウリインターナショナル
You Li International(カンボジア)
チューションチャイナテックスヘンリーアパレルマニュファクチャリング
Zhucheng Chinatex HenryApparel ManufacturingCo.,Ltd.
(中国)

【販売業者】

商品のお問い合わせ先

イオン株式会社
〒261-8515
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
電話:0120-28-4196(10-17時:日曜日は除く)