

* 2025 年 9 月作成（第二版）
2025 年 9 月作成（第一版）

届出番号 11B1X10025729504

医療用品 05 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000

メディカル巻き爪クリップ

【警告】

糖尿病と診断された方は、医師にご相談ください。
(糖尿病と診断された患者に本品を使用する場合は、慎重に局所管理をすること。)[重篤な有害事象が発現する恐れがある。]


【禁忌・禁止】

以下の症状、疾患をお持ちの方[重篤な有害事象が発現する恐れがある為]
・重篤な糖尿病や重度の血行障害のある方
・足、手指の爪に感染症の症状または皮膚疾患がある方[症状を悪化させるおそれがある]
・本品の材料に過敏症またはアレルギーのある方。
・爪が極度に薄い方。[爪が割れる可能性がある]

* 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

両端にフックがあり、ばね性を有するステンレス材を使用したクリップ型の形状。

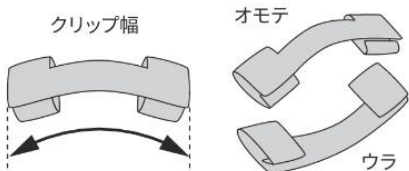

サイズ	クリップ幅
SS	12.5 mm
S	14.5 mm
M	16.5 mm
L	18.5 mm

2. 原理

本品を湾曲した爪に装着することにより痛みを軽減する。

3. 原材料

ステンレス合金

【使用目的又は効果】

本品を足指の巻き爪や変形爪に装着し、痛みの軽減や爪の形状の改善を目的とする器具である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 爪の大きさや形に合わせて、適切なサイズの本品を選ぶ。
- 爪が十分に伸びており（目安：2～3 mm程度）、装着できる状態であることを確認したうえで、装着部位を清潔にし、よく乾燥させる。
- 巻き爪となっている爪の両端に、クリップのフックを片側ずつゆっくりと差し込む。
- クリップが爪に確実に固定されていることを確認する。
- クリップの脱落を防ぐために必要に応じてテープで固定をする。その際、テープは爪の上から軽く貼り付けるようにし、強く巻き付けたり指全体を覆わないこと。

2. 使用方法に関連する注意事項

- 爪の巻き込みが強い場合は、左右どちらか片側に寄せて装着する。
- 爪が厚い場合は、やすり等で薄く整えてから使用する。
- 爪が短くフックが掛からない場合は、十分に伸びてから使用する。
- テープが濡れたり湿った場合は、新しいものに交換する。
- 使用を中止すると、改善した爪が再び巻き爪の状態に戻ることがある。
- 装着したまま靴下やストッキングを使用すると、生地を傷めることがあるので注意する。
- 取り外したクリップを再度使用する場合は、本項の使用方法に従って再装着すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品に強い衝撃や変形を加えないでください。
- 2) テープ等を強く巻き付けたり、指全体を覆わないようにしてください。
- 3) 装着中はクリップを圧迫する靴は避けてください。
- 4) 運動時・サウナ・入浴・温泉等に入る時は、クリップを取り外してください。
- 5) フックが破損した本品は使用を中止し、使用をしないでください。
- 6) 巻き爪の状態や使用条件により、本品の使用可能期間は異なる。爪の状態を観察し、適宜新しいものに交換すること。
- 7) 下記の異常がみられた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師等に相談すること。
 - ・使用中に痛み・かゆみ・刺激感・かぶれなどが発生した場合
 - ・入浴後など、爪が柔らかくなって矯正力が強まり、患部に違和感を覚えた場合

【保管方法及び有効期限等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アドバンスジャパン株式会社

埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号：048-234-8291

製造業者

株式会社 SinasSP

販売元

加藤貿易株式会社

東京都中央区新川 1-3-21

製品についてのお問い合わせ

お客様相談室：0120-804-020