

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001（JMDN コード）

LIFELEX リカバリーウェア

【禁忌・禁止】

- ・本製品の素材に対してアレルギーのある方。[アレルギー症状を引き起こす危険性が高いため]
- ・自分自身で着脱することができない方。[何らかの症状が発生した場合にそれを悪化させる可能性が高いため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

衣類形状の医療機器であり、上半身用（上腕部被覆）・下半身用（大腿部被覆）の種類がある。

（単位 cm/公差±5%）

1) 半袖 T シャツ



	S	M	L	LL	3L
身丈	67	69	71	74	77
身巾	51	54	57	61	65
袖丈	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5

2) ハーフパンツ




	S	M	L	LL	3L
ウエスト	68	72	80	88	96
ヒップ	101	106	111	117	123
股下	23	24	25	26	27

3) 長袖 T シャツ



	S	M	L	LL	3L
身丈	67	69	71	74	77
身巾	51	54	57	61	65
袖丈	58	59	60	61	62

4) ロングパンツ

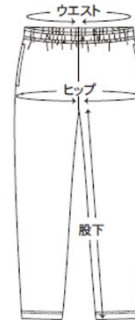

	S	M	L	LL	3L
ウエスト	68	72	80	88	96
ヒップ	101	106	111	117	123
股下	70	71	72	73	74

2. 原理

本製品は、生地には特殊な加工を施し一定程度の遠赤外線を輻射する素材を使用した製品であり、着用することで遠赤外線による血行促進効果をもたらす。

【使用目的又は効果】

- ・血行促進
- ・疲労回復
- ・筋肉のコリ、ハリの緩和
- ・筋肉の疲れを軽減

【使用方法等】

- ・使用前に、本製品に破れ、ほつれその他の破損がないことを確認する。
- ・適切なサイズを選定する。
- ・本製品は再使用可能である。
- ・本製品は素肌に直接着用すること。

【使用上の注意】

- ・着用中にかゆみ、かぶれ、痛みその他の異常を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- ・治療中の方、妊娠中又は出産直後の方、血行障害又は知覚障害のある方、その他健康状態に不安がある方は、使用前に医師に相談すること。
- ・本製品の改造、加工又は修理はしないこと。
- ・火気又は高温となる物の近くで使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光、水濡れ、高温及び多湿を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
- ・ 耐用期間 2 年

【取扱い上の注意】

- ・ 洗濯する際は洗濯絵表示に従って行い、形を整えて直ちに干すこと。
- ・ 色落ち又は色移りする場合があるため、淡色品又は他の洗濯物と分けて洗うこと。
- ・ 長時間のつけ置き、濡れた状態での放置又は重ね置きを避けること。
- ・ タンブラー乾燥を行わないこと。
- ・ アイロンの使用は避けること。
- ・ 湿気や日光（紫外線）の影響又は長期使用による経年劣化により、素材に伸びが生じる場合がある。
- ・ 無蛍光洗剤をご使用ください。

【包装】

1 枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社

住 所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1

<https://f-adj.co.jp>

製 造 業 者：

- ・ Shan Dong Xinfexiang Tourist Products Co.,Ltd.
サントンキンビショウツーリストプロダクツ （中国）
- ・ Rizhao Fuhe Knitting Co.,Ltd.
ニッショウフクワニッテンク （中国）
- ・ Zhucheng Hefeng Clothing Co.,Ltd
ショジヨウシコウホウクロージンク （中国）

[販売元及びお問い合わせ先]

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原 2 丁目 2 番 17 号

電話番号：0120-200-875

平日 9 時～17 時 土日祝は休止