

機械器具 32 医療用吸引器

管理医療機器 歯科用吸引装置 34859000 (JMDNコード)

【 口腔外バキューム Calmot 】

【警告】


- ・治療の目的以外には使用しないこと。
- ・患者が機器に触れたり、各操作スイッチなどに触れたりしないように、常に患者から目を離さないこと。
- ・患者及び使用者の手、指、身体の一部を機器の可動部や周辺に近寄せないこと。

【禁忌・禁止】

- ・エアータービン・マイクロモーター使用時の切削粉塵、および浮遊粉塵以外は吸引させない。
- ・チタン及び発火性のある金属の吸引には使用しないこと。
- ・水、有機溶剤、火気類は絶対に吸引させないこと。
- ・過熱するおそれがある光等、熱源にさらしての使用、放置はさけること。
- ・本製品は、電磁妨害波が存在する環境下では誤動作を起こす可能性があり、通信設備、エレベータなどの電磁波を発生させる機器の周辺に設置しないこと。又、本製品の周辺では携帯電話機などの電磁波を発生させる機器を使用しないこと。
- ・フードを外した状態、関節カバーを外した状態で使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観形状・構造

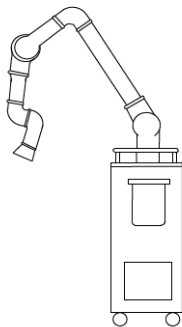

2. 原理

本製品は、操作線から入力により、ブロワが起動され、歯科診療時における高速切削で患者の口腔外に排出される粉塵を吸引する。内蔵のフィルタは粉塵を分離して、ブロワに切削物が吸引されないようになっており、ブロワからの排気は本体内に排気され、外に排気される。

【使用目的又は効果】

本製品は、歯科専用に設計された吸引器で、歯科治療中に口腔から発生する、水、血液、唾液及び碎片又は口腔外に飛散する飛沫を除去する機械である。

【使用方法等】

1. 使用前

- ①各関節の折り曲げ方向を示す矢印を確認してください。

2. 使用中

- ①第1関節を、適当な角度まで折り曲げます。（同時に第2アームを水平にしながら操作すると軽くなります。）
- ②第2関節を、適当な角度まで折り曲げます
- ③グリップを前方へ静かに引きながら第3、第5関節の角度を合わせます。
- ④グリップを握って回転を行い。位置の微調整を行います。
- ⑤フードの方向変更は、グリップと関節を回転させます。またはグリップとフードソケットを回転、およびフードの根元とグリップを回転させて微調整します。
- ⑥メインスイッチをON（入）にするとモーターが回転して吸引力が生じ、吸引が開始されます。
- ⑦使用を中止するときはメインスイッチをOFF（切）にするとモーターが停止し吸引力も停止します。

3. 使用后

- ①使い終わったら第1アームは直立させ、第2アームを斜下向きにします。
- ②または第1アームを真上、第2アームを横向きにし、第3関節を真下に向きにします。

【使用上の注意】

1. 熟練した者以外には本製品を使用しないこと。
2. 本製品を設置するときには、次の事項に注意すること。
 - ①水のかからない場所に設置すること。
 - ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分など含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
 - ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - ⑤電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意すること。
 - ⑥アースを正しく接続すること。
3. 本製品を使用する前に次の事項に注意すること。
 - ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
 - ②すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください

4. 本製品の使用中は次の事項に注意すること。
- ①診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。
 - ②本製品全般及び患者の異常のないことを絶えず監視すること。
 - ③本製品及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で本製品の作動を止めるなど適切な処置を講ずること。
 - ④本製品に患者が直接触れることのないよう注意すること。
5. 本製品の使用後は次の事項に注意すること。
- ①定められた手順により操作スイッチなどを使用前の状態に戻したのち、電源を切ること。
 - ②コード類の取り外しに際してはコードを持って引き抜くなど無理な力をかけないこと。
6. 故障したときは触らずに適切な表示を行ない、修理は専門家にまかせること。
7. 本製品を改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管（設置）方法

保管場所については次の事項に注意すること。

- ①水のかからない場所に保管すること
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場に保管すること
- ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと
- ⑤本機は次回の使用に支障ないように必ず清掃しておくこと

2. 保管（設置）条件

- ・温度 10～40℃
- ・湿度 30～75%
- ・気圧 700～1060hPa

3. 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り 15 年間とする。〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

- 1. 詳細については取扱説明書の保守点検の項をご使用前に必ずお読み下さい。
- 2. 本製品及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 3. しばらく使用しなかった本製品を再使用するときには使用する前に必ず本製品が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市大字東本郷118-1

電話番号：048-234-8291

取扱説明書を必ずご参照ください
