

機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 家庭用電気マッサージ器（JMDN コード 34662000）

restool スツールフットマッサージャー

【警告】

- 使用前にフットカバーや保護カバーの破れの有無を点検し、破れがあるときは直ちに使用を中止する。[巻き込みによる傷害のおそれ]

【禁忌・禁止】

- 他の治療器と同時に使用しない。[意図しない動作のおそれ]
- のどや頭部、胸部、腹部、骨部（ひじ、ひざ等）に使用しない。[傷害のおそれ]
- 治療部位の周りにアクセサリなどを着けた状態で使用しない。[傷害のおそれ]
- 次のような人には使用しない。
 - ・食後および飲酒後の人
 - ・車や機械の運転中の人
 - ・自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人
 - ・子供
 - ・補助を必要とする人
 - ・医師からマッサージを禁じられている人。例えば血栓（塞栓）症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む。）など


【形状、構造及び原理等】

1. 構成


- ・本体
- ・AC アダプター（電源ケーブルを含む）

2. 外観図

●本体

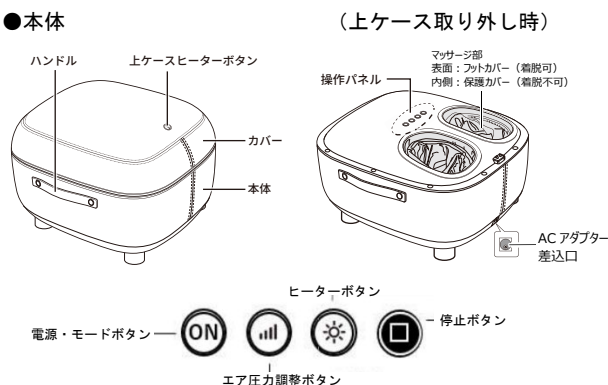

●AC アダプター（電源ケーブルを含む）

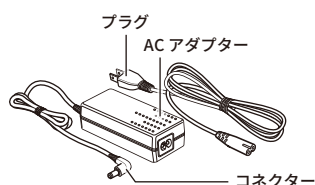

3. 本体寸法及び重量

- ①寸法 約 372 (W) × 434 (D) × 307 (H) mm
- ②重量 約 7.7kg (AC アダプター含む)

4. 作動・動作原理

選択したモードで、電動機及びエアバッグが稼働し、エア圧力、指圧ローラー及びたたきパーツにより、治療目的の身体部位の筋肉組織を刺激・マッサージする。15 分経過するとマッサージが終了するオートパワーオフ機能を有する。左右のマッサージ部にはそれぞれヒーターが組み込まれている。

5. 定格

電氣的定格（本体）：DC24V、48W（ヒーター9.4W）

電氣的定格（AC アダプター／型式 GM51-240200-D）：

入力（100-240VAC、50/60Hz、2.0A）

出力（24VDC、2A）

定格時間：オートパワーオフ約 15 分

許容使用環境：温度 0℃～40℃、湿度 10～70%RH（結露無し）

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ①本体を安定した場所に設置し、本体から上ケースを外す。
- ②AC アダプターのコネクターを本体の AC アダプター差込口に接続し、プラグをコンセントに差し込む。
- ③椅子やソファ等に腰掛け、マッサージ部に両足を入れる。

2. 使用中（操作中）

- ①操作パネルの電源・モードボタンを長押しして電源をオンにする。電源・モードボタンが白く点灯する。
- ②電源・モードボタンを短押しして好みのモードを選択すると、マッサージが開始する。
電源・モードボタンを押すたびに、モードが切り替わる。モードボタンは選択モードにより点灯色が変わる。

モードと点灯色	指圧ローラーの回転数	エア圧力の回数
モード未選択（白）	-	-
リラクスマード（青）	少	少
ノーマルモード（緑）	少	多
しっかりモード（赤）	多	中

たたき機能は、選択モードに関係なく一定回数で動作する。15 分後に自動でマッサージが終了する。途中で終了したい場合、操作パネルの停止ボタンを押す。又は、電源・モードボタンを長押しする。

- ③モードを選択すると、操作パネルのエア圧力調整ボタンが青く点灯する。エア圧力調整ボタンを押すたびに、エア圧力の強さが「弱（点灯色：青）」「中（点灯色：緑）」「強（点灯色：赤）」に切り替わる。
- ④操作パネルのヒーターボタンを押すと、ヒーターボタンが赤く点灯し、マッサージ部が温くなる。オートパワーオフによりヒーターは約 15 分で自動的に終了する。途中でヒーターを止めたい場合には、もう一度ヒーターボタンを押す。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

3. 使用後の作業

- ①マッサージ部から両足を抜く。
- ②AC アダプターを本体及び電源から取り外す。
- ③次回の使用に差し支えないようにして終了する。

【使用上の注意】

1. 次の場合には医師と相談のうえ使用する。

- ・心臓に障害のある人 ・悪性腫瘍のある人
- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・有熱期（体温 38℃以上）の人（例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動）の強い時期にある人、衰弱している人）
- ・糖尿病などによる高度な末しょう循環障害からくる知覚障害のある人
- ・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性[とう（疼）痛性]疾患の人
- ・背骨（脊椎）に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- ・皮膚に創傷や異常のある人
- ・けんしょう（腱鞘）炎の人 ・安静を必要とする人
- ・その他、医療機関で治療中の人

2. 重要な基本的注意

①基本的注意

- ・使い始めは弱い刺激、短時間でのマッサージから使用を開始する。また敏感肌の方は、お肌の様子を見ながら使用する。
- ・しばらく使用しても効果が表れない場合、医師に相談する。
- ・本製品の本体及びACアダプターに何らかの故障や異常が発見されたときは、ただちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜く。絶対に使用しない。勝手に修理などせず、発売元（セールス・オンデマンド株式会社 TEL 0120-542-093）に連絡する。
- ・子供の手の届く場所、浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所、直射日光のあたる場所や熱を発する器具の近くで使用、保管しない。
- ・身体が濡れた状態での使用やACアダプターの抜き差しはしない。
- ・付属のACアダプター（型式 GM51-240200-D）以外は使用しない。
- ・付属のACアダプターを本商品以外に使用しない。
- ・業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。機器を他の人と共有する際は清潔なフットカバーを使用する。
- ・子供には本体の上で遊ばせない及び上に乗らせない。
- ・本商品は表面が熱くなるため、やけどのおそれがある。熱に敏感ではない人は注意して使用する。

②使用前の注意事項

- ・本書及び取扱説明書を読み、その指示・手順に従い使用する。
- ・本体及びACアダプターにほこり等が付着している場合は拭き取り、清潔に保つ。
- ・ケーブルにはゆとりを持たせて使用し、すべてのコードが容易に離脱しないように、正しく確実に接続されていることを確認する。
- ・操作パネルの各ボタンやタイマーなどが正常に作動するか

確認する。特に前回の使用から間があいた場合には使用前に動作確認を行う。

- ・使用前に保護カバーに破損がないか、フットカバー内部に異物がないかを確認する。

③使用中の注意事項

- ・保護カバーを外した状態、破損した状態で使用しない。
- ・定格時間（1日15分以内）を超えての使用をしない。
- ・使用時に強く押し付けたりしない。
- ・本製品に故障を発見した場合には使用を直ちに中止し、電源を切る。
- ・身体に異常を感じたときは使用を直ちに中止する。
- ・停電のときは、直ちにACアダプターをコンセントから抜く。

④使用後及び保管における注意事項

- ・コード類を取り外すときは、ACアダプター本体又はコネクタ、差込口を持って行き、途中のコードを引っ張ったりしない。
- ・使用後は、本体及びACアダプターを次回の使用に支障のないように清浄にして、湿気の少ないところに保管する。
- ・コード類はねじれをほどこいて保管する。
- ・長期間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜く

3. 不具合・有害事象

- ・使用した箇所に一時的に赤みが出る場合がある。時間の経過でもとにもどる。

【保管方法及び有効期間等】

1. 環境条件

推奨保管環境：温度-10℃～70℃、湿度10～70%RH（結露無し）

2. 耐用期間

製品出荷後 3 年（自己認証（当社データ）による）

注：耐用期間は、定期的な保守・点検及び必要に応じた修理を行うことによって、性能が維持できる期間を意味する。

【保守・点検に係わる事項】

- ・お手入れの前に必ず電源を切り、ACアダプターを抜く。
- ・本体が汚れた場合は乾いた柔らかい布で汚れを拭き取る。
- ・汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませてよく絞った布で拭き取り、乾いた柔らかい布でから拭きする。
- ・本体及びACアダプターに水をかけない。水洗いは絶対にしない。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤類は器具を痛めるので使用しない。
- ・本製品は分解・改造しない。
- ・本製品が故障した場合（保護カバーに破損が生じた場合を含む）には、勝手に修理などせず、発売元（セールス・オンデマンド株式会社 TEL 0120-542-093）に連絡する。
- ・本商品を廃棄するときは分解せず、お住まいの自治体の指導に従う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社

TEL 048-234-8291

外国製造業者：NINGBO FULLJOY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., Ltd.（中国）

（ニンボーフルジョイエレクトロニックテクノロジー）

取扱説明書を必ずご参照下さい。