

パワードリーミング

再使用禁止

【警告】

本体を誤って水中に落としたときは、感電の原因になるので、
(1) 電源プラグをコンセントから抜き (2) 本体を
引き上げ (3) お買い上げの販売店に必ず修理を依
頼する。電源プラグに付いたほこりなどは、取り除く。(電
源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良をおこ
し、火災の原因) ※ 電源プラグをコンセントから抜き、乾い
た布でほこりを拭取る。電源プラグはコンセントに根元まで差
し込む。(差込が不十分だと、感電や発熱による火災の原
因) お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
(感電の原因) 交流100V以外の電源は使用しない。
(火災・感電の原因) 電源コード・電源プラグを損傷する
ようなことはしない。・ステップル () 等で固定する・傷つけ
る・加工する・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・熱器具に近
づける・重いものを乗せる・束ねる・挟み込む などしない。
(傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因) ※
電源プラグをコンセントから抜く時は、コードを持たずに電源
プラグを持って抜く。※ 電源コードや電源プラグの修理はお
買い上げの販売店に相談ください。電源コードや電源プラグ
が傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。
(感電・ショート、発火の原因) 本体は水洗いしたり、
水をかけたりしない。(漏電・感電の原因) 浴室などの
湿気の多い場所で使用しない。(漏電・感電の原因)
濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。(感電の原因)
本器の改造、分解、修理は絶対しない。(火災・感電の原
因) ・修理は販売店にご相談ください。


【禁忌・禁止】

・お子様に単独で操作するのをおやめください。・製品に金属
片、針金、針などを挿入しないでください。・他の電気器具と
併用して使用しないでください。・金属繊維などの導電性材
料を含む枕には使用しないでください。・製品を直接火の上
に置いたり、熱源や発火源の近くに置かないでください。・こ
の製品を不安定な高湿度または高温の環境で使用しないで

ください。

【形状・構造及び原理等】

形状



構造・構成ユニット


- 1) 本体
- 2) 電源アダプター差込口
- 3) 電源状態表示ランプ
- 4) AC アダプター

【使用目的又は効果】

本電位治療器は、人体に電圧を負荷し、電界を人工的に生成し、
安定した電界でやさしく包み込む制御回路にて電位を発生さ
せ、電位出力を本体より出力する。電位治療器として不眠症の
緩快 一般家庭で使用する。

使用目的又は効果に関連する使用上の注意

※ 本体を使用される最初の頭の設置位置で、効果が大きく変
る場合がありますので、使用 当初の頭の設置位置は、下図Aの
ようにしてご使用ください。※ 就寝される時には ◆ 仰向け寝
の場合→後頭部中央が本体中央部付近になるようにしてご使

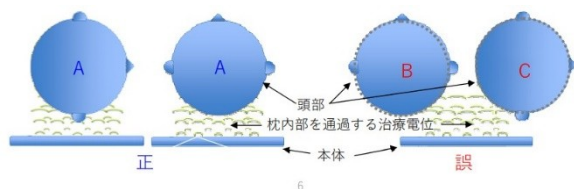

用ください。◆ 横向き寝の場合→耳が本体中央部付近になるようにしてご使用ください。

【使用方法等】

1) 電源アダプタの DC 側端子④を本体電源アダプタ差込口⑤に差し込みます。2) シーソースイッチ⑥が切 (OFF) であることを確認してください。3) 枕①の下部中央の下に本体②の下部中央を合わせて置きます。4) 電源アダプタ③の AC 端子⑦を AC100V コンセント⑧に差込みます。5) シーソースイッチ⑥を上図の赤い矢印 (ON を示す方向) を押すことで電源が入 (ON) になります。※ 電源状態表示ランプ⑨が最初に2度点滅し、その後点灯します。この状態で本器は正常運転となっております。6) 50分に達すると、電源状態表示ランプ⑨が連続点灯から点滅に変わり、運転を自動的に停止し、切 (OFF) の状態になります。7) 再度作動させるには、電源スイッチ⑥を上図の赤い矢印 (OFF を示す方向) にし、電源を切ります。この時電源状態表示ランプ⑨は消えています。2～3秒待って赤い矢印で ON を示す方向に押してください。8) 完全に停止するには、電源状態表示ランプ⑨が消えていることを確認してください。点滅している場合は、電源スイッチ⑥を上図の青い矢印 (OFF を示す方向) にしてください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1) 本製品の電源を入れるときは部品の上に、携帯電話、イヤホン、その他の電気製品等がないことを確認してください。2) 本製品の分解、改造、再組み立て、穴あけなど損傷を与えることはしないでください。3) 本製品を水や他の液体に浸したり、火器や爆発物などの危険な物体の近くに置かないでください。4) 本製品を子供、年齢に比べて精神的、肉体的、または社会的発達があまり進んでいない人、または取扱説明書の内容を理解できない人などが使用される場合は、本製品の使用に関する指示と安全上の注意を完全に理解しておられる方が操作してください。

不具合

その他の不具合

現象 ここを点検してください 直し方 電源が入らない 電源コードの状態は？ コンセントに入っていますか？ プラグなどが破損していませんか？ 主電源は入っていますか？ 電源状態表示ランプが青色になっているかを確認してください 本体が結露していませんか？ 結露により正常に動作しないことがありますので 1時間程度放置した後、再度電源を入れてください。電子機器にノイズが入る テレビ、ラジオ、パソコン等と別のコンセントを使用し、できるだけ話して使用してください。突然電源が切れる 過電流を感知すると安全回路が作動し、電源がきれることがあります。電源を切り、再度電源を入れ直してください。※上項の他にセットした動作と異なる動作をした場合は、一度電源スイッチを切り、少し経ってから (1分程度)再度電源を入れてください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

ACアダプターを本体から外してください。(電源コードをACアダプターに巻きつけない) お手持ちの箱や袋入れ、高温になるところを避け、湿気、埃の少ない場所に保管してください。※乳幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。

耐用期間

6 年

【主要文献及び文献請求先】

文献請求先

NewroCare Institute Japan 株式会社
福岡県福岡市東区多の津二丁目 4-6
092-710-7562

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

NewroCare Institute Japan 株式会社
福岡県福岡市東区多の津二丁目 4-6
092-710-7562

【付属機器の取扱い及び説明】

AC アダプター (DQS751-240300-2) 定格入力 : 100V(50-60Hz) 定格電圧 : DC24V 定格出力電流 : 3A