


ゆびまもりか

【禁忌・禁止】

- ・同一患者以外への再使用禁止。
- ・動揺歯がある場合は使用しないこと。[歯が抜ける恐れ]
- ・顎顔部、歯、口腔または咽頭部に外傷又は損傷がある、もしくはそれらの部位の手術を受けたばかりの患者には使用しないこと。[悪化する恐れ]
- ・嘔吐を繰り返している場合は使用しないこと。[嘔吐を誘発する恐れ]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状

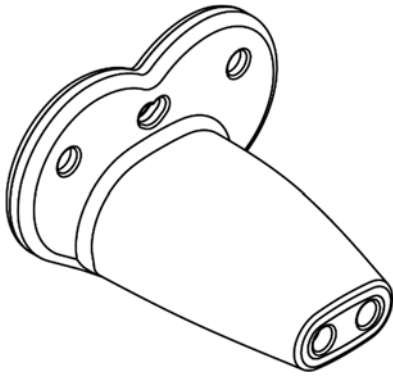

2. 原材料

ナイロン 6、スチレン系熱可塑性エラストマー

【使用目的】

本品は、歯科治療において患者の開口状態を保持する目的で使用する。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 手袋を装着し、指に本品を装着します。
3. 本品を装着した指を患者の口に入れます。
4. 患者に本品を噛ませ、開口を保持します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品は半永久的に使用できる製品ではない。使用開始から 2 ヶ月を目安に廃棄、交換すること。
- ・本品を複数の患者で共有しないこと [交差感染の恐れ]
- ・使用後は必ず水またはぬるま湯で洗浄し保管すること。
- ・本品を薬液へ長時間漬けたままにしないこと。
- ・本品の外観(指の挿入部分も含む)に破損等の異常を確認した場合は直ちに使用を中止すること。
- ・金属製品との接触等により、本品に傷がつかないように注意すること。
- ・中度以上の歯肉または歯の疾患を有する患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹・かゆみ・かぶれ等の異常があらわれた場合には、直ちに使用を中止し専門医に相談すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前の点検

本品の外観（指の挿入部分も含む）に破損等の異常がないことを確認すること。

2. 洗浄

- ①使用後、目視で確認できる汚れ、血液及び唾液等はブラシ等を用いて取り除くこと。
- ②水またはぬるま湯ですすぐこと。

3. 消毒

本品は、市販のは乳瓶用消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム溶液）で消毒することが可能である。
消毒は消毒剤の使用 방법에従い、消毒後は水またはぬるま湯ですすぎ乾燥させること。

4. 滅菌

本品は、高圧蒸気滅菌（122℃、10 分間）が可能である。
必要に応じて行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日商産業株式会社
静岡県駿東郡長泉町東野 50-10
TEL：055-987-7700

製造業者：日商産業株式会社